

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 呼吸ガス混合器 JMDN コード：36327009

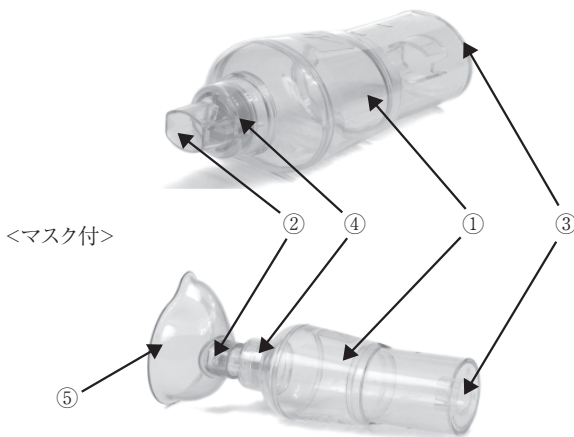
A2Aスプレー

【警告】**〈使用方法〉**

・薬剤の種類、用法・用量については医師の指示に従うこと。

【禁忌・禁止】**〈使用方法〉**

・本品は同一患者使用に限り、複数の患者に使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】**＜標準品＞**

- ① 本体(ABS)
- ② マウスピース(ABS)
- ③ pMDI接続部(ポリマー)
- ④ 換気バルブ(シリコン)
- ⑤ マスク(ポリマー)

【使用目的又は効果】

液体の医薬品をエアロゾルとして患者が吸入する空気の中に噴霧するために用いる機器である。

【使用方法等】

- (1) 定量噴霧式吸入器(pMDI)をよく振ってからpMDIのキャップを外します。
- (2) スプレー本体を伸ばし、pMDIのマウスピースを本体底部にあるpMDI接続部にセットします。
- (3) スプレー本体のマウスピースをくわえます。マスクを使用する場合、鼻と口を覆うように顔に密着させて下さい。
- (4) pMDI取扱説明書に従ってpMDIを作動させ、医師に定められた回数だけスプレー本体内に薬剤を噴射します。
- (5) ゆっくり息を吸い込み、数秒間息を止めた後、ゆっくり吐き出します。
- (6) 医師より1度に複数回吸入の指示がある場合は、30秒以上間隔をあげ、繰り返し吸入を行って下さい。

【使用上の注意】

- (1) 使用目的以外に使用しないで下さい。
- (2) 本体を分解・改造しないで下さい。
- (3) 破損の恐れがあるため、落下等、過剰な力を与えないで下さい。
- (4) 感染リスクの高い疾患による特殊な衛生上の配慮が必要な場合は、医師等の指示に従い、適切な処置を行って下さい。
- (5) 本品に損傷や異常が発生したときは使用を中止して下さい。

【保管方法及び有効期間等】**1. 保管方法**

- (1) 高温、多湿、直射日光を避け、常温、常圧、水のかからない所で適切に保管して下さい。
- (2) しばらく使用しないときは、保管前に洗浄し、乾燥させた上で保管して下さい。

2. 使用期間

使用開始後約1年。

使用状況に合わせて適宜交換して下さい。

【保守・点検に係る事項】**洗浄・消毒・滅菌方法**

本体内部への薬剤固着を防止するため、1週間に1回程度、下記の手順で洗浄すること。

- (1) マウスピースを含む本体上部やマスクを外し、スプレー本体を伸ばします。
- (2) pMDI接続部の柔らかいゴムを外します。
- (3) 洗剤液(台所用合成洗剤等)入れたぬるま湯の中でゆすって洗浄します。
- (4) 洗剤を清潔な流水ですすぎ、水滴を十分に切り、自然乾燥させて下さい。
布等で拭き取ると細かな繊維が本体内部に付着する場合がありますので、避けて下さい。
- (5) 完全に乾いたことを確認し、取り外した部品を組み立てて保管して下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**製造販売業者**

松吉医科器械株式会社

住所：〒113-8520 東京都文京区湯島3-14-9

電話：03-5816-8819

製造業者

Clement Clarke Int.Ltd(イギリス)