


機械器具 02 医療用照明器
一般医療機器 一般的名称：耳照明器 JMDN コード：41238000

ファイバーオトスコープ

【禁忌・禁止】

- ・使用目的以外に使用しないで下さい。
- ・本品を分解・改造しないで下さい。
- ・すべての部品が装着されていない状態で使用しないで下さい。
- ・すべての操作において、定められた操作・使用方法以外の操作をしないで下さい。

【形状・構造及び原理等】

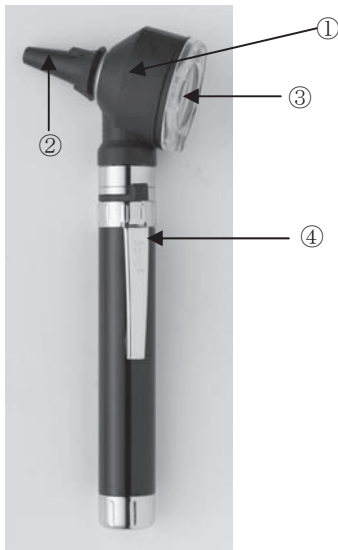

- ①ヘッド（ポリ塩化ビニール/2.5VLEDランプ内蔵）
 - ②スペキュラ（ABS）
 - ③レンズ（アクリル）
 - ④ハンドル（アルミ/単3乾電池×2コ使用）
- 寸法：全長160mm
定格電圧：3V

【使用目的又は効果】

本製品は、耳道を照明する装置である。

【使用方法等】

- (1) 患者の耳孔に合ったスペキュラを取り付ける。
- (2) ハンドル上部のスイッチを左へスライドさせ電源をONにし、点灯する。
- (3) 耳道にスペキュラ先端部を挿入し、耳道を照明する。
- (4) レンズを右に回すとレンズが外れ、左に回すと元の位置に戻る。
- (5) ハンドル上部のスイッチを右にスライドさせ電源をOFFにし、消灯する。

【使用上の注意】

- (1) 使用目的以外に使用しないで下さい。
- (2) 本品を分解・改造しないで下さい。
- (3) すべての部品が装着されていない状態で使用しないでください。
- (4) 定められた操作・使用方法以外の使用をしないで下さい。
- (5) 故障または異常が発生したときは使用を中止し、速やかに適切かつ安全な処置を採って下さい。

【保管方法及び有効期間等】

高温、多湿、直射日光を避け、常温、常圧、水のかからない場所で適切に保管をして下さい。
また、長期間使用しない場合は、電池を取り外して保管してください。

【保守・点検に係る事項】

- (1) 使用前に、正常かつ安全な動作とランプが点灯することを確認して下さい。
- (2) 照明が暗くなったとき、または照明が点灯しないときは、電池あるいはLEDランプの交換を行ってください。
- (3) 使用しない時は電源をOFFにして下さい。
- (4) 故障または異常が発生したときは使用を中止し、速やかに適切かつ安全な処置を採って下さい。
- (5) 本体およびスペキュラは消毒用エタノールまたは中性洗剤で清拭して下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

松吉医科器械株式会社

住所：〒113-8520 東京都文京区湯島3-14-9

電話：03-5816-8819

製造業者

CHIN KOU MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD. (台湾)