

機械器具 80 はり又はきゅう用器具

一般医療機器 再使用可能な毫鍼（JMDN 35207001）


ステンレス鍼

【禁忌・禁止】

- 金属や異物に対して重篤なアレルギーがある患者に使用しないこと。


【形状・構造及び原理等】

(1) A タイプ

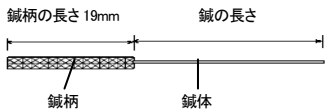


		鍼の長さ（ ）内 mm					
		5 分 (15)	1 寸 (30)	1 寸 3 分 (39)	1 寸 6 分 (48)	2 寸 (60)	2 寸 5 分 (75)
太 さ	0 番 (0.14)	○	○	○	○	○	○
	1 番 (0.16)	○	○	○	○	○	○
	2 番 (0.18)	○	○	○	○	○	○
	3 番 (0.20)	○	○	○	○	○	○
	4 番 (0.22)	○	○	○	○	○	○
	5 番 (0.24)	○	○	○	○	○	○
	6 番 (0.26)	○	○	○	○	○	○
	7 番 (0.28)	○	○	○	○	○	○
	8 番 (0.30)	○	○	○	○	○	○
	10 番 (0.34)	○	○	○	○	○	○

(2) 長柄タイプ

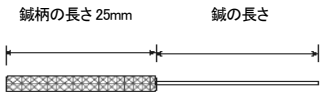


		鍼の長さ（ ）内 mm		
		1 寸 (24)	1 寸 3 分 (33)	1 寸 6 分 (42)
太 さ	3 番 (0.20)	○	○	○
	4 番 (0.22)	○	○	○
	5 番 (0.24)	○	○	○

(3) B タイプ

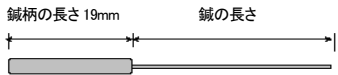

		鍼の長さ（ ）内 mm					
		5 分 (15)	1 寸 (30)	1 寸 3 分 (39)	1 寸 6 分 (48)	2 寸 (60)	2 寸 5 分 (75)
太 さ	0 番 (0.14)	○	○	○	○	○	○
	1 番 (0.16)	○	○	○	○	○	○
	2 番 (0.18)	○	○	○	○	○	○
	3 番 (0.20)	○	○	○	○	○	○
	4 番 (0.22)	○	○	○	○	○	○
	5 番 (0.24)	○	○	○	○	○	○
	6 番 (0.26)	○	○	○	○	○	○

(4) エコノミータイプ

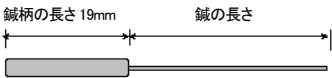

		鍼の長さ（ ）内 mm		
		1 寸 (30)	1 寸 3 分 (39)	1 寸 6 分 (48)
太 さ	0 番 (0.14)	○	○	○
	1 番 (0.16)	○	○	○
	2 番 (0.18)	○	○	○
	3 番 (0.20)	○	○	○
	4 番 (0.22)	○	○	○
	5 番 (0.24)	○	○	○

【使用目的又は効果】

鍼治療用器具

【使用方法等】

施療部の汗や汚れをふきとり、清潔にしてから使用してください。

【使用上の注意】

- 本製品は医家向けですので一般の方のご使用はできません。
- ご使用前に包装の破損や汚損のある場合は使用しないで下さい。
- ご使用前に本製品の点検を行い、湾曲、損傷のある場合は使用しないで下さい。
- 傷、湿疹などのある箇所は避けて施療してください。
- 本製品の使用により、発疹、発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合には使用を中止し、医師にご相談ください。
- 筋緊張の場合、折針の危険性が生じます。患者の緊張を取り除き太い針をご使用下さい。
- 感冒など咳のある場合、十分注意して施療願います。
- 抜針時に針が抜けなくなった場合、無理に抜こうとせず筋の緊張をほぐす処置をして緩やかに抜針願います。
- 抜針時に針に湾曲やひねりを加えた状態で抜針すると折針の危険が生じます。通常以外の使用方法による傷害の発生については弊社はその責任を負いません。
- 刺入深度は針体長の 1/2 までを基準とし最大深度は針体部を 20mm 以上残し刺入してください。
- 通電はしないで下さい。
- 本製品を再使用する場合、他の人には使用しないでください。
- ご不明な点や製品についてのご意見、ご要望は弊社までご連絡下さい。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

高温、多湿、直射日光、化学物質による汚染などの可能性がある場所を避け幼児の手の届かない所に保管してください

＜有効期間＞

有効期間 1 年間

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称等】

製造販売業者：株式会社松葉

電話番号：0569-42-0252