

機械器具 80 はり又はきゅう用器具


一般医療機器 家庭用貼付型接触粒（JMDN 71026000）

マゲミック

【禁忌・禁止】

- 金属や異物に対して重篤なアレルギーがある患者に使用しないこと。
- この製品はビニールテープの接着材に天然ゴムを使用しています。
（天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には直ちに使用を中止し医師に相談し適切な措置を施してください。）

【形状・構造及び原理等】

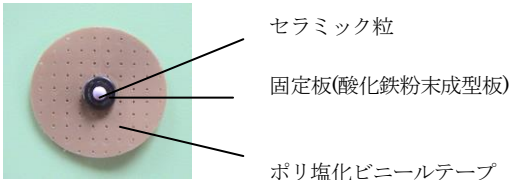

※ポリ塩化ビニールはポリエステル系可塑剤を使用。
※粘着剤は、生ゴム 50%、ポリテルペン系樹脂 20%
ポリブチレン 10%、シクロヘキサン 20%

セラミック粒直径	2～3mm
テープ直径	20～24mm

【使用目的又は効果】

身体のコリの部分に貼付することにより圧迫し、「コリ」の緩和をする。

【使用方法等】

- 貼付部の汗や汚れをふきとり、清潔にしてから使用してください。
- 貼付後 2～3 日毎に貼り替えてください。

【使用上の注意】

- 貼付部の汗などの油分や汚れをふきとって使用して下さい。
- 本品は、一回限りの使用とし、2～3 日毎に貼り替えが効果的です。
- 皮膚表面の傷や湿疹などのある箇所を避けてお使い下さい。
- 本品の使用により発疹、発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合には、使用を中止し、医師にご相談下さい。
- アトピー、アレルギー疾患の方は予めテストしてお使い下さい。
- 入浴される場合には貼付場所をタオルなどで擦ると絆創膏が浮き上がったり、はがれやすくなりますのでご注意ください。
- 高温多湿や直射日光を避け幼児の手の届かない場所に保管して下さい。冷蔵庫での保管は出来ません。
- ペースメーカー等体内埋込医療電子機器を装着している方は使用しないでください。

- 本品は食べるものではありません。
- ゴミ処理は自治体の分別方法で処分願います。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞
高温、多湿、直射日光、化学物質による汚染などの可能性がある場所を避け幼児の手の届かない所に保管してください。
＜有効期間＞
有効期間 2 年間

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称等】

製造販売業者：株式会社松葉
電話番号：0569-42-0252