

機械器具 80 はり又はきゅう用器具

一般医療機器 再使用可能な毫鍼(JMDN:35207001)

円皮鍼 20


【禁忌・禁止】

- ・原則として、次の患者には使用しないこと。
- ・金属や異物に対して重篤なアレルギーがある患者に使用しないこと。
- ・この製品はビニールテープの接着材に天然ゴムを使用しています。

(天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には直ちに使用を中止し医師に相談し適切な措置を施してください。)

- (3) ご使用前に製品の点検を行い、湾曲、損傷のある場合は使用しないで下さい。
- (4) 傷、湿疹などのある箇所は避けて施療してください。
- (5) 本品の使用により、発疹、発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合には使用を中止し、医師にご相談ください。
- (6) 感冒など咳のある場合、十分注意して施療願います。
- (7) 抜針時に針が抜けなくなった場合、無理に抜こうとせず筋の緊張をほぐす処置をして緩やかに抜針願います。
- (8) 抜針時に針に湾曲やひねりを加えた状態で抜針すると折針の危険が生じます。通常以外の使用方法による傷害の発生については弊社はその責任を負いません。
- (9) ご不明な点や製品についてのご意見、ご要望は弊社までご連絡下さい。

＊【形状・構造及び原理等】

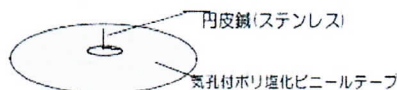

※多孔質ビニールはポリエステル系可塑性剤を使用。
※粘着剤は、生ゴム 50%、ポリテルペン系樹脂 20%
ポリブチレン 10%、シクロヘキサン 20%

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

高温、多湿、直射日光、化学物質による汚染などの可能性がある場所を避け幼児の手の届かない所に保管してください。

<有効期間>

有効期間 2 年間

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称等】

製造販売業者：株式会社松葉

電話番号：0569-42-0252

(1) 鍼

	鍼の太さ	鍼の長さ	リングの外径
小	0.22mm	1.1 mm	2.0 mm
中	0.22 mm	1.3 mm	2.6 mm
大	0.22 mm	1.5 mm	3.2 mm

ステンレス製

(2) テープ

単位 mm

テープの外径	テープの厚さ
10.0～24.0	0.14～0.55

【使用目的又は効果】

本品は、外科的麻酔、疼痛緩和、又は他の治療効果を促進するため、末梢神経を刺激する鍼治療に使用する。

【使用方法等】

- (1) 貼付部の汗や汚れをふきとり、清潔にしてから使用してください。
- (2) 皮膚面に直角に貼付してください。
- (3) 貼付後 2～3 日毎に貼り替えてください。

【使用上の注意】

- (1) 本製品は医家向けですので一般の方のご使用はできません。
鍼灸師の指示のもとでお使い下さい
- (2) ご使用前に包装の破損や汚損のある場合は使用しないで下さい。