

機械器具 7 6 医療用吸入器  
一般医療機器 一般的名称：耳鼻咽喉科用ネブライザー 70451000

## ネブライザー


### 【禁忌・禁止】

- ・ キズ・ヒビ割れ・破損がある場合は使用禁止


### 【形状・構造及び原理等】

#### ＜形状＞


#### 1) ネブライザーセット

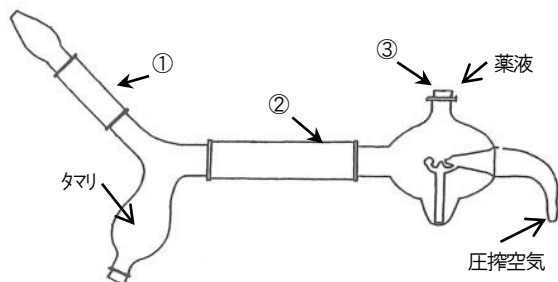

#### 2) L 型

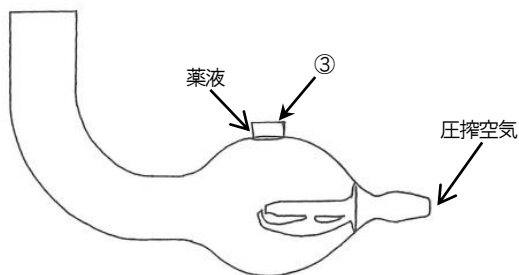

#### 3) ワニ型

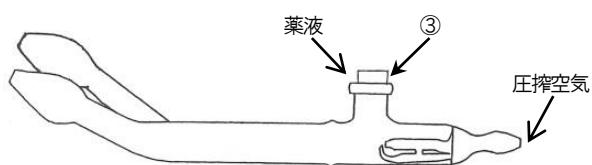

- 《 ①、② 》 : ガラス・シリコンゴム  
《 ③ 》 : 天然ゴム

#### ＜作動・動作原理＞

本品は一旦容器内に貯留した薬液または水を、霧吹き の原理により霧化し、この発生した霧を吸入療法に利用するための圧搾空気作動式ネブライザーであり、施設の圧搾空気に接続して使用する。  
本品は、未滅菌品である。（再使用可能）

### 【使用目的又は効果】

薬液または水の霧化並びに放散

### 【使用方法等】

1. 本品を取り出して、コンプレッサーに送気管を用いて接続する。
2. ゴム栓を外して、薬液又は水を注入する。
3. 圧搾空気をネブライザー内へ送気する。
4. 霧化状態が良好であることを目視で確認後使用する。

### 【使用上の注意】

1. 水又は薬液の注入は必ず所定の場所（ゴム栓を外して）より行うこと。
2. 使用における水又は薬液の液面は床面に対して水平状態であること。
3. 衝撃等には注意すること。
4. 使用後は速やかに適正な方法において洗浄・消毒すること。
- \* 5. この製品は天然ゴムを使用しています。  
天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショック等のアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。  
このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な措置を施してください。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### ＜保管方法＞

保管は衝撃の加わらない場所であること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

株式会社 榎水  
電話番号：03-3813-9466