

類別：機械器具 77 バイブレーター

管理医療機器 一般的名称：家庭用電気マッサージ器（コード：34662000）

ハンディーマッサージャー


【禁忌・禁止】

- 骨粗鬆症など、骨の弱い方は使用しないでください。
- 医師からマッサージを禁じられている方は使用しないでください。
- マッサージ以外の目的で使用するしないでください。また、頭、胸、腹、首の前方、骨部（ひじ、ひざなど）への使用はしないでください。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

・本製品は本体、振動ヘッド、電源コード、電源プラグから成り、本体内部になる振動モーターによって振動ヘッドが振動し、使用者が必要な場所に使用する。

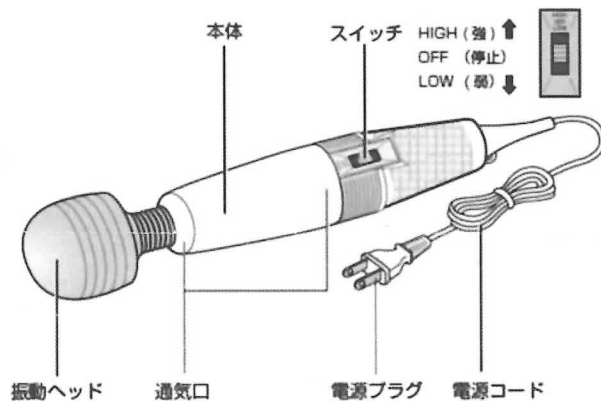

2. 本体の寸法及び重量

寸法：振動ヘッド直径 約 6cm、長さ 約 28cm

重量：約 500g

3. 電氣的定格

定格電圧：AC100V
定格周波数：50/60Hz
定格消費電力：10W
定格時間：20 分

4. 動作原理

本体内部の振動モーターの回転運動をモーターの軸につけられた偏心分銅により振動運動に変換し、変換した振動運動を振動ヘッドに加え、使用者が患部に振動ヘッドを当てることによりマッサージを行う家庭用電気マッサージ器である。

【使用目的、効能・効果】

あんま、マッサージ器の代用。一般家庭で使用する。

【品目仕様等】

振動機能：HIGH 約 6500 回/分
LOW 約 5500 回/分

【操作方法又は使用方法等】

ご使用に当たっては、取扱説明書をよくお読みになってご使用ください。また、機器に異常がないか確認してからご使用ください。

1. ご使用の前に

- ① スイッチが正しく作動することを確認してください。
- ② 電源プラグを差し込む前に、スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。

2. 使用の開始

- ① 電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
- ② 本体を手でしっかり持って、スイッチを入れてください。お好みに応じて「HIGH」「LOW」を使い分けてください。
- ③ マッサージをする部位に振動ヘッドをあててください。

3. 使用の終了

- ① 使用後は、スイッチを「OFF」にしてください。
- ② 電源プラグをコンセントから抜いてください。

【使用上の注意】

1. 次の人は医師とご相談の上、使用してください。

- ・悪性しゅよう（腫瘍）のある人。
- ・心臓に障害のある人や体内機器（ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい医用電気機器）を装着している人。
- ・妊娠初期の不安定期または出産直後の人。
- ・体温 38℃以上（有熱期）の人。
- ・安静を必要とする人。
- ・骨粗しょう症、せきつい（脊椎）の骨折、ねんざ（捻挫）、肉離れなど、急性「とう（疼）痛性」疾患の人。
- ・糖尿病などによる高度な末しょう（梢）循環障害により知覚障害のある人。
- ・適用部位の皮膚に異常（感染症、創傷など）のある人。
- ・背骨、脊椎に異常のある人又は背骨が左右に曲がっている人。
- ・現在医師の治療を受けている人や、特に体に異常を感じている時。
- ・温度感覚喪失が認められる人。
- ・使用しても効果が現れない場合。

2. 使用する環境及び使用条件については、次のことにご注意ください。

- ・危険を起こすおそれがあるので、他の治療器とは同時に使用しないでください。
- ・浴室などの湿気の高い所では使用しないでください。
- ・直接肌に当てて使用せずに、衣服の上から使用してください。

3. ご使用前には次のことにご注意ください。

- ・電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
- ・操作スイッチなどが正常に作動することを確認してください。

取扱説明書を必ずご参照ください。

- ・しばらくご使用にならなかった場合には、(1)(2)に準じるほか本品が正常に、かつ、安全に作動することを確認してください。

CO., LTD (中華人民共和国)

4. ご使用中には、次のことに注意してください。

- ・本品に故障が発見された場合は、直ちに使用を中止し、電源を切ってください。
- ・身体に異常を感じたときは、直ちに使用を中止し、電源を切ってください。
- ・1回の使用時間は15分以内にしてください。同じ部位への使用時間は3分以内にしてください。長時間の使用は、筋肉や神経を痛める原因になります。
- ・停電のときは直ちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・本製品を踏んだり、重いものを載せたり、作動中のマッサージ部に故意に力を加えて、無理矢理止めないで下さい。故障の原因になります。
- ・アクセサリなどの硬いものをつけて使用しないでください。構造部に接触して怪我のおそれがあります。

5. ご使用後は、次の事にご注意ください。

- ・ご使用後は電源を切り、電源プラグを抜いて下さい。
- ・コンセントから抜くときは、電源コードを持たずに電源プラグを持って引きぬいてください。
- ・本品を片付けるときは、次回の使用に支障がないように清掃し、湿気の少ない場所に整理、保管して下さい。

【取扱い上の注意】

- ・取扱いを間違えると不具合を生じることがありますので、使用方法、使用上の注意等を厳守してご使用ください。
- ・子供に使用させたり、本体の上で遊ばせたりしないでください。
- ・寿命の終わった本品は、地域で定める条例に従って廃棄してください。
- ・使用環境温度は、0～30度です。

【保守・点検に係る事項】

- ・故障した場合は勝手にいじらず、販売業者又は製造販売元にご連絡ください。
- ・本品は改造しないでください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- ・汚れやほりを取った後、湿気の少なく結露しない場所に整理・保管してください。
- ・しばらくご使用にならない時は、カバー等を掛けてほりが付着しないようにして下さい。

2. 使用期間等

耐用期間 3年(自己認証(当社算出)による)

【包装】

- ・1個/箱

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所】

製造販売業者：株式会社丸隆

住所：〒151-0073

東京都渋谷区笹塚1-6-2-3アルス笹塚ビル

電話：03-5365-3131

外国製造業者：JINJANG DAKANG ELECTRONICS

取扱説明書を必ずご参照ください。