

充電式コードレスハンディーマッサージャー添付文書


【禁忌・禁止】

- 骨粗鬆症など、骨の弱い方は使用しないでください。
- 医師からマッサージを禁じられている方は使用しないでください。
- マッサージ以外の目的で使用しないでください。
- 頭、胸、腹、関節、骨部（ひじ・ひざなど）へは使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

- 本製品は本体、本体内部リチウムイオン電池、付属品の充電スタンド、AC アダプターから成り、リチウムイオン電池を充電スタンドで蓄電し、その電気で本体内部のモーターによって振動ヘッドが振動し、使用者が必要な場所に使用する。

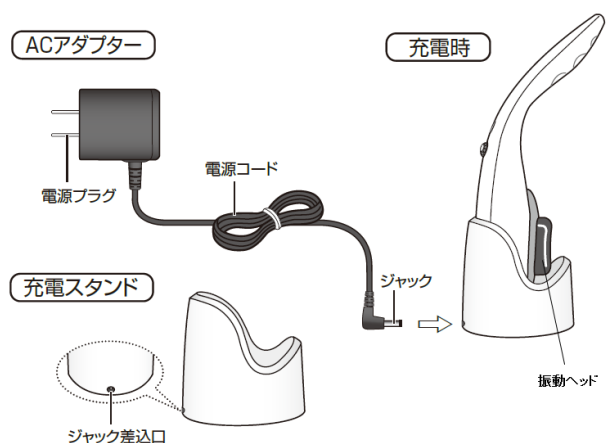

振動機能：強 約 3 8 0 0 回/分 弱 約 2 6 5 0 回/分
(満充電時)

自動オフタイマー：1 5 分

ヒーター機能：最大 4 5℃

使用環境温度：5℃～3 5℃

2. 本体の寸法及び重量

寸法： 振動ヘッド 約 幅 3.1×長さ 6.7×高さ 2.4 (cm)、

本体： 約 全長 41×幅 7.1×高さ 7.8 (cm)

本体重量：約 770g (本体のみ)

3. 電氣的定格

本体	リチウムイオン電池	DC7.4V 1800mAh
	定格	9W (ヒーター2W 含む)
AC アダプター	定格電圧	入力 AC100V 出力 DC9V 1A
	定格周波数	50/60Hz

4. 動作原理

本製品は、本体内部に組み込まれた電池に充電した電気によりモーターの回転運動をモーター軸につけられた偏心分銅により振動運動に変換し、変換した振動運動を振動ヘッドに加え、使用者が患部に振動ヘッドを当てることによりマッサージを行う家庭用電気マッサージ器である。

【使用目的又は効果】

あんま、マッサージ器の代用。一般家庭で使用する。

【使用方法等】

ご使用に当たっては、取扱説明書をよくお読みになってから、ご使用ください。また、機器に異常がないか確認してからご使用ください。

1. ご使用前の準備

本体の電源が OFF (電源 ON/OFF スピード調整ダイヤルが目一杯左に回した状態) になっている事を確認してから充電スタンドに確実にセットし、充電スタンドのジャック差し込み口に、アダプターのジャックを差し込む。AC アダプターを家庭用コンセントに差し込み充電する。ランプが消灯し充電が終わったら、AC アダプターをコンセントから抜いてください。

2. 使用の開始

充電完了後、充電スタンドから本体を外し、本体持ち手をしっかりと持って、電源 ON/OFF スピード調整ダイヤルを右に回す。振動ヘッドが作動し、本体を身体の使用部位に当てて、マッサージをします。振動ヘッドのスピードは、ダイヤルを右に回すと振動回数が多く調整できます。

その状態（作動状態）から、LED 温熱ライト ON/OFF ボタンを押すと、振動ヘッド周辺に付いているヒーター（ランプ赤点灯）が作動し、ヒーター付きのマッサージを行います。使用者が選択できます。

ヒーターは、赤く光りますので視認できます。

3. 使用の終了

使用を開始してから 1 5 分経過すると、タイマーにより自動的に全てが停止してマッサージを終了する。また、途中で使用の停止をしたい場合は、電源 ON/OFF スピード調整ダイヤルを目一杯まで左に回してください。

使用後は、本体を充電スタンドに置いて保管してください。

【使用上の注意】

1. 次の人は医師とご相談の上、使用してください。

- (1) 悪性しゅよう（腫瘍）のある人。
- (2) 心臓に障害のある人や体内機器（ペースメーカーなどの電磁妨害の影響を受けやすい医用電気機器）を装着している人。

取扱説明書を必ずご参照ください。

- (3) 妊娠初期の不安定期または出産直後の人。
 - (4) 体温 38℃以上（有熱期）の人。
 - (5) 安静を必要とする人。
 - (6) 骨粗しょう症、せきつい（脊椎）の骨折、ねんざ（捻挫）、肉離れなど、急性[とう（疼）痛性]疾患の人。
 - (7) 糖尿病などによる高度な末しょう（梢）循環障害により知覚障害のある人。
 - (8) 適用部位の皮膚に異常（感染症、創傷など）のある人。
 - (9) 背骨、脊椎に異常のある人又は背骨が左右に曲がっている人。
 - (10) 現在医師の治療を受けている人や、特に体に異常を感じている時。
 - (11) 温度感覚喪失が認められる人。
 - (12) 使用しても効果が現れない場合。
2. 使用する環境及び使用条件については、次のことにご注意ください。
- (1) 危険を起こすおそれがあるので、他の治療器とは同時に使用しないでください。
 - (2) 浴室などの湿気の高い所では使用しないでください。
 - (3) 直接肌に当てて使用せずに、衣服の上から使用してください。
 - (4) 機器を使用する環境温度は、5～35℃の中でご使用ください。
 - (5) アクセサリーなどの硬いものをつけて使用しないでください。構造部に接触して怪我のおそれがあります。
 - (6) 落としたり強い衝撃をあたえないでください。感電や火災の原因になります。
3. ご使用前には次のことにご注意ください。
- (1) 初めてご使用いただくときは、取扱説明書の記載事項にしたがい操作して下さい。
 - (2) 操作スイッチなどが正常に作動することを確認してください。
 - (3) しばらくご使用にならなかった場合には、(2)(6)に準じるほか、本製品を満充電し本品が正常に、かつ、安全に作動することを確認してください。
 - (4) 本体と本製品の付属品以外の組み合わせをしないこと。
 - (5) 火災、感電等の恐れがあるため機器を熱源の近くで使用しない、置かないこと。
 - (6) すべてのコードが容易に脱離しないよう正しく確実に接続されていることを確認してください。
4. ご使用中には、次のことに注意してください。
- (1) 本品に故障が発見された場合は、直ちに使用を中止し、電源を切ってください。
 - (2) 身体に異常を感じたときは、直ちに使用を中止し、電源を切ってください。
 - (3) 同じ部位への使用時間は5分以内にしてください。長時間の使用は、筋肉や神経を痛める原因になります。
 - (4) 充電時の停電のときは直ちに電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
 - (5) 本製品を踏んだり、重いものを載せたり、作動中のマッサージ部に故意に力を加えて、無理矢理止めないで下さい。故障の原因になります。
 - (6) 1回の使用時間は15分以内にしてください。

5. ご使用後は、次の事にご注意ください。
- (1) ご使用後は本体の電源を切り、電源プラグを抜いて充電スタンドに置いて下さい。
 - (2) コンセントから抜くときは、電源コードを持たずに電源プラグを持って引き抜いて下さい。
 - (3) 本品を片付けるときは、次の使用に支障がないように清掃し、湿気の少ない場所に保管して下さい。

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管方法
- (1) 汚れやほこりを取った後、常温で直射日光を避け、湿気の少なく結露しない場所に保管してください。
 - (2) しばらくご使用にならない時は、カバー等を掛けてほこりが付着しないようにして下さい。
2. 有効期間等
- 製造の日から適切な保守を行い、正規の保存状態を保った場合に限り、耐用期間3年とする。（自己認証（当社算出）による）

【取扱い上の注意】

- 1. 取扱いを間違えると不具合を生じることがありますので、使用方法、使用上の注意等を厳守してご使用ください。
- 2. 子供に使用させたり、本体で遊ばせたりしないでください。
- 3. 寿命の終わった本品は、リチウムイオン電池を外して地域で定める条例に従って廃棄してください。
- 4. リチウムイオン電池はリサイクル可能です。処分は、地域で定める条例に従ってください。
- 5. 付属品の AC アダプターと充電スタンドは、必ず付属されている物をご使用ください。

【保守・点検に係る事項】

- 1. 初めてご使用いただくときや、長期間使用しなかった機器をご使用いただくときは、取扱説明書のとおりの操作をおこない、正常に作動することをご確認ください。
- 2. 故障した場合は勝手にいじらず、販売業者又は製造販売元にご連絡ください。
- 3. 本品は改造しないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者：株式会社丸隆

住所：〒151-0073

東京都渋谷区笹塚1-62-3アルス笹塚ビル

電話：03-5365-3131

外国製造業者：XIAMEN EMOKA HEALTH SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD
(中華人民共和国)

取扱説明書を必ずご参照ください。