

家庭用電気磁気治療器

# マグネタイザー<sup>MGP型</sup>

magnetizer<sup>®</sup>

## 取扱説明書



### 効能・効果

装着部位のコリ及び血行の改善  
一般家庭で使用する。

- お買上げありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書は必ずお読みの上、正しくお使いください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

### もくじ

|             |     |
|-------------|-----|
| 安全上のご注意……   | 1～4 |
| 各部のなまえ………   | 5   |
| 使用方法………     | 6   |
| 使用例………      | 7～8 |
| アフターサービス……… | 9   |

magnetizer<sup>®</sup> INC

## 安全上のご注意

●ここに示した注意事項は製品を安全にお使い頂き、あなたや他人への危害や損害を未然に防止するためのものです。

誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



**警告**

人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容



**注意**

人が障害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

ここで使用している図記号の意味は次のようになっています。

| 図 記 号 | 意 味                                               |
|-------|---------------------------------------------------|
|       | 特定しない一般的な注意を示します。 [一般の禁止]                         |
|       | 風呂、シャワー等の水場での使用を禁止します。 [水場使用の禁止]                  |
|       | 機器を分解することの禁止を示します。 [分解の禁止]                        |
|       | 特定しない一般的な使用者への指示を示します。 [一般の強制]                    |
|       | 電源プラグをコンセントから抜かなくてはならないことを示します。 [電源プラグをコンセントから抜け] |

## 本書に関するご注意



**注意**

●お読みになったあとはお使いになる方が、いつでも見られる所に必ず保管してください。



●この商品を他の人に譲渡するときは、取扱説明書を必ず貼付してください。



# ① ご使用になる前に



## 注意

●取扱説明書に書かれている以外の使用方法をしないでください。



## 注意

●次のような医用電気機器との併用は、影響を与える可能性がありますので使用しないこと。

- 1) ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植え込み型医用電気機器を使用している人。
- 2) 脳せき(脊)髄液短絡術用圧可変式シャント「頭皮下に埋め込んで脳せき(脊)液を腹くう(腔)にバイパスする目的で長期間使用し、磁気を利用しバルブ圧を変更することで脳せき(脊)髄液の流量が変更可能な医療用具」などの磁気影響を受ける可能性のある医用電気機器を使用している人。

●次の人は、使用前に医師に相談すること。

- \*悪性腫瘍のある人。
- \*心臓に障害のある人。
- \*体内に金属を入れている人。
- \*妊娠初期の不安定期または出産直後の人。
- \*糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害による知覚障害のある人。
- \*温度感覚喪失が認められる人。
- \*皮膚に感染症または創傷のある人。
- \*安静を必要とする人。
- \*体温38℃以上(有熱期)の人。
- 例1. 急性炎症症状「けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など」の強い時期。
- 例2. 衰弱しているとき。
- \*ねんざ(捻挫)、肉離れなど、急性「とう(疼)痛性」疾患の人。



## 警告

●中継電源コードを直接 AC コンセントに差し込まないでください。定格時間を越え故障の原因となります。



## 注意

- 電源コード接続する前に必ずタイマースイッチが《切》になっていることをお確かめください。
- 電源コードは正しく確実に接続してください。本機は必ず家庭用交流100V電源でお使いください。
- しばらく使用せずに放置されたあと、再び使用されるときは事前に安全かつ正常に動作することを確認してください。機器に異常が見られるときは使用しないでください。その際はお求めの販売店または製造元にご連絡ください。
- 時計・磁気カードなどの磁気の影響を受けるものは近づけないこと。
- 他の治療器と同時に使用しないこと。



## ② 使用する環境および使用条件

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>警告</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●浴室、サウナ等湿度の高い所での使用や保管はしないでください。感電および故障の原因となります。</li> <li>●ゴミやホコリの多い所または周囲温度の高い所 (40℃) では絶対に使用しないでください。火災、故障の原因となります。</li> <li>●ストーブのそばや直射日光のあたる所には絶対に設置しないでください。内部の温度が上がると危険です。</li> <li>●定格電圧 100V、50/60Hz、44VA/36VA 機器で使用時間 30 分・1 回、そして連続して機器を使用しないこと。</li> </ul>  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ③ 使用中のご注意

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>警告</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>●ご自分で本体を分解しないでください。内部に触ると感電するおそれがあります。</li> <li>●ご自分で改造・修理しないでください。</li> </ul>                                |
|  <b>注意</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>●お子様や、ご自分で意思表示が出来ない人には絶対に使わせないでください。</li> <li>●お子様のイタズラには特に注意をしてください。絶対に使わせたり、本機の上で遊ばせたりしないでください。</li> </ul>  |
|  <b>注意</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>●本体の通気孔などのすきまに異物を入れないようにご注意ください。</li> <li>●機器に異常を感じた場合、使用をすぐに中止し、電源プラグを持ってコンセントから抜き取ってください。</li> </ul>        |
|  <b>注意</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●時計、オーディオテープ、ビデオテープ、キャッシュカードなどを近づけないでください。</li> <li>●使用中に身体に激しい痛みや異常を感じたときは、使用をすぐに中止してください。</li> </ul>      |

## ④ 使用後のご注意

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>注意</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●使用しても効果が現れない場合は、医師または専門家に相談すること。</li> <li>●事故・故障防止のため、ご使用にならない時は必ず電源プラグを持ってコンセントから抜き取ってください。</li> <li>●次回のご使用に支障がないように清潔にし、湿気の少ない所に保管してください。</li> </ul>  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5 お手入れの仕方

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>警告</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●お手入れの前には感電事故防止のため電源プラグをコンセントから抜いてください。</li> </ul>                                                                                          |
|  <b>注意</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●機器を毎回、使用する前後に本体、電源コードについた汚れを拭き取ってください。</li> <li>●本体の汚れは、水に溶かした台所用洗剤を布をひたし、固くしぼってから拭き取り、水拭き、空拭きをしてください。</li> <li>●汚れを拭き取るのにベンジン、シンナー、クレンザー、換気扇洗浄剤、金属タワシは絶対にご使用にならないでください。特にプラスチック部分に使用すると塗装面、樹脂面が変色したり、傷がついたりします。</li> </ul> |

## 6 故障を防ぐために

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>注意</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>●交流100V 以外では使用しないでください。火災、感電の原因となります。</li> <li>●落としたり、投げたり、足でふみつけたりしないでください。</li> </ul>                                               |
|  <b>注意</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>●停電のときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。復帰したとき危険です。</li> <li>●落雷の可能性があるときは、使用をすぐに中止し電源プラグをコンセントから抜いてください。</li> </ul>                              |
|  <b>注意</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●電源コードを強く引っ張らないでください。</li> <li>●汚れやホコリを取った後、湿気の少ない所に、整理、保管してください。カビやシミの原因になります。</li> <li>●直射日光が毎日長時間当たる所、ストーブの近くで直接高温になる所に保管しないでください。変色、変質の原因となります。</li> <li>●しばらくご使用にならないときは、カバーを掛けるなどして、ホコリがつかないようにしてください。</li> </ul> |

## 7 機器が故障した場合は

|                                                                                               |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  <b>警告</b> | <p>故障した場合はご自分で修理しようとせず、販売店または製造販売元に修理を依頼してください。</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

# 各部の名称

「MGP 型マグネタイザー」 は高度な安全対策を施しています。

三大特徴：●本体に30分電子タイマー内蔵。

●異常温度上昇を検知するサーモスタット付。

●異常電流を検知し、電流を遮断するヒューズ付。



「MGP 型マグネタイザー」専用電源コード

## 【付属品】

- ・ 専用電源コード x1
- ・ 取扱説明書 x1
- ・ カラカラテスター x1

## ■カラカラテスター試験器のご使用方法



MGP型マグネタイザーに通電し、その治療面にこの試験器を近づけると、機器の上に手のひらを置いて、その上でフェライト磁石は活発に飛び跳ねます。これは磁力線が体を透過して放射されていることを示すもので、磁力線が出ていなければフェライト磁石は動きません。ただし、この試験器は実際の治療には必要ありません。

# ご使用方法

- (1)MGP 型マグネタイザー本体と電源コードで接続します。（左図参照）  
機器の使用にあたっては、機器に同梱されている電源コード以外の使用を禁じます。
- (2) 電源コードを AC コンセントに差し込みます。
- (3) まず、タイマーが正常に作動するかを確認してください。通電された MGP 型マグネタイザー本体の上に、カラカラテスターを置いてください。  
ケース内のフェライト磁石が活発に飛び跳ねることにより磁力線が発生していること、およびタイマー動作が確認できます。
- (4) 1回の使用時間は30分以内でご使用ください。
  - ・初めのうちはとかくかけ過ぎになりますが、1週間ぐらいまでは治療時間をやや短めにして徐々に体を慣らせてください。
  - ・慣れてきましたら20～30分ぐらいおかけください。

※治療時間が30分に達しますと自動停止します。

※復帰は電源を切・入して下さい。

例えば、AC コンセントのコードを抜くかまたは本体側のプラグを外すことで切・入ができます。

※15分ぐらいご使用の場合は、電源コードの切・入を行うかまたは、60分タイマー（別売）をご使用ください。



## 事故や体調不良の恐れあり

- ご使用は1回30分以内にする。
- 機器は改造しない。
- 布団やこたつの中では使わない。
- 本体をむやみに振り回さない。
- 他の治療器と同時に使用しない。
- 子供だけで使わせない。
- 停電のときは、電源プラグをコンセントから抜く。

# ご使用方法例

肩こりを感じている部分、血行不順になりやすい部分に機器をあてて、治療してください。


※頭部には使用しないでください。

頸部は1回10～15分、その他の部分は1回20分～30分が目安です。

肌に直接あてても、衣服の上からあてても効果は変わりません。



## 頸部および肩こりのかけ方

- 治療時間  
頸部は 10分～15分  
肩こりは 20分～30分
- 機器をタオルで包んで使用しますと快適です。
- 肩こりは首筋よりやや下にあてます。

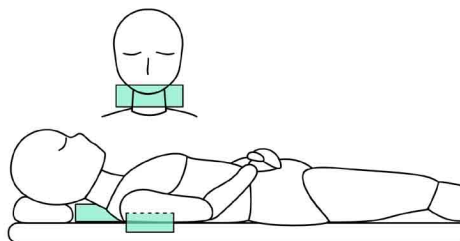


## 腰部のかけ方

- 腰部は血行促進の重要点ですから、血行不順な方は必ず治療してください。
- 治療時間 20分～30分
- 治療回数 1日に2～3回

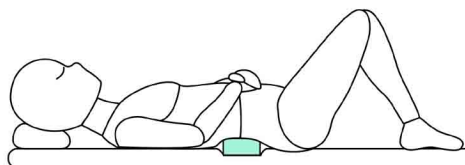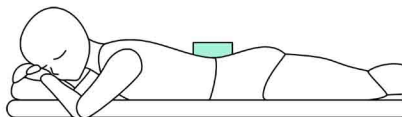

## 膝関節部および足ウラのかけ方


- 足心（足のウラ）も血行促進の重要点です。血行不順な方は必ず治療してください。
- 治療時間 20分～30分
- 治療回数 1日に2～3回

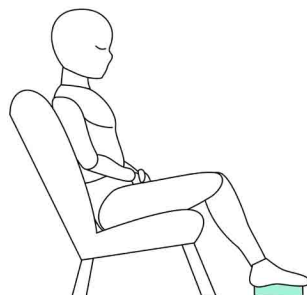

## 主たる治療点①～⑭

### 〈治療の要領〉

- ①は 10 ～ 15 分ぐらい、 その他はすべて 20 ～ 30 分ぐらいおかけください。  
(1箇所 1 回の時間)
- 患部というのは病気のある所、 または実際に痛む所のことです。
- 治療回数  
朝夕 2 回が原則ですが、 朝昼夕 3 回かけられればなお結構です。
- 空腹時または食前におかけください。 食後少なくとも1時間ぐらいはご遠慮ください。
- 1つの病気で治療箇所が 3 つも 4 つもあるものは患部を中心に使用してください。

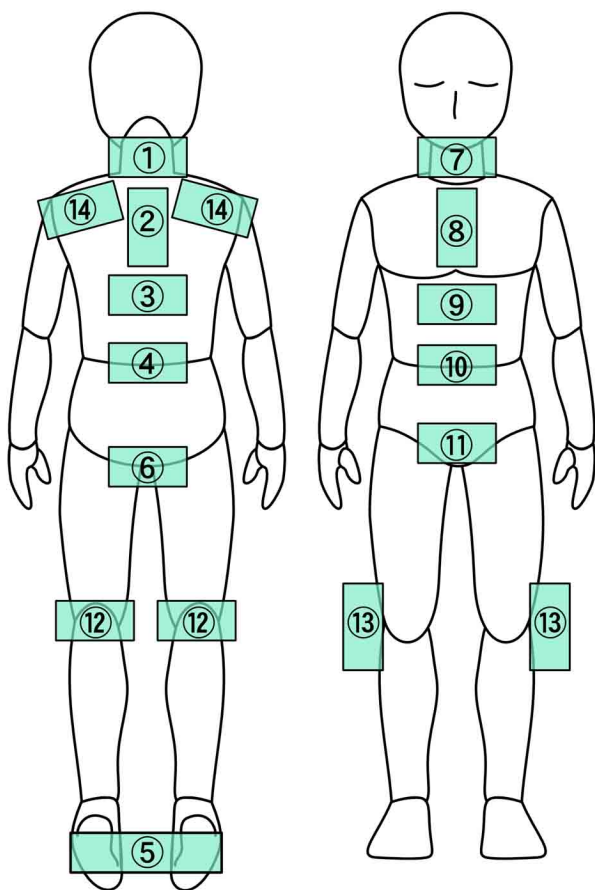

# アフターサービスについて

## 1. 保証書について（販売店よりお受け取りください）

保証書は、必ず「販売店名・購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はご購入日より1年間です。

## 2. 修理を依頼されるとき

### ●保証期間内は

ご購入の販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の記載内容により修理させていただきます。

### ●保証期間を過ぎているときは

ご購入の販売店にまずご相談ください。修理により商品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

### ●販売店にご依頼にれない場合には、製造元までご連絡ください。

## 3. 補修用性能部品の最低補修期間

弊社はこの補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しています。性能部品とは、その商品の性能を維持するために必要な部品です。

## 4. アフターサービスについてご不明な点は

ご購入の販売店にお問合わせください。

## 5. 機器の廃棄処理について

お客様が機器を廃棄する場合は、地元自治体の「不燃ごみ処理」を利用していただくか、お客様から依頼があれば、有料にて機器を引き取り、分別解体して、廃棄処理を致します。

## 定格・仕様

| 定格 \ 品名  | MGP型マグネタイザー                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 電源・電圧    | AC100V 50 / 60Hz                                                                        |
| 消費電力     | 44 / 36VA                                                                               |
| 型式認可     |  JET |
| 定格時間     | 30分                                                                                     |
| 寸法・重量    | 285X125X70mm 2.6kg                                                                      |
| 医療機器認証番号 | 220AGBZX00261000                                                                        |
| 最大磁束密度   | 75mT±5%                                                                                 |

掲載商品を改良のため予告なく仕様変更することがあります。

# 無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
  - (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買上げの販売店に商品と保証書をご持参ご提示いただきお申し付けください。
  - (ロ) お買上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、当社にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理の依頼先は、お買上げの販売店または当社にご相談ください。
3. ご贈答品等で保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、当社にご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
  - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
  - (ロ) お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
  - (ニ) 車輛、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷
  - (ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障および損傷
  - (ヘ) 保証書のご提示がない場合
  - (ト) 保証書にお買上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
6. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

## 修理メモ

※保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてのご不明の場合は、お買上げの販売店または当社にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

※This warranty is valid only Japan.

持込

## M G P 型マグネタイザー保証書

本書はお買上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

|       |                |               |     |
|-------|----------------|---------------|-----|
| 品番    | M G P 型マグネタイザー |               |     |
| 保証期間  | 本体             | お買上げ日<br>より1年 |     |
| お買上げ日 |                | 年             | 月 日 |
| お客様   | ご住所            |               |     |
|       | お名前            |               | 様   |
|       | 電話 ( )         |               |     |
| 販売店   | 住所・店名          |               |     |

ご使用方法その他のお問い合わせは下記  
へお願い致します。

製造元：  
株式会社 **マグネタイザー**  
**magnetizer INC.**

〒113-0021 東京都文京区本駒込 5-57-4  
TEL03-5814-4271 (代) FAX03-5814-4273