

2017年3月28日改訂（第4版 新記載要領に基づく改訂）

届出番号：13B1X10089000501

2015年10月13日改訂（第3版）

2009年12月7日改訂（第2版）

機械器具 68 印象採得又は咬合採得用器具

一般医療機器 歯科印象採得用トレー 16350000

再使用禁止

エクセレントⅡ ディスポ印象トレー

【禁忌・禁止】

再使用禁止。

【取り扱い上の注意】

- 器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取り扱いはいない事。

【形状・構造及び原理等】


〔概要〕

本体：ABS樹脂

〔形状・構造等〕

下記外観写真の通り

種類：#1（上顎 大）#2（下顎 大）#3（上顎 中）
#4（下顎 中）#5（上顎 小）#6（下顎 小）
#7（右上/左下）#8（左上/右下）#9 前歯
各種：12個入り／1袋

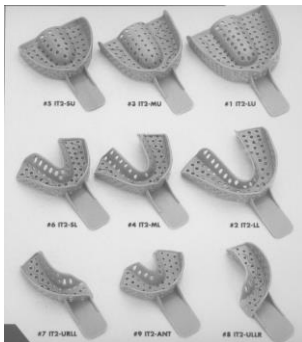

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

【保守・点検に係る事項】

〔使用前・使用後の点検〕

使用前・使用後は、破損、ヒビ、キズ、等がないか確認する事。これらがある場合は使用を中止する事。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷1丁目8番9号

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：PLASDENT CORPORATION (USA)

〔原理〕

本品に印象材を盛り、口腔内に入れ圧接させ、印象を採得する。

【使用目的又は効果】

印象採得のために用いる。

【使用方法等】

- 1）患者の口腔内に本品を仮入れし、サイズが適正な事を確認する。
- 2）本品に印象材を盛り圧接し、印象材の硬化後口腔内から取り外す。（硬化時間等については、使用する印象材の説明書に従う事）。

【使用上の注意事項】

1. 使用前に洗浄、消毒する場合の注意
 - ・使用前洗浄は、ぬるま湯や樹脂に影響を及ぼさない方法で行うこと。
 - ・使用前に薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守る事。薬剤の種類によっては、樹脂素材に影響を及ぼすことがある。
 - ・洗剤の残留がないように十分にすすぎをすること。
 - ・洗浄、消毒には、出来るだけ精製水を使用すること。
 - ・オートクレーブ滅菌不可
 - ・アルコールを使用した高圧滅菌、乾熱滅菌不可。
2. 保管上の注意。
 - ・カビの原因となるので湿度の高い場所に保管しない。
 - ・破損の原因となるので、インスツルメント類と一緒に保管しないこと。
 - ・化学製品と一緒に収納・保管しない事。
 - ・使用前には必ず破損、ヒビ、大きな腐食、突起物等がないか確認する事。
 - ・水分が付着したまま長時間放置するとシミ等の原因となるため、十分乾燥させてから保管する事。