

2016 年 9 月 28 日改訂（第 4 版 新記載要領に基づく改訂）
2015 年 8 月 5 日改訂（第 3 版） 歯科材料 06 歯科用印象材料
2013 年 6 月 4 日改訂（第 2 版） 一般医療機器 歯科印象採得用器材 70887000

届出番号：13B1X10089000731

再使用禁止

マルミ ミキシングチップ

【禁忌・禁止】
再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】


〔概要〕

本体：プラスチック製

〔形状・構造等〕

下記外観写真の通り

種類：グリーン：ヘビーボディ印象材用
ピンク：レギュラーボディ印象材用
イエロー：ライトボディ印象材用
ブルー：コアビルドアップ材用
コア用チップ：コアビルドアップ材用
ペンタオートミックスタイプ

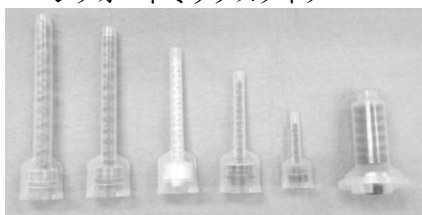

〔原理〕

印象材が本製品内部を通過する際に練和され、抽出できる。

【使用目的又は効果】

印象採得に使用する補助器具

【使用方法等】

- 1) ミキシングガンにカートリッジタイプ印象材をセットする。
- 2) カートリッジタイプ印象材の注出口にチップを装着する。
- 3) 印象材等を注出する。
- 4) 必要に応じてオーラルチップ（別売）をミキシングチップの先に装着する。

*未滅菌・再使用禁止

*使用後は、各地方自治体の定める法に則り処分すること。

【使用上の注意事項】

1. 滅菌不可
滅菌器を使用し、滅菌しないこと。
2. 取扱い上の注意
 - 1) チップが破折したり、ひび割れを起こす恐れがあるので、ご使用の印象材に包装されている推奨チップ径と同等のサイズのチップを選択し使用する。
 - 2) チップがカートリッジタイプ印象材から圧力で外れる恐れがあるので、必ず試抽出を行うこと。また、印象材がチップ内で硬化していないか確認してから使用する事。
3. 保管上の注意。
 - ・使用前・使用後には必ず破損、ヒビ、突起物等がないか確認する事。
 - ・水分が付着したまま長時間放置するとシミ等の原因となるため注意する事。

【取り扱い上の注意】

- ・器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取り扱いはしない事。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

【保守・点検に係る事項】

〔使用前・使用後の点検〕

使用前・使用後は、破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ等がないか確認する事。これらがある場合は使用を中止する事。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

販売業者：株式会社マルミ 歯科商店

〒780-0833 高知県高知市南はりまや町 2 丁目 1 6-3

Tel：088-883-2201（代）

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1 丁目 8 番 9 号

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者： SEIL Global Co., Ltd. (Korea)