

再使用禁止

アングルイーザアジャスタブル HVE チップ

【禁忌・禁止】
再使用禁止。


【形状・構造及び原理等】

[概要]

口腔内に貯留する水分や切削片を除去する為に用いる
ポリ塩化ビニル製の管状器具。

[形状・構造等]

下記外観写真の通り

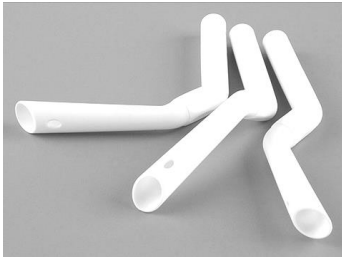

[原理]

ハンドバキュームポンプ（別売品）等の吸引器具に本品を
接続して、唾液及び水分を吸引する。

【使用目的又は効果】

口腔内の唾液、及び水分の吸引に用いる。

【使用方法等】

- 1) 非電動型吸引装置（手動式バキュームポンプ等）のチューブ
先に差し込み、装着する。
- 2) ポンプの使用法に従い、水分及び切削片等を吸引する。
- 3) 使用後は各地方自治体の定める法に則り処分する事。

【使用上の注意事項】

1. 洗浄、消毒の注意

- ・使用前洗浄は、樹脂に影響を及ぼさない方法で行うこと。
- ・薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守る事。薬剤の種類によっては、樹脂素材に影響を及ぼすことがある。
- ・洗剤の残留がないように十分にすすぎをすること。
- ・洗浄後は、直ちに乾燥すること。
- ・洗浄、消毒には、出来るだけ精製水を使用すること。
- ・オートクレーブ滅菌不可
- ・アルコールを使用した高圧滅菌、乾熱滅菌は不可。

2. 保管上の注意。

- ・カビの原因となるので湿度の高い場所に保管しないこと。
- ・破損の原因となるので、インスツルメント類と一緒に保管しないこと。
- ・化学製品と一緒に収納・保管しない事。
- ・使用前には必ず破損、ヒビ、大きな腐食、突起物等がないか確認する事。
- ・水分が付着したまま長時間放置するとシミ等の原因となるため、十分乾燥させてから保管する事。

3. 患者への使用上の注意。

- ・小児又は嘔吐しやすい患者は、使用中に窒息する恐れがあるので使用する際は、十分に注意する事。

【取り扱い上の注意】

- ・器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取り扱い
はしない事。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

【保守・点検に係る事項】

[使用前・使用後の点検]

- 使用前・使用後は、破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、
大きな腐食等がないか確認する事。これらがある場合は
使用を中止する事。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1 丁目 8 番 9 号

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：BETTER DENTAL PRODUCTS Inc. (U.S.A)