

セクショナルマトリックスリング

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕マトリックスバンドを歯の所定の位置に保持するために用いるリテーナ。窩洞修復時に使用するセクショナルマトリックスを固定する為に適用する。

材質

マイクリップ 2.0

本体：ステンレススチール製

ハンドルカバー及びタイン：熱可塑性ポリマー製

マイリングクラシコ

本体：ニッケルチタン製

デルタチューブ：シリコン製

マイリングフォルテ

本体：ステンレススチール製

タイン：熱可塑性ポリマー製

【形状・構造等】

種類：

#6805:マイクリップ 2.0×2 個

マイタイン スモール×2 組

マイタイン ミディウム×1 組

マイタイン ラージ×1 組

#6804:マイリングクラシコ×2 個+ デルタチューブ×2 組

#6806:マイリングフォルテ×2 個+

マイタイン スモール×2 組

マイタイン ミディウム×1 組

マイタイン ラージ×1 組

#6304:マイタイン スモール×6 組入

#6303 マイタイン ミディウム×6 組入

#6306 マイタイン ラージ×6 組入

#6312 ダイヤモンドタイン×15 組

#5712:デルタチューブ×15 組入


形状：下記外観写真の通り



マイクリップ 2.0

クラシコ

フォルテ

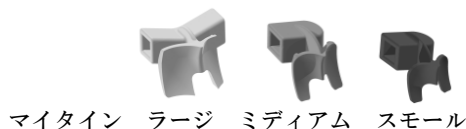

マイタイン ラージ ミディウム スモール



デルタチューブ ダイヤモンドタイン

【原理】

本製品の先端でマトリックスバンドを固定する事で歯牙上の所定の位置に保持する。

【使用目的又は効果】

窩洞修復時に使用するセクショナルマトリックスを固定する為に適用するリテーナ。

【使用方法等】

1) 窩洞修復する歯間隣接面にセクショナルマトリックス及びウェッジを挿入する。

2) マイクリップ 2.0:

ハンドルを指で操作し、先端部タイン両側をマトリックス、ウェッジを挿入した歯間部側面に挟み込むように装着する。

マイリングクラシコ及びマイリングフォルテ：マイフォーセップ(別売)を使用して先端部を広げ、マトリックス、ウェッジを挿入した歯間部側面に挟み込むように装着する。

【使用上の注意】

- 成分に対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しない事。
- 素材であるステンレススチール及びニッケルチタンは錆難い金属であるが、使用方法・環境によっては腐食(錆び)する事がある。
- 器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取り扱いはいししない事。
- 超機能水(超酸性水)等は、金属を腐食させることがあるので、使用しない事。
- 次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビドヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン等は、金属腐食を起こす恐れがあるので、注意する事。
- 薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守る事。薬剤の種類によっては、金属又は樹脂素材に影響を及ぼす事がある。

【取り扱い上の注意】

- 器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いはしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

【使用方法に関連する使用上の注意】

オートクレーブ滅菌可(121℃以下)

消毒が必要な時は、薬液を用いる事。

薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守る事。薬剤の種類によっては、本製品素材に影響を及ぼすことがある。

【保守・点検に係る事項】

〔使用前・使用後の点検〕

使用前、破損、ヒビ、先端及び柄部の傷、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は、使用を中止すること。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1-8-9

Tel: 03-5827-1380 Fax: 03-5827-1381

製造業者：Polydentia SA(Switzerland)