

機械器具 68 印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科印象採得用トレー 16350000

再使用禁止

トランスフォーム印象トレー

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕印象採得時に、印象材を盛り、保持し、圧接するために用いるバイオポリマー製器具。

〔形状・構造等〕

全 12 種類


有歯顎 上顎用：L (#2)、M (#4)、S (#6)

有歯顎 下顎用：L (#1)、M (#3)、S (#5)

無歯顎 上顎用：L (#8)、M (#10)、S (#12)

無歯顎 下顎用：L (#7)、M (#9)、S (#11)

外観写真

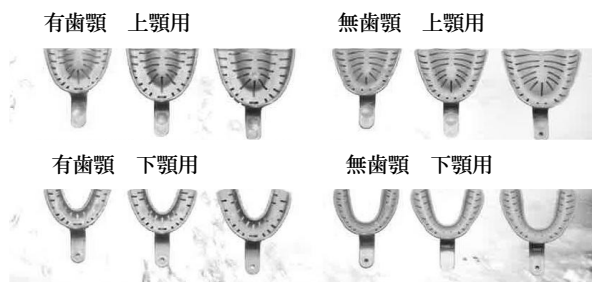

〔原理〕

本品に印象材を盛り、口腔内で圧接させ、印象を採得する。

【使用目的又は効果】

印象採得を行う為に用いる。

【使用方法等】

- 1) 適正なサイズのトレーを選択する。
- 2) トレーの形態を変えたい場合は、70℃程度の湯に約 20 秒間浸けると軟化する。
ハンドルを持ち、変形させたい部位を湯に浸ける。
湯から取り出した後、変形の必要な部位を曲げて変形させる。
約 15 秒で硬化するので、取り出してから 15 秒以内に變形させる事。
- 3) トレー硬化後、本品に印象材を盛り、歯牙等に圧接し、印象材の硬化を確認後口腔内から取り出す。
(硬化時間等については、使用する印象材の説明書に従う)。

【使用上の注意事項】

- ・小児又は嘔吐しやすい患者は、使用中に窒息する恐れがあるので使用する際は、十分に注意する事。
- ・化学製品と一緒に収納・保管しない事。
- ・使用前・使用後には必ず破損、ヒビ、大きな腐食、突起物等がないか確認する事。

【取り扱い上の注意】

- ・オートクレーブ滅菌不可
- ・消毒が必要な場合は薬液を用い、その使用方法に従う。
- ・器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取り扱いはいない事。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

高温多湿、直射日光を避けて保管する事。

【保守・点検に係る事項】

〔使用前・使用後の点検〕

使用前・使用後は、破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認する事。これらがある場合は使用を中止する事。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1 丁目 8 番 9 号

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：Astek Innovations Ltd. (U.K.)