


ルミンデックス3 プラーク

【形状・構造及び原理等】

- 〔概要〕 歯科手術、検査、処置部（通常、口腔）を集中的に照明する一般歯科用の専用照明器。ハンドルにライトガイドを装着し、処置部を照らす事が出来る。
- ハンドピース/スイッチ部：アルミニウム
ライトガイドロッド：無機ガラス

〔形状・構造等〕

セット内容：ハンドピース、ライトガイドロッド、
単 4 電池、ディスプレイスリーブ
取り扱い説明書、フィルター

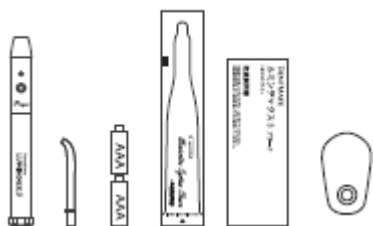

外観写真

全長：185mm

ハンドピース長さ：135mm



〔原理〕

ライトガイド先端で照射し口腔内を観察する。

【使用目的又は効果】

口腔内の状態を検査・観察する為に使用する。

【使用方法等】

- 1) 使用する前に、作業部（ライトガイド）を滅菌する。
（オートクレーブ滅菌可。134℃以下・20分以内厳守）
ハンドピースは、水洗い・オートクレーブ滅菌できない為、薬液を含ませた、ガーゼ、ワッテ等で清掃・消毒する。
- 2) ハンドピースにライトガイドを装着し、ディスプレイスリーブを必要に応じて被せる。
- 3) スイッチをオンにし口腔内を照射し、観察・検査する。
- 4) スイッチを押すごとにハイモード→ローモード→電源オフと機能変更出来る。
- 5) 単 4 電池×2 本使用。ハンドル後部を回すと電池交換が可能。
- 6) オート電源遮断システム採用：照射したまま放置した場合、5 分後に自動的電源オフとなる。

【使用上の注意】

- 1 洗浄、消毒、滅菌上の注意
 - ・ハンドル部は、水洗い・オートクレーブ滅菌不可。
 - ・薬液を含ませた、ガーゼ等で清掃ふる。
- 2 磨き粉、金属ウール、金属ブラシの使用禁止。
ライトガイドが傷つく恐れがあるので、使用及び洗浄前後ブラシ等でライトガイド表面を磨かないこと。

3 保管上の注意。

本品の保管は、化学薬品等と一緒に保管しない事。
また、破損及び破折の恐れがあるので、周囲に重量のある器具等と一緒に保管しない事。特に塩素系及びヨウ素系消毒剤は腐食の原因になるので、使用中に付着した際は出来るだけ早めに洗浄すること。

【取り扱い上の注意】

- ・器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取り扱いはしない事。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

【保守・点検に係る事項】

〔使用前・使用後の点検〕

使用前・使用後は、破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認する事。これらがある場合は使用を中止する事。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1 丁目 8 番 9 号

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：Dentmate Technology Co., Ltd. (Taiwan)