

ネクステラデンタルミラー

【形状・構造及び原理等】


〔概要〕 口腔内診査又は圧排のために用いる歯科用器具。

柄部：ステンレススチール

作業部：歯科用ガラス

【形状・構造等】

種類：プレーンタイプ 4P 表面反射タイプ 4FS

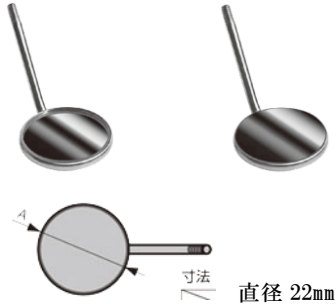

【原理】

口腔内を鏡で反射させる事で、検査及び観察ができる。

【使用目的又は効果】

口腔内の状態を検査・観察する為に使用する。

【使用方法等】

- 1) 使用する前に、本品が滅菌済みである事を確認する。
（オートクレーブ滅菌可。132℃以下・20 分以内厳守）
- 2) 本品をミラーホルダーに装着する。
- 3) 口腔内を観察・検査する。

【使用上の注意】

- 1 歯科用ガラス使用。
素材のガラスは、過度の圧力をかけたり、落としたりすると破折する事がある。
- 2 ステンレス鋼使用。
素材のステンレス鋼は鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。
- 3 洗浄、消毒、滅菌上の注意
 - ・薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守る事。薬剤の種類によっては、素材に影響を及ぼす事がある。
 - ・使用後は、洗浄液、精製水を用いて器具に付着した血液、体液、組織片をミラー面に傷が付かないように速やかに除去すること。
 - ・超音波洗浄器は、くもりの原因になるので使用しない事。
 - ・洗浄・消毒・滅菌には、出来るだけ精製水を使用すること。
 - ・洗浄・消毒・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管する事。
水分が付着したまま長時間放置すると、シミ等の原因となる事がある。
- 4 磨き粉、金属ウール、金属ブラシの使用禁止。
ミラー面が傷つく恐れがあるので、使用及び洗浄前にブラシ等でミラー表面を磨かないこと。使用前にミラー面が曇っている場合は、柔らかい布等で拭く事。
- 5 保管上の注意。
本品の保管は、化学薬品等と一緒に保管しない事。
また、破損及び破折の恐れがあるので、周囲に重量のある器具等と一緒に保管しない事。特に塩素系及びヨウ素系消毒剤は腐食の原因になるので、使用中に付着した際は出来るだけ早めに洗浄すること。

【取り扱い上の注意】

- ・器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取り扱いはしない事。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

【保守・点検に係る事項】

〔使用前・使用後の点検〕

使用前・使用後は、破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認する事。これらがある場合は使用を中止する事。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1 丁目 8 番 9 号

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：Allseas Trading (Pakistan)