

機械器具 68 印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科印象採得用トレー JMDN コード 16350000

ヒューマントレー

【警告】

感染の恐れがあるので、一回使用ごとに
本品の洗浄と滅菌を完全に行うこと。

【形状、構造及び原理等】

1) 形状

有歯顎用



種類	サイズ	a	b	c
上顎	LL	20	78	60
	L	19	74	55
	M	19	72	52
下顎	S	18	69	46
	LL	19	79	60
	L	18	75	56
	M	18	72	53
	S	18	68	50

無歯顎用



種類	サイズ	a	b	c
上顎	L	15	74	55
	M	15	72	52
	S	14	69	46
下顎	L	14	75	56
	M	14	72	53
	S	14	68	50
	SS	13	65	50

J 型



サイズ	a	b	c
L	19	73	56
M	19	71	52
S	19	68	47

U 型



サイズ	a	b	c
LL	21	80	61
L	20	77	58
M	19	73	54
S	18	70	49


前歯用



a	b	c
20	71	40

b

手作りのため±2～3ミリの誤差

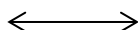

c



【保守

項】



2) 原材料

真鍮

【使用目的又は効果】

印象採取時に印象材を盛り、保持し、圧接するために用いる器具

【使用方法等】

- 1) 通法により印象材を練和する。
- 2) 印象トレーに練和した印象材を盛る。
- 3) 患者の顎に圧接し、そのまま印象材が硬化するまで保持する
- 4) 顎から印象材ごとトレーを取り外す。
- 5) 印象に石膏を施して顎模型を作成する。

【使用上の注意】

- 1) 本品は患者毎に滅菌を行い、感染防止に十分配慮すること。
- 2) 薬剤、食品、アクセサリ、化学物質等に過敏症の既往歴がある患者には、本品及び類似品に対して過敏症がなくても問診を行い、慎重に適用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1) 洗浄、消毒、滅菌上の注意

・使用後は、防錆洗浄剤、精製水を用いて超音波洗浄をし、器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。

- ・滅菌は一回使用ごとに原則として加熱加圧滅菌器（オートクレーブ滅菌器）にて行うこと。
- ・加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌器など）の乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は器具が変質または変色することがある。

2) 保管上の注意

「もらいさび」が発生する恐れがあるため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。

また、化学薬品と一緒に収納・保管しないこと。

3) 取り扱いについて

器具の寿命を著しく低下させるので粗雑な取り扱いはしないこと。

- 1) アルギン酸印象材の除去・清掃にはトレークリーナーを、シリコーン印象材の清掃にはアルコールを使用すること。
- 2) アルギン酸印象材を使用したトレーを洗浄する際は、専用のトレークリーナーに浸漬すること。
- 3) トレーに残った印象材は軟毛のブラシを用いてきれいに取り除くこと。
- 4) トレーを洗浄後、トレークリーナーや洗浄剤が残らないように流水下で丁寧にすすぎ洗いすること。
- 5) トレーを乾燥させて滅菌バッグに入れ、オートクレーブで滅菌すること。(121℃で20～30分、132℃で5～20分)
乾燥工程は行わないこと。

〔保守・点検に係る注意事項〕

- 1) 乾熱滅菌は行わないこと。
- 2) アルギン酸印象材の清掃時、異種金属製のトレーと本品をトレークリーナーに同時に浸漬すると変色の原因となるので避けること。
- 3) 化学薬品や殺菌剤の種類（酸性水や次亜塩素酸ナトリウム等の塩素系消毒剤等）によっては金属素材に影響を及ぼすことがあるので、使用する洗浄剤の金属に対する腐食性に注意すること。
- 4) すすぎが不十分であるとオートクレーブにより変色する事があるので注意すること。
- 5) 金属製のたわし、クレンザー（磨き粉）等は器具の表面に傷をつけるので使用しないこと。
- 6) トレークリーナーの浸漬時間や温度等の使用方法は、各メーカーの指示に従い正しく使用すること。

【製造販売業者及び製造業者氏名又は名称等】

有限会社まるいち

*電話番号：06-6210-1399

*FAX 番号：06-6210-1234