

機械器具 77 バイブレーター
管理 家庭用電気マッサージ器 JMDN コード 34662000
販売名 リラフィール

【警 告】

- ・使用前に必ず、取扱説明書を熟読すること。
- ・医師からマッサージを禁じられている人は使用しないこと。
- ・使用中、身体に異常を感じたときは、使用を直ちに中止すること。

【禁忌・禁止】


- ・落下させたり過度の衝撃を与えないこと。
- ・感電の恐れがあるので、本品を分解・修理しないこと。
- ・電源コードを破損すると、火災、感電の恐れがあるので、重いものを載せたり、引っ張ったり無理に曲げたりしないこと。

【原則禁忌】(次の人には使用しないこと、特に必要とする場合には医師に相談して使用すること)

- ・ペースメーカなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人。
- ・悪性腫瘍のある人
- ・心臓に障害のある人
- ・妊娠初期の不安定期又は出産直後の人
- ・糖尿病などによる高度な末梢循環障害からくる知覚障害のある人
- ・皮膚に創傷のある人
- ・安静を必要とする人
- ・有熱期の人
- ・骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなどの急性[疼痛性]疾患の人
- ・その他、医療機関で治療中の人

【形状・構造及び原理等】

1. 各部の名称、仕様

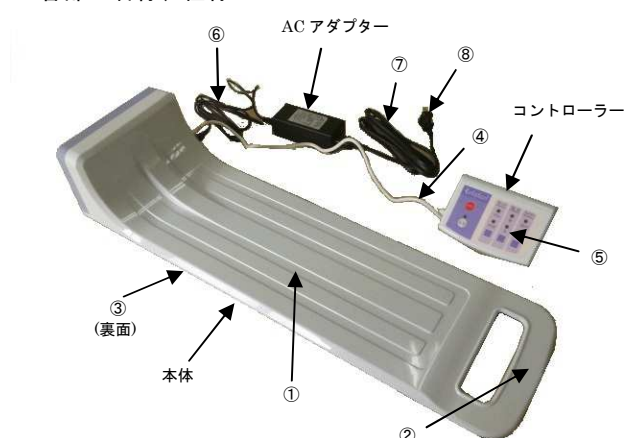

- 1) 本体
①振動ボード
②持ち運び用ハンドル
③ウレタンマット
- 2) コントローラー
④コントローラーケーブル
⑤操作パネル
- 3) AC アダプター (MODEL:0072-1516)
⑥DC ケーブル
⑦電源コード
⑧電源プラグ

外形寸法: 本体 W182×H114×616
 コントローラー W120×H84×D74
 AC アダプター W46.5×H33.7×D107.5
単位 mm 許容差 ±10%

質 量: 本体 1750g±10%
 コントローラー 230g±10%
 AC アダプター 195g±10%

電 源: AC100V, 50/60Hz
入力電流: 0.49A
感電に対する保護: クラスⅡ機器

2. 使用例

ウレタン、ポリエステル等の素材でできたマットレス、エア式マットレスの下に本体を設置し、コントローラーはサイドレールなどに設置する。使用するマットレスに振動を与える。



3. 作動・動作原理

振動の元となる信号をコントローラー内部の制御回路で発生され、電気信号として本体に伝わり、本体内部の振動器を振動させる。振動器の振動は本体の振動ボードを通じて、本体上部に設置されたマットレスを振動させる。マットレス上に横たわった被験者は、マットレスが振動することでマッサージ効果を得られる。

****【使用目的又は効果】**

本品は、ウレタン、ポリエステル等の素材で出来たマットレス、エア式マットレスと併用し、振動を与えることによってマッサージ効果を与える家庭用電気マッサージ器である。

****【使用方法等】**

1. 準備

- ①本体とコントローラー、ACアダプターを接続する。
- ②本体の振動ボード部をマットレス等の下に設置する。
- ③コントローラー部をベッドのサイドレール等に掛けて固定する。
- ④電源プラグを100Vコンセントに接続する。

2. 使用

- ①コントローラー部の電源 入/切ボタンを押して、振動準備の状態にします。 電源ランプが点滅します。
- ②振動の種類を選びます。
- ③振動の強弱を調整します。
- ④振動する時間を調整します。
- ⑤約3秒後に電源ランプが点滅から点灯に変わり、振動が始まります。

3. 停止

- ①設定した時間が経過すると電源ランプが点滅し振動が停止します。
- ②振動中に停止したい場合は、電源 入/切ボタンを押すと停止します。
- ③身体に異常を感じたり、緊急に停止したいときは、急停止ボタンを押してください。 電源ランプが点滅して振動が停止します。

4. 使用後の処置

- ①振動中の場合は、コントローラーの電源入/切ボタンを押して振動を停止します。
- ②電源プラグをコンセントから抜き、本体を設置したマットレスから外して保管します。

****【取扱い上の注意】**

1. 使用前に取扱い説明書を熟読すること。
2. 本品を使用することによって、被験者に異常が発見された場合は、直ちに使用を中止してください。
3. 電源コードに異常がないことを確認して使用してください。
4. ベッド、サイドレールなどの各所に電源コードを挟まないようにしてください。
5. ベッドを移動されるときは、本品をベッドから外して移動ください。
6. 本体を移動するときは、電源プラグがコンセントから抜けていることを確認してから移動してください。
7. 本体をマットレスの下に置く、取り除く場合は、必ずマットレスを持ち上げた状態で行ってください。
8. 長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
9. 汚れた箇所をふきとる等のお手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。

****【保管方法および使用期間等】**

1. 保管方法

本品に添付された取扱説明書「保管方法」の項に従って保管してください。

保管環境条件

温度範囲：0～50℃

相対湿度範囲：5～95%RH（結露なきこと）

2. 有効期間

本品は、特定の貯蔵方法によらなければその品質を確保することが困難であることはなく、また、有効期間が3年以上である。

【保守・点検に係る事項】

1. 故障している、おかしいと思った場合には、直ちに使用を中止し、修理を依頼してください。
2. 本品を破棄する際は、各地域条例に従った処分を行ってください。

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

^{*}製造販売業者：グローバルマイクロニクス株式会社

〒277-0861 千葉県柏市高田字上野台子 1400-1

TEL：04-7143-8100