

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 採液針 70324000


* コンビフィット®

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

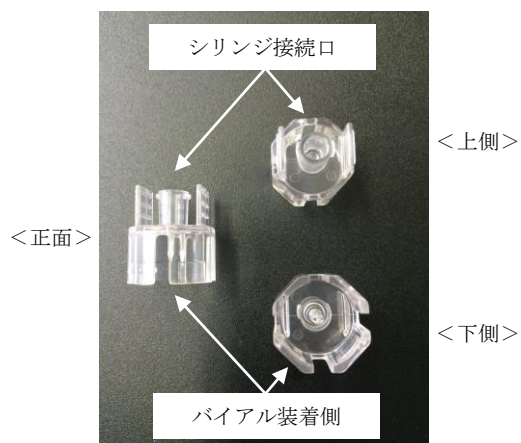

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・ 本品を使用する際は、必ず添付文書を確認すること。
- ・ 併用する医薬品や医療機器がある場合は、それらの添付文書も併せて確認すること。
- ・ 本品は、医師の管理下で適切に使用すること。
- ・ 使用前、包装や内容物に破損や汚損、水ぬれ等の異常がないことを確認すること。万一、異常が確認された場合は、使用しないこと。
- ・ 使用目的以外には使用しないこと。
- ・ 開封後はすぐに使用し、使用後は感染防止に留意して、安全な方法で適切に処分すること。

** 【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- ・ 水ぬれに注意し、高温多湿や直射日光を避けて保管すること。

＜有効期間＞

- ・ 直接の容器又は被包に記載してある。

[自己認証（当社データ）による。]

【使用目的又は効果】

本品は、シリンジに取り付けて薬液容器等から薬液を採取するために用いる採液針である。

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

前田産業株式会社
大阪府大阪市福島区福島 8-16-20
TEL：06-6440-4556

【使用方法等】

※ここでは、一般的な操作方法を示す。

1. 必要に応じて手袋を着用しておく。
2. 使用期限内であることを確認し、本品の汚染に注意して包装から取り出す。
3. あらかじめ注射用水が充填されたシリンジを、本品のシリンジ接続口にしっかり取り付ける。
4. あらかじめキャップを外しておいたバイアルのゴム部分に、シリンジを取り付けた本品のバイアル装着側をまっすぐ奥まで穿刺し、固定する。
5. 注射用水を注入し、円を描くように静かにゆっくり回して溶解する。
6. バイアルを逆さにし、シリンジのプランジャーをゆっくりと引き、薬液を吸引する。
7. シリンジを本品から取り外した後、汚染に注意して適切な注射針を装着し、薬液を投与する。

＜使用方法に関連する使用上の注意＞

- ・ 接続部に緩みのないことを確認してから使用すること。
- ・ 本品に衝撃を与えないこと。[破損のおそれがある。]
- ・ 接続部に薬液や血液等が付着すると、接続部に緩み等が生じるおそれがあるので注意すること。