


【禁忌・禁止】

1. 異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合はご使用にならないでください。
- (1) 装着部位に傷がある方。(2) 皮膚の弱い方、皮膚疾患のある方。
2. 目の周囲、粘膜等の角質の少ない部分には使用しないでください。
3. 誤使用を防ぐため、小児(12歳以下)には使用しないでください。
4. 万が一ガラスビーズ球が破損した場合は、速やかに破損した球を取り除いてください。取り除いた後、使用しても構いません。
5. 強い衝撃を与えますとガラスビーズが破損する恐れがあります。スポーツ時、過度の運動時には使用しないでください。
6. 次のことを必ず守って正しくお使いください。
- (1) 本製品を加工・改造しないでください。(2) 鎮痛以外の目的に使用しないでください。
7. 使用中・使用後に気分が優れない等異常を感じた場合は速やかに使用を中止してください。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
伸縮性生地に多数のガラスビーズを格子状に固定した貼付式鎮痛材
2. 構成
生地:伸縮性ポリエステル 100%
ビーズ部分:ガラス

〔皮膚接着面〕

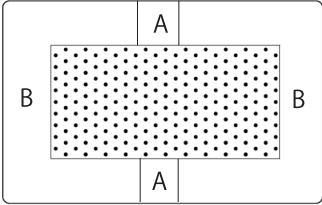

〔非皮膚接着面〕



3. 原理
多数のガラスビーズにより末梢神経を刺激することで疼痛緩和や他の治療効果(血行を良くし筋肉のコリをほぐす)の促進を行う。

【使用目的又は効果】

外科的麻酔、疼痛緩和又は他の治療効果（血行を良くし筋肉のコリをほぐすこと）を促進するため皮膚内に挿入せず、皮膚への接触によって末梢神経を刺激する。

【使用方法等】

- ①中央Aを剥がし粘着面を露出させます。
- ②痛みを感じる部分の皮膚上にガラスビーズ面があたるか確認し、粘着面を貼り固定してください。
- ③片方のBを剥がしながら貼ります。
- ④もう片方も同じように、貼ってください。

【使用上の注意】

- 生地を引っ張りすぎた状態で貼付けないようご注意ください。かゆみ等の原因となったり効能を感じにくくなる等の恐れがあります。
- ガラスビーズと皮膚の間に隙間ができる箇所で使用されますと効能を感じにくくなります。
- 強い衝撃を与えますとガラスビーズが割れる恐れがあります。スポーツ時、過度の運動時には使用しないでください。
- 患部の皮膚は清潔にして使用してください。
- ガラスビーズが摩擦により剥離することがありますが、そのまま使用しても構いません。
- かゆみが生じやすい方は長時間連続して使用しないでください。
- かゆみが生じた場合は速やかに使用を中止してください。そのまま使用を続けると、かぶれに発展する恐れがあります。かゆみが治まれば再び使用しても構いません。
- 剥がす際は、皮膚への負担をかけないようゆっくり剥がしてください。剥がしにくい場合はぬるま湯につけると剥がしやすくなります。
- 廃棄は自治体の指示に従ってください。

【保管方法及び有効期間等】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。思わぬ事故のもととなります。
- 火気に近づけないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 万喜 石川県かほく市松浜イ3 1－1
製造業者：株式会社 万喜 石川県かほく市松浜イ3 1－1

【返品について】

◇ご購入後8日以内に下記お問い合わせ窓口へ、まずはご連絡をお願い致します。その際、未使用・未開封の商品に限定させていただきます。
また、お手数では御座いますがご連絡頂く際は以下項目をお知らせ下さいようお願い申し上げます。 後ほど弊社担当者よりご連絡させていただきます。

株式会社万喜お問い合わせ窓口：office@manki.jp

お知らせ頂きたい項目：①お客様名(ふりがな) ②電話番号(固定電話番号/携帯番号) ③メールアドレス ④ご住所 ⑤対象商品名
⑥ご購入頂いた店舗名 ⑦ご購入日 ⑧お問い合わせ内容 / 返品理由

◇返品送料につきましては、不良品や品違いの場合は当社負担とさせていただきます。お客様のご都合による場合は、お客様負担とさせていただきますので予めご了承下さい。