


器 22 検眼用器具
検眼レンズフレーム (コード:32791000)

けんがんさん

【禁忌・禁止】

一般用の眼鏡、保護用メガネ、サングラス等には使用できません。

【形状・構造等】

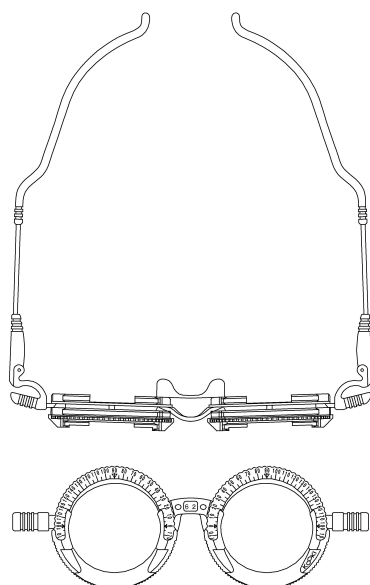

レンズホルダーはプラスチック製で、検眼レンズを入れることができます。前面には角度目盛りが施しており、乱視用検眼レンズに対応する。また、前面のレンズホルダーは回転可能な構造になっている。

回転可能な前面のレンズホルダー下部は薄くなっており、累進レンズ用検眼レンズなども入れることができる。フレームのヨロイ部はプラスチック製のバネ構造になっている。金属部分はチタンを使用している。

【使用目的、効能・効果】

屈折検査時に検眼レンズを眼前に保持するために用いるフレームである。

【品目仕様等】

サイズ

サイズ	ワタリ	テンプル (金属部長さ)
58	22	50
60	24	60
62	26	60
64	28	60
66	30	70
68	32	70
70	34	70

カラー

ブルー、ベージュ、グレー

【操作方法又は使用方法等】

1. PDの同じ検眼レンズフレームを選定する。
2. 眼球がレンズホルダーの中心付近に位置するように掛ける。
3. レンズホルダーに検眼レンズを入れる。
4. 乱視用検眼レンズは、前のレンズホルダーに入れる。
5. 乱視軸の調整は、前のレンズホルダーの目盛りで調整する。
6. 累進用テストレンズなどは前のレンズホルダーに入れる。

【使用上の注意】

フレームの掛けはずしの際には、目を突く恐れがありますのでテンプルを充分に開いて、ゆっくりと顔の正面で行ってください。片方のテンプルを持って無理に取りはずすと型くずれやゆりみの原因になります。

【貯蔵・保管方法及び使用時間等】

フレームを直射日光の当たる所や殺菌線消毒保管庫などの紫外線の当たる所に放置又は保管しないでください。プラスチックの部分の劣化・変質・変色の原因になります。

【取扱い上の注意】

フレームの肌に触れる箇所にかゆみ、かぶれ、湿疹などの異常があらわれた時には、直ちに使用を止め、医師の診断を受けてください。

100℃の熱湯での煮沸消毒が可能です。パッドを取りはずして行ってください。

パッドは消耗品です。一年を目安に点検し、必要に応じて取り替えを行ってください。また、パッドが取れたままでは、使用しないでください。

整髪料、化粧品が付着は劣化・変質・変色の原因になる可能性がありますので、すみやかに拭きとってください。

故意に変形・改造したり、キズをつけないでください。素材の劣化による折れ等の原因になります。

【保守・点検に係る事項】

ねじがゆるんだ場合や変形をした時は、使用を中止し、調整してください。又、定期的に調整してください。

ベンジン・シンナー等および強酸・強アルカリの薬品は汚れ取りに使用しないでください。

【包装】

1 台/袋

【製造販売業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 : 増永眼鏡株式会社
住所 : 福井県福井市今市町 4-15
電話番号 : 0776-38-1501