

類別：機械器具（06）呼吸補助器
一般医療機器 一般的名称：人工呼吸器用マスク JMDN コード 70564000

ブリーズ マスク シリーズ

【警告】

- 1) 本品は、医師又は呼吸療法士により推奨される人工呼吸器（CPAP 又はバイレベル装置等）にのみ呼吸回路を通じて接続し、使用すること。【供給ガス不足・過多等による健康被害を招くおそれ】
- 2) 人工呼吸器（CPAP 又はバイレベル装置等）が正常に作動していることを確認後、本品は使用すること。【供給ガス不足・過多等による健康被害を招くおそれ】
- 3) 本品の使用により、皮膚に発疹又は刺激を感じた場合等の異常が発生したときは、直ちに使用を中止すること。【炎症等による健康被害を招くおそれ】
- 4) 呼吸ポートを塞いだり、覆ったりしないこと。【換気ができなくなるおそれ】
- 5) 本品使用中、身体に異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し医師の指示に従うこと。【閉所恐怖症、皮膚炎、炎症、痛み、結膜炎が発生するおそれ】及び【歯茎痛、歯痛、顎痛の発生や歯科疾患が悪化するおそれ】

【禁忌・禁止】

- <適用患者>
- 1) 自発呼吸のない患者には使用しないこと。【供給ガスを投与出来ないため、窒息等による健康被害を招くおそれ】
 - 2) 患者が自分で本品を取り外すことができない場合は使用しないこと。【窒息等による健康被害発生のおそれ】
 - 3) 嚥下反射障害による誤嚥や嘔吐のリスクがある患者には使用しないこと。【供給ガスを適切に投与出来ないため、窒息等による健康被害を招くおそれ】
- <使用方法>
- 1) 嘔吐を引き起こす可能性のある薬が処方されている患者には使用しないこと。【吐瀉物による窒息等、健康被害を招くおそれ】
 - 2) 本品の使用中には、喫煙をしないこと。【爆発・火災等の原因となるため】
 - 3) 火気および可燃物の近くでは使用しないこと。【爆発や火災の原因となるため】
 - 4) AAV を覆ったり、取り外したりしないこと。【換気ができなくなるおそれ】

【形状・構造及び原理等】


1. 構成

本品は、患者の用途に合わせて 4 種類のモデルに分かれており、それぞれサイズを選択が可能である。ただし、ネーザルピローに関して、サイズは 1 タイプであるが、ピロークッションを変更することにより、サイズ調整が可能となっている。


モデル番号	概 要
(1)	ブリーズコンフォート ネーザルマスク XS
	ブリーズコンフォート ネーザルマスク S
	ブリーズコンフォート ネーザルマスク M
	ブリーズコンフォート ネーザルマスク L
(2)	ブリーズ フルフェイスマスク S
	ブリーズ フルフェイスマスク M
	ブリーズ フルフェイスマスク L
(3)	ブリーズコンフォート フルフェイスマスク S
	ブリーズコンフォート フルフェイスマスク M
	ブリーズコンフォート フルフェイスマスク L
(4)	ブリーズ ネーザルピロー XS, S, M, L

2. 外観形状


(1)ブリーズコンフォート
ネーザルマスク

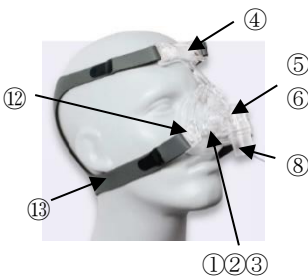


(2)ブリーズ
フルフェイスマスク

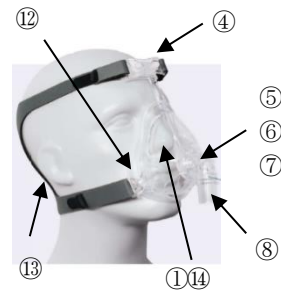

(3)ブリーズコンフォート
フルフェイスマスク

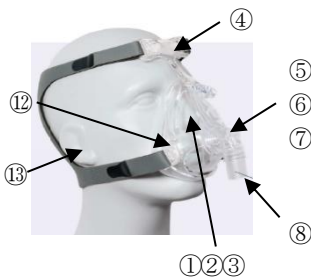

(4)ブリーズ
ネーザルピロー

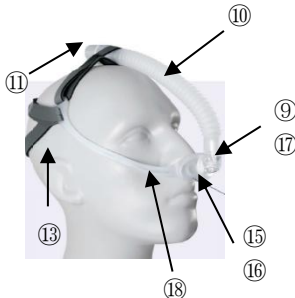

構成/パーツ

番号	名称
①	シリコンクッション
②	内部フレーム
③	外部フレーム
④	額サポート
⑤	エルボ
⑥	キャップ
⑦	AAV
⑧	アダプタ
⑨	エルボコネクタ
⑩	シリコンチューブ
⑪	回転コネクタ
⑫	アタッチメント
⑬	ハーネス
⑭	マスクフレーム
⑮	ピロークッション
⑯	ピロー支持部
⑰	接続リング
⑱	メインフレーム

取扱説明書は必ず参照すること

3. 原材料（身体に接触する部の原材料）

- ・シリコンクッション
：シリコン
- ・額サポート
：シリコン
- ・ハーネス
：ナイロン
- ・鼻ノズル（ブリーズ ネーザルピロー）
：シリコン
- ・メインフレーム（ブリーズ ネーザルピロー）
：シリコン

【使用目的又は効果】

本品は、自発呼吸のある患者に人工呼吸器（CPAP 又はバイレベル装置等）からのガスを供給するために用いられ、患者の鼻（ネーザルタイプまたはピロータイプ）もしくは鼻と口（フルフェイスタイプ）をおおい、人工呼吸器（CPAP 又はバイレベル装置等）の呼吸回路に接続して使用する成人用マスクである。

【使用方法等】

1. 使用前の確認

- ①マスクが乾燥していることを確認する。
- ②マスクの損傷・破損がないことを確認する。

2. 使用方法

- ①ハーネスを準備する。
- ②鼻又は鼻と口にマスクを置き、ハーネスの締め具合を調整する。
- ③フレームの左右にアタッチメントを留める。
- ④ハーネスやアタッチメントの引っ張り具合を調節してマスクを快適な位置に調節する。
- ⑤人工呼吸器（CPAP 又はバイレベル装置等）が正常動作することを確認する。
- ⑥本品を装置に接続された呼吸回路と接続して、治療を開始する。
【ブリーズ ネーザルピロー使用时】
- ①鼻ノズルを鼻ノズル支持部に留め、シリコンチューブにつなぐ。
- ②ハーネスを準備する。
- ③鼻ノズルを鼻孔に隙間なく固定されるように挿入し、ハーネスの締め具合を調整する。
- ④鼻ノズルの位置を決め、角度を調整する。
- ⑤顔の上にチューブを取り付ける。
- ⑥鼻ノズルが鼻を引張る場合は鼻と上部取付の間のチューブの長さを調節する。
- ⑦人工呼吸器（CPAP 又はバイレベル装置等）が正常動作することを確認する。
- ⑧本品を装置に接続された呼吸回路と接続して、治療を開始する。

3. 使用後のお手入れ

- ①マスクを各部品に分解する。
- ②各部の外観を点検し傷・亀裂等の異常が無いことを確認する。
異常が認められた場合は各地域のガイドラインに従って廃棄すること。
- ③マスク、付属品をぬるま湯と洗剤（5<pH<8 のもの）で洗浄する。
- ④各部分を清浄な水ですすぐ。
- ⑤マスク、付属品を清潔なタオルの上に置き、日陰で十分に乾燥させる。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ①本品はシングルペイシエント製品である。
- ②本品は、医師又は呼吸疾患治療専門家により推奨される人工呼吸器（CPAP 又はバイレベル装置等）のみに接続して使用すること。
- ③本品を生命維持用換気装置には用いないこと。
- ④装置が正常動作していない時は、本品を使用しないこと。

⑤本品の原材料に対するアレルギー反応のある患者には本品を使用しないこと。（本書、【形状・構造及び原理等】の3）原材料（身体に接触する部の原材料）欄を参照のこと。）

⑥人工呼吸器（CPAP 又はバイレベル装置等）の圧力が低い時は、マスクに呼気が残る再呼吸する場合がある。呼気の再呼吸を継続すると窒息する可能性がある。「窒息による健康被害発生のおそれ」

⑦本品は、嚥下反射障害及び誤嚥や嘔吐のリスクがある患者に対しては使用しないこと。

⑧ハーネスを締めすぎないこと。「頭痛、不安感等が発生するおそれ」

⑨本品の通風孔は、絶対に塞がないこと。「通風孔閉塞で窒息し健康被害発生のおそれ」

⑩呼吸ポートは、絶対に塞がないこと「排気が阻害され換気不十分による健康被害発生のおそれ」。

⑪本品を使用し、皮膚が赤くなったり、かぶれたり、不快となる等、異常が発生した場合は、即座に使用を中止し、医師の指示に従うこと。

⑫呼吸孔周囲及び本品は、常に清潔に保たれていること。

⑬本品を使用し、歯や歯茎やあごがひりひりしたり、歯の治療状況を悪化させたりする症状に気付いた場合は、即座に使用を中止し、医師・歯科医師に相談すること。

⑭本品使用前の3時間の飲食は避けること。「睡眠中の嘔吐により、気道閉塞が発生するおそれ。「窒息による健康被害発生のおそれ」

⑮本品に破損又は劣化が生じた場合は、直ちに使用をやめて新品と交換すること。

⑯本品を布乾燥機で乾燥させないこと。

⑰ハーネスにアイロンを掛けないこと。

⑱本品の廃棄は各地域のガイドラインに従って廃棄すること。

⑲適用圧については、取扱説明書を参照すること。

【保管方法及び有効期間等】

<貯蔵・保管環境>

- ・保管環境温度：-20℃～+60℃
- ・水のかかる場所、高温多湿な場所、直射日光の当たる場所、ほこりの多い場所、ガスを発生させるおそれのある化学薬品の保管場所を避けて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：	株式会社MAGnet ロジスティクスセンター
電話番号：	048-423-5327
本社・問い合わせ先：	株式会社MAGnet
電話番号：	03-5615-9907
製造業者：	SEFAM
国名：	フランス
主たる組立てを行う製造業者：	Hsiner Co., Ltd.
国名：	台湾