

類別：機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 一般的名称：ボーンミル（JMDN コード：18129000）

ボーンミル


【 禁忌・禁止 】

使用目的以外での使用。

【 形状・構造及び原理等 】

1. 形状

○ボーンミル・セット

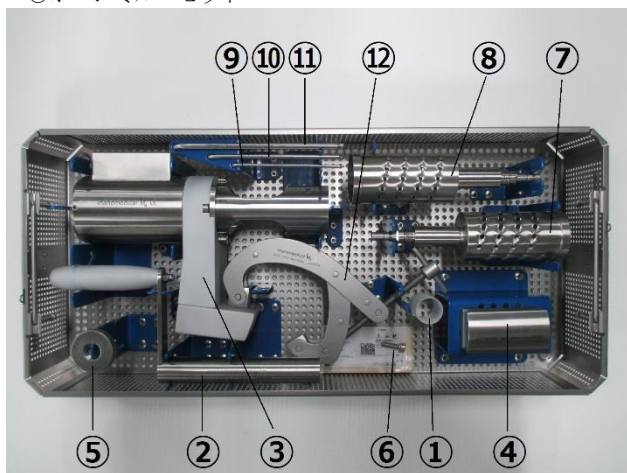

品番	品名
① SCC110-5000/01	ボーンミル用すべり軸受
② SCC110-5000/02	ボーンミル用ハンドル
③ SCC110-5000/03	ボーンミル・本体
④ SCC110-5000/04	ボーンミル用プッシャー
⑤ SCC110-5000/05	ボーンミル用リング
⑥ SCC110-5000/06	ボーンミル用スクリュース M4
⑦ SCC110-5001	カッティングドラム 4 mm・Φ28
⑧ SCC110-5002	カッティングドラム 3 mm・Φ28
⑨ SCC110-5003	六角レンチ 2.0 mm
⑩ SCC110-5004	六角レンチ 3.0 mm
⑪ SCC110-5005	六角レンチ 5.0 mm
⑫ SCC110-5006	ボーンミル固定器

2. 原理

本品に内蔵されたカッティングドラムにより、皮質骨や海綿骨を適切なサイズに砕くことができる。

【 使用目的又は効果 】

本品は骨再生又は骨移植用の骨基質として用いるために骨を粉碎してスラリー又は粉末にするために用いる器具である。
手動式で再使用可能である。

【 使用方法等 】

本品は未滅菌品であるので、使用前には必ず製造業者の推奨または病院施設の方針に従い滅菌すること。

以下の滅菌条件を推奨する。

滅菌方法	滅菌条件
高圧洗浄滅菌 (オートクレーブ) プレバキューム式	134℃~137℃・5 分/3 セット

乾燥時間：10 分以上。完全に乾くまで乾燥させること。

1. 使用前の準備

- 1) 洗浄・滅菌が行われていることを確認する。
- 2) 先端に緩み等が無いことを確認する。
- 3) 動作確認を行う。

2. 使用中の操作

- 1) 手技に沿って、適切な組合せの下に操作する。

3. 使用後の処置

- 1) 使用後は表面に付着した異物を拭取った後、直ちに蒸留水に浸しておく。
- 2) 洗浄・滅菌を行った後、乾燥させる。

<使用方法に関連する使用上の注意>

1. 使用前の点検において手術に必要な医療機器が揃っていること、また正常に作動することを確認すること。
2. 使用上必要な表示等が判読できない場合は使用しないこと。
3. 本品は皮質骨や海綿骨を適切なサイズに砕くための器械であるため、骨以外は決してミリングしないこと。

【 使用上の注意 】

<重要な基本的注意>

1. 本品の使用前および使用後は必ず洗浄、滅菌を行うこと。
2. 塩素系およびヨウ素系の薬剤は腐食の原因となりうるため、できるだけ使用を避けること。付着した場合は水洗いすること。
3. 強アルカリ性・強酸性洗剤、薬剤は器械を腐食させる恐れがあるため、原則として使用を避けること。

【 保管方法及び有効期間等 】

<保管方法>

高温、多湿、直射日光をさけて、清潔で乾燥した状態で保管すること。

【 保守・点検に係る事項 】

<クリーニング・メンテナンス>

「洗浄の際の器械分解説明書」に従って器械を分解し、洗浄、点検すること。

【 製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等 】

製造販売業者：

マーヘ・メディカル・ジャパン株式会社

電話：03-6715-8401

製造業者：

マーヘ メディカル ゲーエムベーハー (mahe medical gmbh)

国名：ドイツ