

医療用品 5 副木
一般医療機器 成形副木 35354000


フィットカラー

【禁忌・禁止】

1. 創傷に直接当てないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

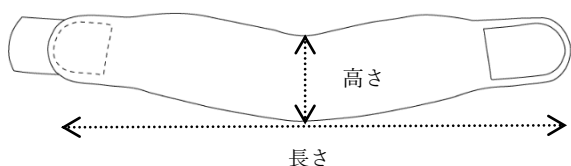

寸法

サイズ	適用範囲（首まわり）	長さ	高さ
S	27cm～33cm	48cm	8.5cm
M	32cm～38cm	53cm	9.0cm
L	37cm～43cm	58cm	9.5cm

2. 構造

ポリエチレンシートでできたカラー本体、ポリエ
ステルでできたカバー、装着のための面ファスナ
ーで構成された頸部固定用のシーネです。

3. 原理

本品は、頸部に沿わせることで、頸部を固定・支持
します。

【使用目的又は効果】

頸部挫傷等の際に頸部を固定・支持します。

【使用方法等】

1. 首まわりと高さに応じて、適切なサイズの本品を選
択します。
2. 中央のくぼみにあごを合わせ、頸部に巻くようにし
て、後面で面ファスナーを留めてください。



【使用上の注意】

1. 重要な基本的な注意

- 1) 使用時に、面ファスナーがしっかりと留められて
いることを確認してください。[使用中にずれたり
、外れたりする可能性があります。]
- 2) 適したサイズの製品を適正に使用し、患部に適合
しているか十分確認してください。[高さが合っ
ていない場合やきつく締め付け過ぎる場合は、神
経麻痺や血行障害を起こす恐れがあります。]
- 3) 必ず医師の指示に従ってご使用ください。
- 4) 装着部に傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれ
などの異常が生じた場合は、ただちに医師に相談
してください。

2. その他の注意

- 1) 本品は洗濯できません。また直接水がかからない
ように注意してください。

【保管方法及び有効期間等】

水濡れに注意し、直射日光、高温多湿を避けて、室温で
保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社松本義肢製作所

連絡先：〒461-0013 愛知県名古屋市東区飯田町 51 番地

TEL 052-386-1523

外国製造業者：A-MI GLOBAL CO.,LTD

22,Jangnimbeonyeong-ro 104 beon-gil,
Saha-gu, Busan, Korea,49465