

医療用品 4 整形用品
一般医療機器 ギプス包帯 33056000

イージーモールドアンクル


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 1. 再使用禁止。
- 2. 本品は 1 症例につき 1 使用とし、他の症例や本人以外には使用しないこと。
- 3. 本品の材料に過敏性またはアレルギーの既往歴のある患者には使用しないこと。
- 4. 使用する湯の温度を水温 70℃より高くしないこと。
[火傷の危険性があるため]
- 5. サーマルダブルスターの成形以外に、サーモモルダブルスターとステーホルダーの加工をしないこと。
- 6. サーマルダブルスターを挿入しないで使用しないこと。
- 7. 創傷に直接当てないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

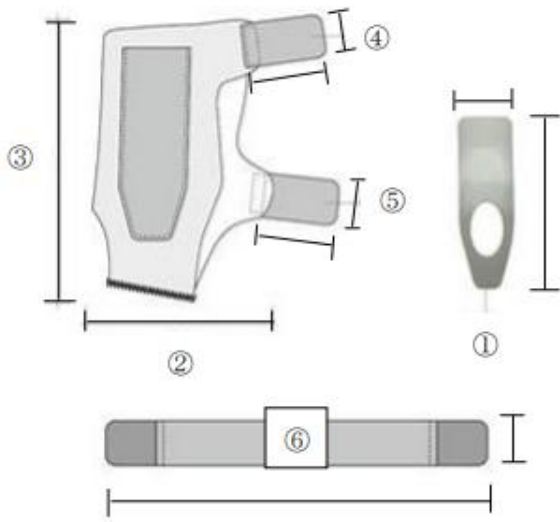

① サーマルダブルスター補強ライン部



補強ライン

サーモモルダブルスター（2 個）－ ①

サイズ	高さ×幅
S	160×52 mm
M	
L	
XL	
2XL	

ステーホルダー

サイズ	② 長さ	③ 高さ	④⑤ 面ファスナー ストラップ 幅×長さ	⑥ 伸縮ストラップ 幅×長さ
S	149mm (±18mm)	233 mm (±18mm)	38×70mm (±10mm)	38×420mm (±10mm)
M	154mm (±18mm)			38×440mm (±10mm)
L	159mm (±18mm)			
XL	164mm (±18mm)			
2XL	169mm (±18mm)			

サイズ選択

サイズ	足関節周径
S	18-20cm
M	20-22cm
L	22-24cm
XL	24-26cm
2XL	26-28cm

2. 構造

本品は、PLA+プラスチックのステー(2個)と、ポリエステルとネオプレン製のステーホルダーからなります。

3. 原理


本品は、サーモモルダブルステーをステーホルダーに挿入することで、患部を固定・支持します。サーモモルダブルステーは 60℃から 70℃の温水に浸すことで成形でき、患部の形状に合わせることができます。

【使用目的又は効果】


足関節の捻挫等において足関節を固定します。

【使用方法等】

1. 適切なサイズの本品を選定します。
2. ステーホルダーのポケットからサーモモルダブルステーを取り出します。

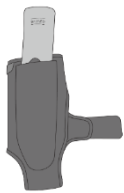

3. 靴下を履いて、踵からステーホルダーを履きこみます。ステーホルダーのタグが足関節の後面上部に位置するようにしてください。面ファスナーストラップを仮留めしておきます。

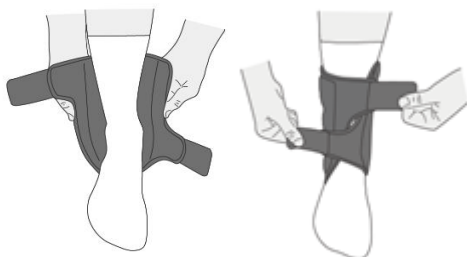


4. 60℃から 70℃の温水にサーモモルダブルステーを浸します。



5. 約1分後、サーモモルダブルステーが柔らかくなったから tong 等で取り出し、水分をタオル等で拭き取ります。



6. サーモモルダブルステーをステーホルダーに挿入し成形します。約1分で硬化します。不適合の場合はサーモモルダブルステーを取り出し、再度温水に浸し成形し直してください。

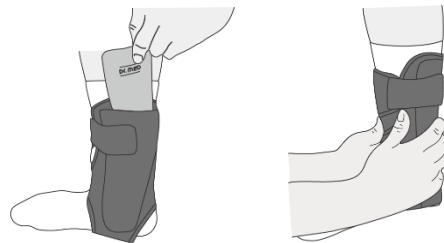

7. 同様にもう片側のサーモモルダブルステーも 60℃から 70℃の温水に浸して軟化させ、ステーホルダーに挿入し成形します。

8. 面ファスナーストラップを取り付けし直します。

[右足の場合]



正面からの図



外側からの図



内側からの図

9. 必要に応じて付属の伸縮性ストラップをフィギュアエイトで取り付けます。

[右足の場合]



正面からの図



外側からの図



内側からの図

10. 装着状態が適合していることを確認してください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 使用時に、面ファスナーがしっかりと留められていることを確認してください。[使用中にずれたり、外れたりする可能性があります。]
- 2) 適したサイズの製品を適正に使用し、患部に適合しているか十分確認してください。[きつく締め付け過ぎる場合は、神経麻痺や血行障害を起こす恐れがあります。]
- 3) 本品は必ず靴下やストッキングネット等の上から装着し、直接肌に当てないでください。
- 4) 装着時間等、必ず医師の指示に従ってご使用ください。
- 5) 装着部に傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常が生じた場合は、ただちに医師に相談してください。
- 6) サーモモルダブルステアの成形を行う際は、ステアに破損等がないことを確認の上、ご使用ください。

2. その他の注意

ステアホルダーの洗濯方法及び注意

- 1) 必ずサーモモルダブルステアを取り出してから洗濯してください。内側と外側のステアを判別しておいてください。
- 2) 中性洗剤を使用して 30℃以下の水で手洗いをし、陰干ししてください。
- 3) 漂白剤、乾燥機の使用、アイロン、ドライクリーニングは避けてください。
- 4) 乾燥後サーモモルダブルステアを挿入する際は、内側と外側で挿入するステアに誤りのないよう、また挿入する向きに注意してください。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光、高温多湿を避けて、室温で保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社松本義肢製作所

連絡先：〒461-0013 愛知県名古屋市東区飯田町 51 番地

TEL 052-386-1523

外国製造業者：A-MI GLOBAL CO.,LTD

22,Jangnimbeonyeong-ro 104 beon-gil,
Saha-gu, Busan, Korea,49465