
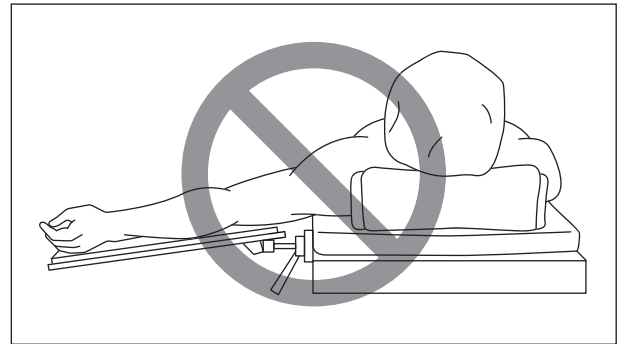


器 0 1 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ (70469000)

上肢台

【警告】


1. 患者の任意の体位を確保するためにアクセサリで支持するときは常に患者の状態を監視すること。
[長時間の体位は神経麻痺の原因になります。]
2. 側臥位での使用は下側になる腕を上肢台に固定すること。
[宙にさらした状態は患者に障害が起きることがあります。]

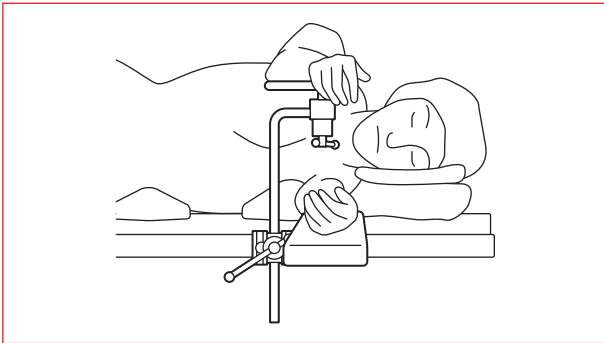


上面が手術台の面より下がったら使用しないこと。

**【形状・構造及び原理等】

* 形状・構造

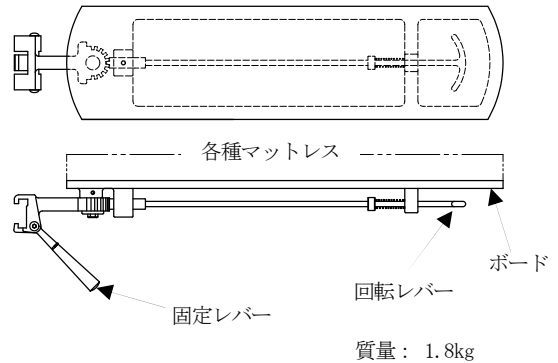

付属品: マットレス

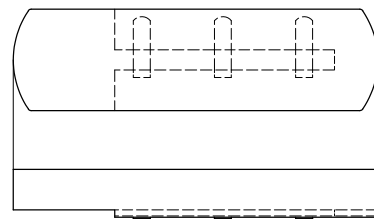


【禁忌・禁止】

1. 弊社製手術台以外では使用しないこと。
[手術台のサイドレール寸法が異なるため固定できないことがあります。]
2. 下記の状態で体位を設定しないこと。
[上腕神経麻痺の原因になります。]



手術台に対して直角以上に開かないこと。

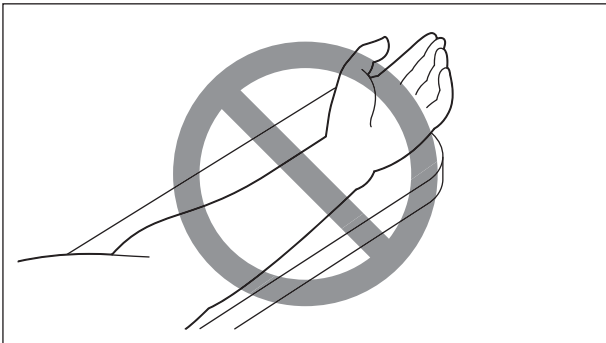

腕を上向きにしないこと。(側臥位を除く)

商品コード	商品名
08-065-05	上肢台
08-065-06	上肢台 (40mmマットレス付)
08-065-07	上肢台 (80mmマットレス付)
08-065-30	上肢台 (60mmミズオリジナルマットレス付)
08-065-35	上肢台 (100mmミズオリジナルマットレス付)

<付属品>

商品コード	商品名
08-065-08	上肢台用マットレス 40mm
08-065-09	上肢台用マットレス 80mm
08-065-40	上肢台用ミズホオリジナルマットレス (厚さ 60mm)

商品コード	商品名
08-065-45	上肢台用ミズホオリジナルマットレス(厚さ 100mm)
08-065-47	上肢台用ミズホオリジナルマットレス(厚さ 70mm)
08-057-45	上肢台用ミズホオリジナルマットレス(厚さ 150mm)
08-065-23	上肢台マットレス (70mm・黒カバー)
08-065-24	上肢台マットレス (110mm・黒カバー)
08-065-28	上肢台マットレス 彎曲タイプ 70mm厚
08-065-29	上肢台マットレス 彎曲タイプ 110mm厚

原材料：ステンレス鋼、アルミ合金、樹脂


【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリ。

【使用方法等】


1. 取り付け

- 1-1 固定レバーを手前に引きながら手術台のサイドレールに取り付ける。
- 1-2 固定レバーを離す。

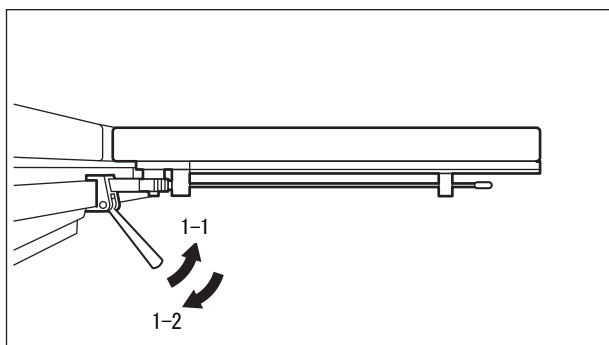


2. 取り外し

- 2-1 固定レバーを手前に引きながら上肢台の端を持ち上げる。
- 2-2 サイドレールから外す。

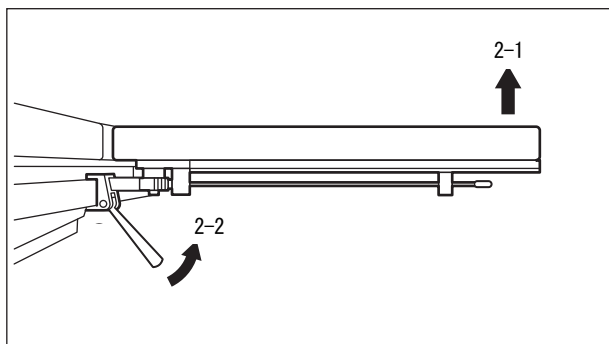

3. 移動

- 3-1 回転レバーを引きながら 90 度まで移動。

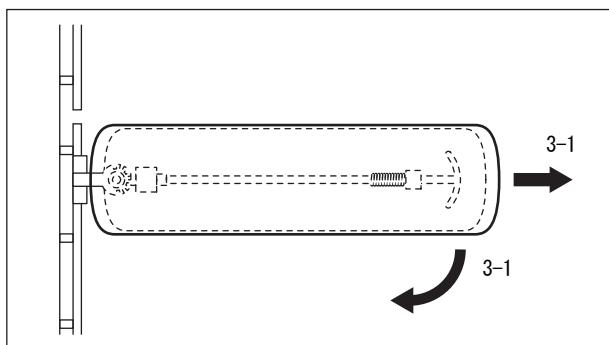

*【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ① 固定レバーが手術台レールに固定されているか必ず確認してください。スプリングが破損した状態では固定レバーが外れたり、動いたりして、患者に傷害がおきるおそれがあります。
- ② スプリングが破損した場合、手や指をケガするおそれがあります。
- ③ 衛生のため、患者が本製品に触れる部分には必ず滅菌済ドレープを使用すること。
- ④ 手術台を作動するときは他のアクセサリやテーブルトップとの接触・干渉に注意すること。
- ⑤ 回転角度調節後は、必ず回転レバー先端の爪とボード下のギヤが確実に噛み合っていることを確認すること。
- ⑥ 手術台の縦転ポジションで使用する場合、上肢台が滑って動く可能性があるため、手術中は十分留意して患者の状態を監視すること。
- ⑦ 許容荷重(15kg)を超える荷重を加えないこと。

2. 相互作用

〔併用注意〕（併用に注意すること）

分離式手術台での使用は分離時にストレッチャーレール受けに接触しない位置まで移動させること。接触するとテーブルトップの分離ができずアクセサリが破損する場合があります。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管してください。

2. 耐用期間

指定した保守点検及び適切な保管をした場合：7年（自己認証）

注：耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品（マットを含む）の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

*【保守・点検に係る事項】

1. 使用前・使用後の点検

使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。

2. 清掃・消毒

血液・薬剤・汚染等の汚れは水で拭き取り、さらに消毒用アルコール・ガーゼで清拭してください。

3. 故障時のお願い

本装置が故障したと思われるときは、本装置に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

ミズホ株式会社

TEL 03-3815-3097

製造業者

ミズホ株式会社 千葉工場

保証期間に係わる事項

本品は納品/設置してから1年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。