

器39 医療用鉗子

一般医療機器 手術用骨鉗子 (32853000)

ケリソン骨パンチ

*

【警告】

クローンツェルト・ヤコブ病 (CJD) の患者、又はその疑いのある患者に使用した器具を再使用する場合には、最新の国内規制、ガイドラインを遵守すること。[二次感染の恐れがあります]

*

【禁忌・禁止】

1. 化学薬品の使用禁止

本品を化学薬品に曝すことは避けること。[腐食による損傷の原因となります]

2. 粗雑な取扱いの禁止

本品を変形あるいはキズをつける等の粗雑な取扱いはしないこと。[器具器械の寿命を著しく低下させます]

3. 磨き粉や金属ウールの使用禁止


洗浄の際、目の粗い磨き粉や、金属ウールで器具の表面を磨くことはしないこと。[本品表面に擦過傷を生じ、錆や腐食の原因となります]

4. 家庭用洗剤の使用禁止

洗浄に使用する洗剤は必ず医療用洗剤を使用し、家庭用洗剤は使用しないこと。[錆や腐食の原因となります]

【形状・構造及び原理等】

形状・構造

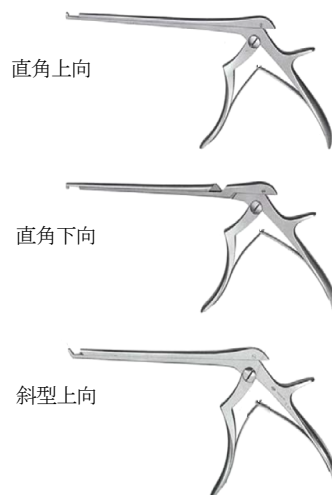

商品コード	商 品 名
02-093-01	ケリソン骨パンチ 直角上向 15×2mm
02-093-02	ケリソン骨パンチ 直角上向 15×3mm
02-093-03	ケリソン骨パンチ 直角上向 15×4mm
02-093-04	ケリソン骨パンチ 直角上向 15×5mm
02-093-05	ケリソン骨パンチ 直角上向 18×3mm
02-093-06	ケリソン骨パンチ 直角上向 18×4mm
02-093-07	ケリソン骨パンチ 直角上向 18×5mm
02-093-08	ケリソン骨パンチ 直角上向 20×3mm
02-093-09	ケリソン骨パンチ 直角上向 20×4mm
02-093-10	ケリソン骨パンチ 直角上向 20×5mm

商品コード	商 品 名
02-094-01	ケリソン骨パンチ 直角下向 15×3mm
02-094-02	ケリソン骨パンチ 直角下向 15×4mm
02-094-03	ケリソン骨パンチ 直角下向 15×5mm
02-094-04	ケリソン骨パンチ 直角下向 18×3mm
02-094-05	ケリソン骨パンチ 直角下向 18×4mm
02-094-06	ケリソン骨パンチ 直角下向 18×5mm
02-095-01	ケリソン骨パンチ 斜型35° 上向 15×2mm
02-095-02	ケリソン骨パンチ 斜型35° 上向 15×3mm
02-095-03	ケリソン骨パンチ 斜型35° 上向 15×4mm
02-095-04	ケリソン骨パンチ 斜型35° 上向 15×5mm
02-095-05	ケリソン骨パンチ 斜型35° 上向 18×3mm
02-095-06	ケリソン骨パンチ 斜型35° 上向 18×4mm
02-095-07	ケリソン骨パンチ 斜型35° 上向 18×5mm
02-095-08	ケリソン骨パンチ 斜型35° 上向 18×1mm

材質: ステンレス鋼

* 【使用目的又は効果】

本品は、ハンドルを握ることで、先端開口部に挟み込んだ軟骨又は骨などの組織を締め付けて切断することで組織の除去を行う。

* 【使用方法等】

本品のご使用前には必ず点検を行い、洗浄、滅菌を行って下さい。(保守・点検に関わる事項を参照下さい)

** 【使用上の注意】

* 1. 重要な基本的注意

- ・本品は未滅菌品です。使用に際しては必ず洗浄し、適切に機能することが確認された標準的滅菌条件又は医療機関で滅菌バリデーションが検証され、有効性が立証された滅菌条件で滅菌を行ってご使用ください。
- ・本製品は使用目的に合わせて繊細に作られているため、能力以上の(大きい、硬い)組織を切除しようとすると先端部(刃先等)に無理な力が加わり破損する場合があります。
- ・患部に挿入するときは、捻ったり、槌子のように力をかけたりしないこと。また切除して引き抜く際は、捻らず真直ぐに引き抜いてください。
- ・術中は本製品が破損していないか随時確認し、異常が認められたときは、縫合する前に体内に遺残物がないかモニターで確認してください。

2. 不具合・有害事象

不具合事象

- ・化学薬品等の使用による腐食・孔食
- ・腐食や孔食による折損・破損

有害事象

- ・折損や破損片の体内遺残

＊【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
本品は高温・高湿を避け、温度や湿度が極端に変化しない場所に保管してください。
2. 耐用期間
指定した保守点検及び適切な保管をした場合：5年（自己認証）

＊ ＊【保守・点検に係る事項】

- ＊ ＜使用者による保守点検事項＞
1. 使用前の点検事項
動作、機能チェックの実施
本品は、日常点検及び使用前点検により、正常に機能することを確認してください。
2. 使用後の点検事項
(1) 直ちに清水で洗浄する
(1)-1 本品が漂白剤、消毒液等の塩素及びヨウ素を含む溶液に曝された場合には、直ちに清水で洗浄し中性酵素洗剤に浸漬してください。その後用手洗浄、超音波洗浄にて汚染物を除去してください。
(1)-2 汚れの残存がある箇所はブラッシングによる物理的洗浄を追加してください。
(1)-3 洗浄剤や消毒剤の使用にあたり、製造業者の取扱説明書に従い、希釈濃度、湿度、及び浸漬時間等については遵守してください。
(1)-4 洗浄の際には柔らかい素材のタオル、プラスチック製ブラシ、ウォーターガンを使用してください。
(1)-5 金属製のブラシや粗い研磨材を使用することや過度の力を加えること、機器を落としたりぶつけたりすること等がない様にしてください。
(1)-6 洗浄水には完全脱イオン水（RO 水：Reverse Osmosis）を推奨します。
(1)-7 仕上げすすぎは完全脱イオン水（RO 水）を使用してください。
※本品の洗浄・消毒はウォッシャーディスインフェクタの併用を推奨します。
熱水消毒条件：90～93℃、5～10 分間（Ao 値：3000～12000）
（EN ISO15883-1 参照）
- (2) 洗浄後は直ぐに乾燥する
直ちに乾燥させ、湿った状態で必要以上に長時間放置することは避けてください。
- (3) 蒸留水や完全脱イオン水（RO 水）を使用する
洗浄及び滅菌に使用する水は、蒸留水や完全脱イオン水（RO 水）をご使用ください。水道水中に含まれる残留塩素及び有機物質がシミや錆発生の原因となります。
- (4) 水性潤滑・防錆保守剤を使用する
洗浄後は潤滑・防錆保守剤が完全に取り除かれています。洗浄後滅菌する前に水性潤滑・防錆保守剤「ミルクテック S」を塗布してから滅菌してください。摺動部に潤滑・防錆保守剤が塗布されていない状態で機器の操作は行わないでください。[かじりの原因になります]
3. 滅菌
適切に機能することが確認された高圧蒸気滅菌器による標準的滅菌条件又は医療機関で滅菌バリデーションが検証され、有効性が立証された滅菌条件で滅菌を行ってください。

標準的滅菌条件の例：高圧蒸気滅菌（日本薬局方）

滅菌温度	保持時間
115-118℃	30 分
121-124℃	15 分
126-129℃	10 分

クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)患者、又は疑いのある患者に使用した器具の滅菌条件の例：高圧蒸気滅菌（ガイドライン参照）

滅菌温度	保持時間
134℃	18 分

＜業者による保守点検事項＞
本器械を安全に使用するために、弊社及び弊社が認めた業者による定期点検を実施してください。それ以外の業者による保守点検は、有害事象の発生、性能・機能の低下を招くおそれがあります。定期点検をご希望される場合は、ご購入店又は弊社にお問い合わせください。

【主要文献及び文献請求先】

プリオン病及び遅発性ウイルス感染症に関する調査研究班
プリオン病感染予防ガイドライン（2008 年版）

＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
ミズホ株式会社
TEL 03-3815-3096
製造業者
ミズホ株式会社 五泉工場

＊【保証期間に係る事項】

本品は納品/設置してから1年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。