

器09 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管
一般医療機器 四肢画像診断・放射線治療用患者体位固定具 (40900000)


回転式撮影台（ドア式）

- * **【警告】**
- 患者を回転台に支持固定するときには、常に患者の状態を監視すること。
 - 長時間の支持固定は神経麻痺の原因になります。

- * **【禁忌・禁止】**
- 撮影台の設置**
撮影台が転倒すると重篤事故または死亡事故につながる恐れがあります。
撮影台を設置するときには次の事項に注意すること。
 - 撮影台を凸凹のある床面に設置しないこと
 - 撮影台を高くするために、ベースの下に当て物等を入れたりしないこと
 - 移動**
患者を乗せた状態で移動やブレーキ解除を行わないこと。
患者が転倒する恐れがあります。
 - 操作中の作動部**
撮影台の操作中に作動部の隙間に手を入れないこと。
手や指を挟んで怪我をする恐れがあります。
 - 粗雑な取扱いの禁止**
本品を変形あるいはキズをつける等の粗雑な取扱いはいしなないこと。[器具器械の寿命を著しく低下させます]
 - 改造の禁止**
分解または改造をしないこと。
分解や改造を行うと機能不良の原因となります。

* **【形状・構造及び原理等】**

形状・構造

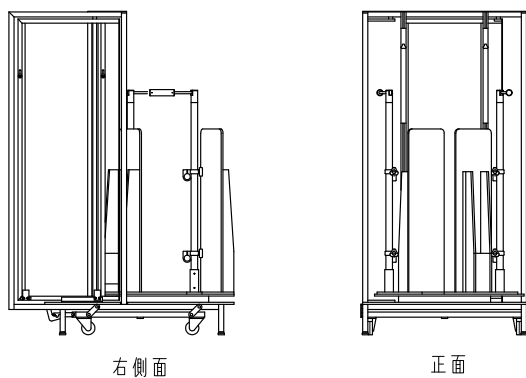

商品コード	商品名
21-090-51	回転式撮影台（ドア式）

材質：ステンレス鋼

鉄鋼

アルミニウム合金

樹脂

- * **【使用目的又は効果】**
- 本品は、X線撮影時、患者の足を適切に位置決め、固定する目的で特別に設計された装置であり、容易に再現性のある位置決めをするためにも使用し、X線画像診断用だけを対象とする。下肢のX線撮影において、正面像と60°側面像を撮影するための撮影台です。

- * **【使用方法等】**
- 本品のご使用前には必ず点検を行ってください。
(保守・点検に関わる事項を参照ください)

- * **【使用上の注意】**
- 別途購入品
X線撮影用カセット及びグリッドは別途御購入ください。

- * **【保管方法及び有効期間等】**
- 保管方法**
本品は高温・高湿を避け、温度や湿度が極端に変化しない場所に保管してください。
 - 耐用期間**
指定した保守点検及び適切な保管をした場合：5年（自己認証）

- * **【保守・点検に係る事項】**
- 動作、機能チェックの実施**
本品は、日常点検及び使用前点検により、正常に機能することを確認してください。

＜業者による保守点検事項＞

本器械を安全に使用するために、弊社及び弊社が認めた業者による定期点検を実施してください。それ以外の業者による保守点検は、有害事象の発生、性能・機能の低下を招くおそれがあります。
定期点検をご希望される場合は、ご購入店又は弊社にお問い合わせください。

* **【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者

ミズホ株式会社

TEL 03-3815-3096

製造業者

ミズホ株式会社 五泉工場

* **【保証期間に係る事項】**

本品は納品/設置してから一年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。