

器01 手術台及び治療台
一般医療機器 整形外科用手術台 (35394000)

HANAテーブル

【警告】

1. 患者の任意の体位を確保するためにテーブル及びアームを作動、又はアクセサリで支持するときは、常に患者の状態を監視すること。[長時間の体位は神経麻痺や褥瘡の原因になります。]
2. 標準付属品及びオプション品の取付けは取扱説明書の手順に従うこと。[取付けが不完全であると、患者が転落することがあります。]
3. フェモラルフック及びフェモラルフックサポートの使用前に滅菌された状態であること。及び損傷、老化、傷等がない事を確認すること。[未滅菌及び損傷品の使用は、感染症・組織への外傷及び長時間の手術の原因になります。]


【禁忌・禁止】

1. 手術台の移動及び設置
手術台を移動及び設置するときは、次の事項をしないこと。
[転倒するおそれがあります。]
1-1 凹凸のある床面に設置すること。
1-2 位置を高くするために、手術台の下に当て物をいれること。
1-3 患者を乗せた状態でブレーキを解除すること。
2. 電源コードの取扱い
電源コードの上に重量物を置いたり、キャスター付の機器で乗り越えたりしないこと。[電源コードが破損して火災又は感電事故を起こすことがあります。]
3. 許容荷重
【形状・構造及び原理等】の項目3.に示す許容荷重を超えた使用をしないこと。[破損するおそれがあります。]

**【形状・構造及び原理等】

*

1. 外観図

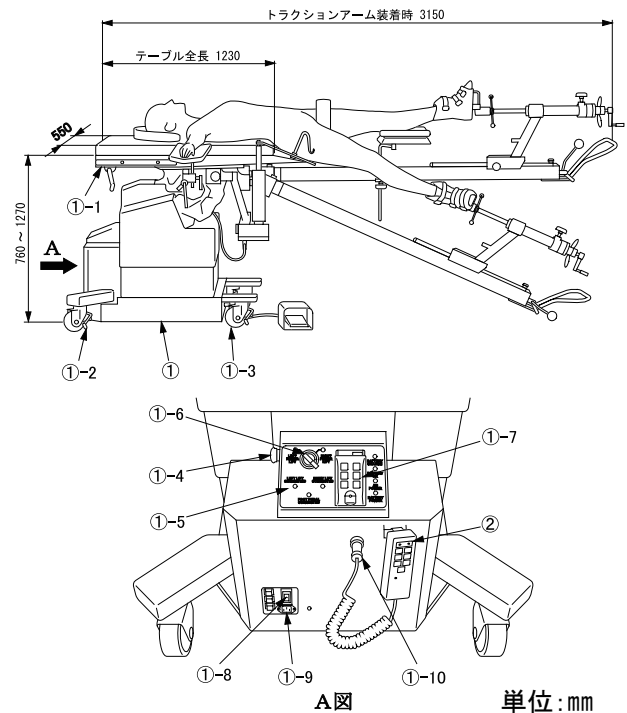

①	テーブルベース	①-6	フェモラルリフトスイッチ
①-1	テーブルトップ	①-7	コントロールパッド
①-2	ブレーキ	①-8	電源スイッチ
①-3	キャスター	①-9	電源用コネクタ
①-4	緊急停止スイッチ	①-10	操作ボックスコネクタ
①-5	コントロールパネル	②	操作ボックス

本体・標準付属品及びオプション品

商品コード	商品名
02-149-10	Hanaテーブル(6875J)

Hana標準付属品

02-149-11	Hanaテーブルベース(6875-7)
02-149-88	Hana操作BOX(6807-4)
02-149-73	フェモラルフック RIGHT(6850-918)
02-149-72	フェモラルフック LEFT(6850-919)
02-149-71	フェモラルフックロング RIGHT(6850-144)
02-149-70	フェモラルフックロング LEFT(6850-140)
02-149-75	フェモラルフックサポート1組(6850-110)
02-149-76	Hanaフェモラルリフトエクステンション1組(6875-264)

取扱説明書を必ずご参照ください。

02-149-77	Hanaフェモラルリフトマウント RIGHT (6875-600)
02-149-78	Hanaフェモラルリフトマウント LEFT (6875-601)
02-149-80	Hanaトラクションブーツ延長器1組 (6875-399)
02-149-82	Hanaレッグサポートアダプター (6875-201)
02-149-20	レッグボード LARGE (5855-838)
02-149-21	レッグブラケット (6300-92)
02-149-93	Hanaラジオルーセントリフトアシストトラクションアーム RIGHT (6875-3700)
02-149-94	Hanaラジオルーセントリフトアシストトラクションアーム LEFT (6875-3900)
02-149-22	トラクションブーツ SMALL 1組 (6850-485)
02-149-23	トラクションブーツ LARGE 1組 (6850-486)
02-149-25	トラクションブーツライナーセット SMALL (FE00384)
02-149-26	トラクションブーツライナーセット LARGE (FE00386)
02-149-85	Hanaパッド付上肢台 (6875-292)
02-149-28	仰臥位用股間支柱 (6850-413)
02-144-22	安全ベルト 90インチ (5840-44)
02-149-32	Hanaフェモラルリフト緊急用昇降ハンドル (6875-602)
02-149-33	Hanaフェモラルリフトマウント着脱式 (6875-2730)
02-149-87	Hanaテーブルカバー (6875-20)
02-149-34	Hana腰部テーブルパッド (6875-7129)
02-149-35	Hanaテーブルパッド (6875-7120)
02-149-90	HanaフェモラルリフトフットペダルⅡ (6875-5005)

Hanaオプション品

02-149-79	Hanaフェモラルリフトフットペダル (6875-5003)
02-149-81	Hana TKAアングルサポートシステム (6875-230)
02-149-86	Hana側臥位用股間支柱 (6875-250)
02-149-24	トラクションブーツX-LARGE1組 (6850-487)
02-149-27	トラクションブーツライナーセットX-LARGE (FE00388)
02-149-89	Hana付属品カート (6875-500)
02-149-29	レッグボード LARGE (6850-170)
02-143-08	トラクションアームクランプ (5855-61)
02-149-30	Hana/PRO FX 患者保護キット 6個入 (6855)
02-149-31	Hana外傷セット (6875-2761)
02-143-04	クランク型 固定金具 (5393)
02-143-52	STS交差式上肢台 (5857)
02-149-36	Hanaトランスファーボード (6875-2740)
02-149-37	Hana頭側用ドレーブロッド (6875-747)
02-149-38	Hana脚側用ドレーブロッド (6875-750)
02-149-39	膝関節屈曲用ポスト (6850-180)
02-149-40	膝関節屈曲用ボールポスト (6850-400)
02-149-41	トラクションフック (6850-114)
02-149-42	脛骨用直行型トラクションロッド (5855-411)
02-149-43	脛骨用直行型トラクションブーツアダプター (6850-25)
02-149-44	トラクションユニット (5855-345)
02-149-45	トラクションフットプレート (5855-440)
02-149-46	股関節鏡用股間支柱 (3369)

02-149-83	Hanaラジオルーセントトラクションアーム RIGHT (6875-350)
02-149-84	Hanaラジオルーセントトラクションアーム LEFT (6875-360)

2. 質量

質量：400 kg

3. 許容荷重

205 kg

4. 電氣的定格

定格電源電圧 : AC100V
 定格電源周波数 : 50-60Hz
 電源入力 : 400VA
 バッテリー電源電圧 : DC24V

5. 機器の分類 (JIS T 0601-1:2017)

電撃に対する保護の形式による分類：クラスⅠ機器
 電撃に対する保護の程度による装着部の分類：B形装着部
 水の有害な侵入に対する保護の程度：IPX4
 本製品はEMC規格 JIS T 0601-1-2：2018 に適合

6. 使用環境

周囲温度範囲：20℃ (68° F)
 相対湿度範囲：50%
 気圧範囲 : 75kPa～105kPa

7. 機能

電動

- | | | |
|----------|---|---------|
| ① 昇降範囲 | 最高位 | :1270mm |
| | 最低位 | : 760mm |
| ② 縦転角度 | 頭下がり | :12° |
| | 頭上がり | :12° |
| ③ 横転角度 | 右下がり | :12° |
| | 左下がり | :12° |
| ④ 自動水平復帰 | 縦転/横転 | |
| ⑤ 操作機器 | 操作ボックス/コントロールパッド/フェモラルリフトスイッチ/フェモラルリフトフットペダル/緊急停止スイッチ | |

手動

- | | | |
|---|---------------|--------------------|
| ① | トラクションブーツ旋回角度 | 内転:20°
外転:45° |
| ② | トラクションブーツ屈折角度 | 上がり:28°
下がり:35° |
| ③ | トラクションブーツ回転角度 | :360° |
| ④ | トラクションアーム回転角度 | :360° |
| ⑤ | キャスター | 移動/ブレーキロック・解除 |
| ⑥ | 取り外し | 標準付属品/オプション品 |

8. 作動原理

本テーブルの動きは全て（昇降、横転、縦転、脚部挙上）メインコントローラー制御下のDCモーターにて作動します。各作動のリクエストはコントロールボックス上のコントロールパネル又は操作ボックスのボタンを押すことによりメインコントローラーがそれを感知しモーターを作動させます。またそのボタンがリリースされるとメインコントローラーがそれを感知しモーターを停止させます。各作動の両端にはそれぞれリミットスイッチが装備されており、何らかの理由によりメインコントローラーが誤作動してもコントローラーの介入なしに両端で電氣的に止めることができるように設計されています。各作動のスピードはPWM「Pulse Width Modulation」によりメインコントローラーのプログラムにて制御されます。脚部挙上の左右の選択はコントロールボックス上のコントロールパネルの2position key switchにて選択することができ、脚部挙上の作動リクエストはフットスイッチからの上下作動リクエストの信号をメインコントローラーが感知し作動が制御されます。

取扱説明書を必ずご参照ください。

【使用目的又は効果】

本品は、調節可能な台で、下肢の整形外科的処置時に、患者の身体を支持する上昇面と患者の下肢の牽引を支持・実行するための特別な装置を備えたものをいう。本品の特別な機能を利用して、位置の調節等を行い、正しい位置に固定することが可能である。

【使用方法等】

詳細な使用方法是取扱説明書をご参照ください。

1. 電源の入れかた（使用前）


- 1-1 電源コードを電源用コネクタと医用コンセントに差し込みます。
- 1-2 電源スイッチをONにすると操作ボックスのパワーランプ（AC）が点灯して電源が入ります。（バッテリー使用時は操作ボックスのパワーランプ（BATTERY）が点灯して電源が入ります。）

2. 電源の切りかた（使用后）

電源スイッチをOFFにすると操作ボックスのパワーランプ（AC）が消灯して電源が切れます。（バッテリー使用時は操作ボックスのパワーランプ（BATTERY）が消灯して電源が切れます。）

3. 操作ボックスの使いかた（使用中）

操作ボックスの各機能スイッチを押します。スイッチを押す間は機能が作動、離すと停止します。各機能は最大限に達すると作動が停止します。

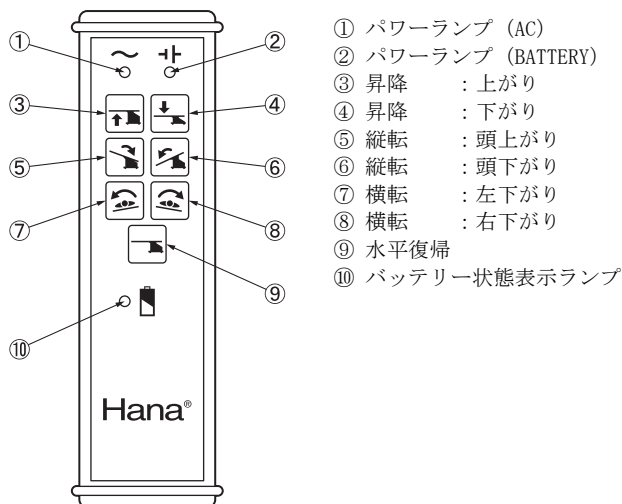

4. バッテリー充電のしかた

操作ボックスのバッテリー状態表示ランプが Ⓢ に点灯したら、以下の手順で直ちに充電してください。

- 4-1 電源コードを電源用コネクタと医用コンセントに差し込みます。
- 4-2 電源スイッチをONにします。
- 4-3 充電が完了するとバッテリー状態表示ランプが Ⓢ に点灯します。

※ 【使用上の注意】

※ 1. 重要な基本的注意

- ① 締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では機器が動いたり、外れたりして患者に障害が起きるおそれがあります。
- ② 併用する機器やアクセサリを使用するときは、当該機器の添付文書及び取扱説明書を読んで影響を確認してください。誤った使用法は患者・操作者及び手術台・併用する機器やアクセサリに悪影響を及ぼします。
- ③ 衛生のため、患者が手術台に触れる部分には必ず滅菌済ドレープを使用してください。
- ④ 併用する他の医用電気機器から電磁的影響による誤作動が発生するおそれがあります。

- ⑤ 手術台を操作中にテーブル下部やアームの隙間に手を入れないでください。怪我をするおそれがあります。
- ⑥ キャスターのブレーキは4つのキャスター全てをロックしてください。アンロックの状態では手術台が動くおそれがあります。
- ⑦ 手術台の移動はゆっくり行ってください。早く移動させると停止又は向きの変更が困難になり、何かと衝突したときに手術台が破損するおそれがあります。
- ⑧ 使用条件によってバッテリーの寿命は大きく変わります。短時間使用で頻繁に充放電が繰り返されるとバッテリーの劣化が早まる可能性がありますので週1回3時間以上の充電（週末の充電）を実施してください。
充電満了まで最長18時間掛かります。
- ⑨ 手術台使用後に操作ボックスのバッテリー状態表示ランプ Ⓢ が点滅している場合は、直ちに充電してください。
充電不足になるとAC電源でご使用は頂けますが、バッテリーでのご使用はできなくなります。
- ⑩ 3時間を過ぎてもバッテリー状態表示ランプの Ⓢ が点灯するときは故障が考えられます。バッテリー電源での使用を中止して、ご購入店又は弊社にご連絡ください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管環境

- * 周囲温度範囲：-20℃～50℃
 相対湿度範囲：10%～85%（結露あり）
 気圧範囲：50 kPa～110 kPa

2. 耐用期間

指定した保守点検及び適切な保管をした場合：10年

[自己認証（弊社データ）による]

※ 耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品（マットレス含む）の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。但し、一般市販品の部品については、製造元の事情（製造期間終了・製造中止等）により、耐用期間内であっても部品供給による交換ができなくなる場合があります。

3. 定期交換部品

部品名	交換時期
バッテリー	2年
操作ボックス	4～6年
キャスター	5～7年
電源コード	5～7年

※上記は目安の期間です。

使用条件により交換時期が変わります。

【保守・点検に係る事項】

<使用者による保守点検事項>

- * 使用者は手術台の使用前・使用後に必ず下記点検事項及び清掃・消毒及び滅菌を実施してください。

1. 使用前の点検事項

- ① 標準付属品及びオプション品
標準付属品及びオプション品に損傷がないか。
- ② フェモラルフック及びフェモラルフックサポート
フェモラルフック及びフェモラルフックサポートは滅菌された状態か。
- ③ 電源コード及び電源プラグ
電源コードに導線の露出又は電源プラグの破損がないか。
- ④ 電源スイッチ
電源スイッチを押して、操作ボックスのパワーランプが点灯するか。
- ⑤ バッテリー充電
操作ボックスのバッテリー状態表示ランプは緑色に点灯しているか。

取扱説明書を必ずご参照ください。

- ⑥ 操作ボックス及びコントロールパッド
操作ボックス及びコントロールパッドのスイッチを押して、昇降・縦転・横転機能が正常に作動するか。
- ⑦ フェモラルリフトスイッチ及びフットペダル
フェモラルリフトスイッチ及びフットペダルを操作して、フェモラルリフトマウントが正常に作動するか。
- ⑧ キャスター及びブレーキ
4つのキャスターのブレーキは全て正常にロック及び解除が行えるか。

2. 使用後の点検事項

- ① 標準付属品及びオプション品
標準付属品及びオプション品に損傷がないか。
- ② バッテリー充電
操作ボックスのバッテリー状態表示ランプは緑色に点灯しているか。
- ③ キャスター及びブレーキ
4つのキャスターのブレーキは全て正常にロック及び解除が行えるか。

3. 清掃・消毒の手順

- 3-1 電源を切り、電源コードを医用コンセントから外してください。
- 3-2 使用する消毒剤の表示又は説明書の内容を確認してください。
- 3-3 血液・薬剤・汚物等の汚れを水で拭き取り、消毒剤を浸したガーゼ等で清拭してください。

4. 滅菌（フェモラルフック及びフェモラルフックサポート）

フェモラルフック及びフェモラルフックサポートは未滅菌品です。使用に関しては必ず洗浄し、適切に機能することが確認された高圧蒸気滅菌による標準的滅菌条件又は、医療機関で滅菌バリデーションが検証され、有効性が立証された滅菌条件により滅菌を行ってください。

○標準的滅菌条件の例：高圧蒸気滅菌（日本薬局方）

滅菌温度	保持時間
115-118℃	30分
121-124℃	15分
126-129℃	10分

5. 故障時のお願い

本装置が故障したと思われるときは下記の処置を行い、ご購入店又は弊社に連絡してください。

- 5-1 電源を切り、電源コードを医用コンセントから外してください。
- 5-2 本装置に「故障」・「使用禁止」・「修理必要・点検必要」等の適切な表示をしてください。

<業者による保守点検事項>

本装置を安全に使用するために、弊社及び弊社が認めた業者による年1回の定期点検を実施してください。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能の低下を招くおそれがあります。
定期点検を希望される場合は、ご購入店又は弊社にお問い合わせください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社

TEL 03(3815)3096

製造業者：ミズホ オーソペディック システムズ社

MIZUHO ORTHOPEDIC SYSTEMS, INC.

アメリカ合衆国

【保証期間に係る事項】

本品は納品/設置してから1年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な

使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。

取扱説明書を必ずご参照ください。