

器01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ (70469000)

足部支持器

**

【警告】

患者の任意の体位を確保するためにアクセサリで支持するときは常に患者の状態を監視すること。[長時間の体位保持は神経麻痺や褥瘡の原因となります。]


*

【禁忌・禁止】


他社製手術台では使用しないこと。[他社製手術台での使用可能は確認していません。]

**【形状・構造及び原理等】

1. 外観図

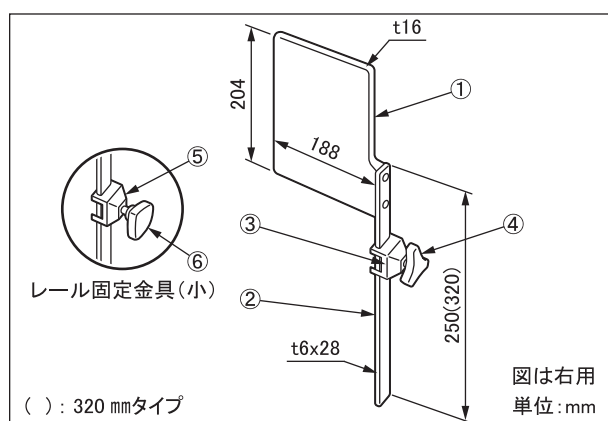

足部支持器および固定金具

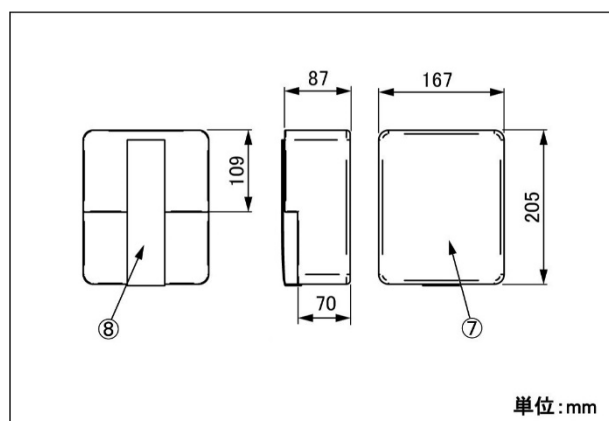

マットレス

商品コード	商品名	構成
08-071-00	足部支持器 固定金具付 2 個組	①② ⑤⑥ (注3)
08-071-01	足部支持器 250mmタイプ 本体のみ	①②
08-071-02	足部支持器 320mmタイプ (固定金具付) 2 個組	①② ⑤⑥ (注3)
08-071-03	足部支持器 320mmタイプ (本体のみ)	①②
08-071-04	足部支持器 320mmタイプ (固定金具小型 Ver.2 付) 2 個組	①② ③④ (注4)
08-111-00	レール固定金具 (小)	⑤⑥ (注5)
08-111-11	レール固定金具 小型 Ver. 2	③④ (注5)
08-117-02	レール固定金具 小 (R 1)	⑤⑥ (注6)
08-117-10	レール固定金具 小型 Ver. 2 (R 1)	③④ (注6)
08-117-12	レール固定金具 小 (R 2)	⑤⑥ (注7)
08-117-13	レール固定金具 小型 Ver. 2 (R 2)	③④ (注7)
08-071-05	ミズホオリジナルマットレス 足部支持器 320mmタイプ 2 個組	⑦⑧

注1: 番号は1. 外観図の番号に対応

注2: 左右各1個で1組

注3: 付属の固定金具は08-111-00

注4: 付属の固定金具は08-111-11

注5・注6・注7: 取付可能な手術台サイドレール寸法が異なる

2. 質量 (1 個当たり)

本体

足部支持器 250mmタイプ: 1.1 kg

足部支持器 320mmタイプ: 1.2 kg

レール固定金具

レール固定金具 (小) (含: R 1・R 2): 0.2 kg

レール固定金具 小型 Ver. 2 (含: R 1・R 2): 0.4 kg

マットレス: 0.2kg

3. 原材料

本体

① 足受板: アルミニウム合金鋳物

② 支柱: ステンレス鋼棒

レール固定金具

③ 固定金具小型 Ver. 2 (含: R 1・R 2): ステンレス鋳鋼品

④ 固定ハンドル小型 Ver. 2 (含: R 1・R 2)

: アルミニウム合金・ステンレス鋼棒

⑤ 固定金具 (小) (含: R 1・R 2): ステンレス鋳鋼品

⑥ 固定ハンドル (小) (含: R 1・R 2)

: プラスチック成形品・ステンレス鋼棒

⑦ マットレス：ウレタンフォーム（外装はポリウレタン）


⑧ 面ファスナー：ナイロン

注：番号は1. 外観図の番号に対応


【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリ。
骨盤低位（頭を上にして傾斜した状態）のポジションで患者がズレ落ちるのを防ぐための器具。患者の足部を支持してズレを防ぐ。


＊ ＊【使用方法等】

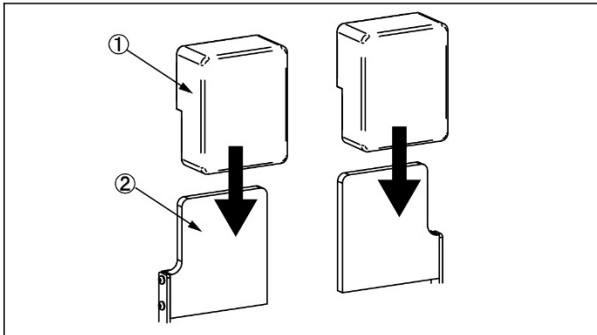

1. マットレス①を足受板②に差し込みます。

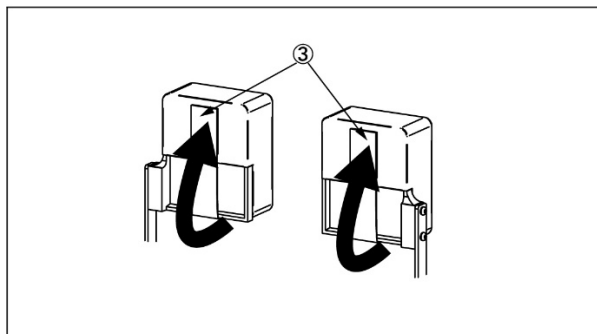

2. マットレス①の下方にある面ファスナー③を下から裏側上方へ廻して固定します。

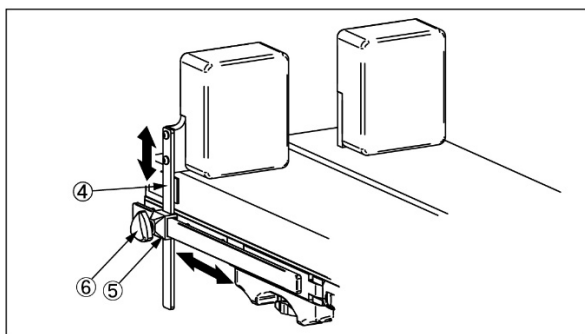

3. 手術台のサイドレールに固定金具⑤を取り付けます。
4. 支柱④を固定金具⑤に差し込み、固定ハンドル⑥を締めます。
5. 患者の体位に合わせて足受板②を動かし位置を調節します。
6. 調整後、固定ハンドル⑥を回して固定金具⑤および支柱④を固定します。
7. 使用後は手術台テーブルが水平であることを確認し、固定ハンドル⑥を緩めて支柱④を抜き取り、固定金具⑤をサイドレールから外します。

＊ ＊【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ① 締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では機器が外れたり、動いたりして患者に障害が起きるおそれがあります。
- ② 衛生のため、患者が本製品に触れる部分には必ず滅菌済ドレープを使用してください。
- ③ 手術台を作動させるときは他のアクセサリやテーブルトップとの接触・干渉に注意してください。
- ④ 左右1組の足部支持器で患者を支持してください。

2. 相互作用

〔併用注意〕

分離式手術台で使用する場合は、分離時にストレッチャーレール受けに接触しない位置まで移動してください。接触するとテーブルトップの分離ができず、アクセサリが破損するおそれがあります。

＊ ＊【保管方法及び有効期間等】

1. 保管の条件

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管してください。

2. 耐用期間

適切な保守点検及び適切な保管をした場合：7年（注）

〔自己認証による〕

注：耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

【保守・点検に係る事項】

<使用者による保守点検事項>

1. 使用前・使用後の点検

使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。

2. 清掃・消毒

血液・薬剤・汚染等の汚れは水で拭き取り、さらに消毒用アルコール・ガーゼで清拭してください。

3. 故障時のお願い

本装置が故障したと思われるときは、本装置に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示し、ご購入店又は弊社に連絡してください。

<業者による保守点検事項>

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社

TEL 03(3815)3097

製造業者：ミズホ株式会社 千葉工場

【保証期間に係わる事項】

本品は納品/設置してから1年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。