

器 0 1 手術台及び治療台  
一般医療機器 手術台アクセサリ （70469000）

レール固定金具 マルチタイプ


【警告】

患者の任意の体位を確保するために手術台アクセサリで支持するときは常に患者の状態を監視すること。  
[長時間の体位は神経麻痺や褥瘡の原因となる場合がある]

【禁忌・禁止】

1. 他社製手術台では使用しないこと。[他社製手術台での使用可能を確認していません]
2. 固定ハンドルが緩んだ状態で使用しないこと。  
[別に取り付けた手術台アクセサリが動いて患者に障害が起きるおそれがある]

【形状・構造及び原理等】

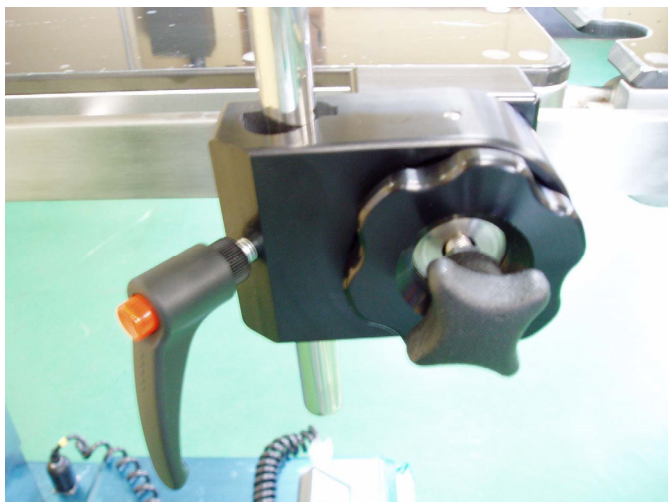

| 商品コード     | 商品名            |
|-----------|----------------|
| 08-110-10 | レール固定金具 マルチタイプ |

1. 質量

1.2 kg


2. 材質

アルミニウム合金 ステンレス鋼

※【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリであり、手術台のサイドレールに取り付けて、別の手術台アクセサリを取り付ける。

※【使用方法等】

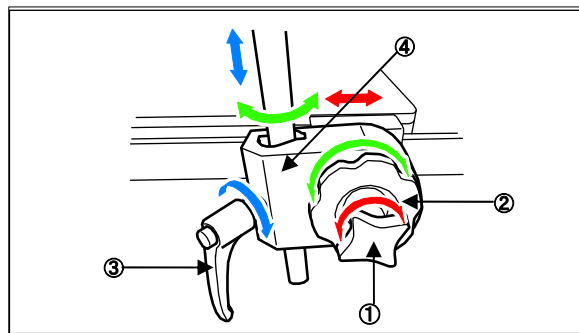

- ①ハンドル A      ②ハンドル B  
③ハンドル C      ④本体

1. ハンドルA①により本体を手術台のサイドレールに取り付ける。
2. ハンドルB②により本体の角度を調節する。
3. ハンドルC③により手術台のアクセサリを取り付ける。
4. 各ハンドルを締め固定する。

レール固定金具に取り付けた手術台アクセサリの詳細については、各手術台アクセサリの添付文書または取扱説明書を参照してください。

【使用上の注意】

※ 1. 警告

締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では機器が外れたり、動いたりして患者に障害が起きるおそれがあります。

2. 重要な基本的注意

手術台を作動するときは他のアクセサリやテーブルトップとの接触・干渉に注意して下さい。

3. 相互作用

[併用注意]

分離式手術台での使用は分離時にストレッチャーレール受けに接触しない位置まで移動させること。接触するとテーブルトップの分離ができず併用機器及び本品が破損するおそれがあります。

※【保管方法及び有効期間等】

※ 1. 保管方法

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管して下さい。

※ 2. 耐用期間

適切な保守点検及び適切な保管をした場合：7年（※）[自己認証による]

※耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

【保守・点検に係る事項】

\* ＜使用者による保守点検事項＞

\* 1. 使用前・使用後の点検

使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認して下さい。

\* 2. 清掃・消毒

血液・薬剤・汚染等の汚れは水で拭き取り、さらに消毒用アルコール・ガーゼで清拭して下さい。

\* 3. 故障時のお願い

本装置が故障したと思われるときは、本装置に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

\* ＜業者による保守点検事項＞

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

\* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社

TEL 03(3815)3097

製造業者：ミズホ株式会社 千葉工場

【保証期間に係る事項】

本品は納品/設置してから 1 年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。