

器 0 1 手術台及び治療台
一般医療機器 汎用電動式手術台 (36867020)

特定保守管理医療機器

電動油圧手術台 MOT-3602

※※

【警告】

＜使用方法＞

1. 患者の任意の体位を確保するためにテーブルトップを屈折又はアクセサリで支持するときは、常に患者の状態を監視すること。[長時間の体位保持は神経麻痺や褥瘡の原因になります。]
2. 他社製アクセサリ等を装着して使用するときは、ご購入店又は弊社に相談すること。[手術台のサイドレール又は差込孔寸法が異なると装着できません。]

※※

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

1. 手術台の移動及び設置
 - 1-1 凹凸のある床面に設置しないこと。[転倒又はけがをすることがあります。]
 - 1-2 位置を高くするために、手術台の下に当て物をいれないこと。[転倒又はけがをすることがあります。]
 - 1-3 患者を乗せた状態でブレーキ解除しないこと。[患者が転落するおそれがあります。]
 - 1-4 着脱可能な箇所(【形状・構造及び原理等】6. 機能を参照)を引いて手術台を移動しないこと。[落下して破損又はけがをすることがあります。]
2. 電源コードの取扱い

電源コードの上に重量物を置いたり、キャスター付の機器で乗り越えたりしないこと。[電源コードが破損して火災又は感電事故を起こすおそれがあります。]
3. テーブルトップの手動操作部
 - 3-1 頭部板の上に乗ったり座ったりしないこと。[転倒又は破損するおそれがあります。]
 - 3-2 患者をベッドから移し替えるとき、又は患者の体位を変えるときは、頭部板に無理な力を加えないこと。[頭部板が変形又は破損することがあります。]
4. 手術台に患者を乗せるとき



頭部側と脚部側を逆にして患者を乗せないこと。[転倒又は脚板が破損するおそれがあります。]

※※


【形状・構造及び原理等】

1. 外観図

①手術台②付属品③オプション

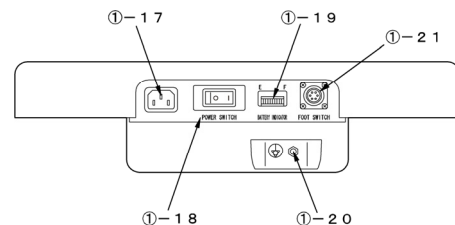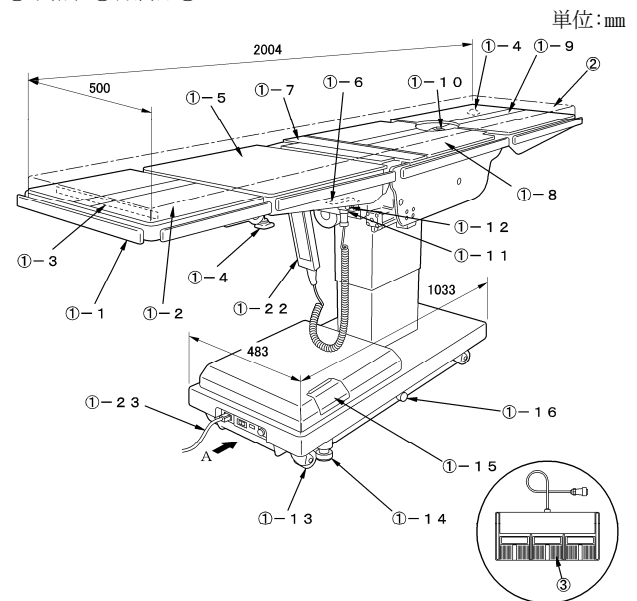

A 矢視

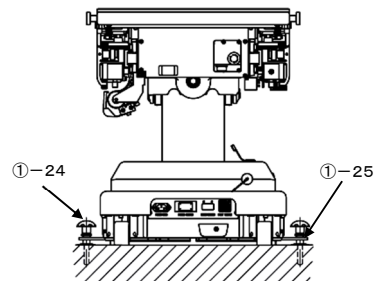

B 図 (18-100-11: TYPE-G)

取扱説明書を必ずご参照ください。

①-1	サイドレール	①-15	予備スイッチ
①-2	頭部板	①-16	非常用ブレーキ解除ハンドル
①-3	頭部板屈折レバー	①-17	電源用コネクタ
①-4	頭部板固定ハンドル	①-18	電源スイッチ
①-5	背板	①-19	バッテリーインジケータ
①-6	背板着脱レバー	①-20	等電位化端子
①-7	挙上器	①-21	フットスイッチコネクタ
①-8	腰板	①-22	操作ボックス
①-9	脚板	①-23	電源コード
①-10	脚板着脱レバー	①-24	固定ノブネジ (注)
①-11	操作ボックスコネクタ	①-25	アンカー固定ステー (注)
①-12	緊急停止スイッチ	②	マットレス
①-13	キャスター	③	フットスイッチ
①-14	ブレーキ		

注：18-100-11:TYPE-G

商品コード	商品名
18-100-10	電動油圧手術台MOT-3602
18-100-11	電動油圧手術台MOT-3602 TYPE-G
18-443-25	3600、6701 シリーズ用フットスイッチ (国内、アジア仕様)
08-055-21	ミズボオリジナルマット (3602 挙上器部用)

2. 質量

本体：358kg

3. 電気的定格

定格電源電圧：AC100-240V
 定格電源周波数：50-60Hz
 電源入力：400VA
 バッテリー電源電圧：DC24V
 バッテリー連続作動時間：充電満了後、約 60 分 (注)
 バッテリー充電時間：最長 24 時間 (注)
 注：使用条件により変わります。

4. 機器の分類 (JIS T 0601-1:2017)

電撃に対する保護の形式による分類：クラス I 機器
 電撃に対する保護の程度による装着部の分類：B 形装着部
 水の有害な侵入に対する保護の程度の分類：IPX4
 本機は EMC 規格 JIS T 0601-1-2：2018 に適合。

5. 使用環境

周囲温度範囲：10℃～40℃
 相対湿度範囲：30%～75%
 気圧範囲：700hPa～1060hPa

6. 機能

電動

① 昇降範囲	最高位	：1100 mm
	最低位	：620 mm
② 縦転角度	頭上がり	：30°
	頭下がり	：30°
③ 横転角度	右下がり	：30°
	左下がり	：30°
④ 背板屈折角度	上がり	：90°
	下がり	：40°
⑤ 脚板屈折角度	上がり	：15°
	下がり	：100°
⑥ 挙上器	上がり	：150 mm
⑦ スライド量	頭方向	：245 mm
	脚方向	：335 mm

⑧ フレックス	フレックス／リフレックス
⑨ 自動水平復帰	縦転／横転／背板屈折／脚板屈折／フレックス／ビーチチェア／挙上器固定／解除 ビーチチェア 操作ボックス／予備スイッチ／緊急停止スイッチ／フットスイッチ (オプション)
⑩ ブレーキ	
⑪ その他の電動機能	
⑫ 操作機器	

手動

① 頭部板屈折角度	上がり：60° 下がり：90°
② 着脱可能箇所	頭部板／背板／脚板
③ その他の手動機能	非常用ブレーキ解除ハンドル 手術台固定 (18-100-11:TYPE-G)

7. 作動原理

本機は電動油圧手術台であり、電気的に制御するポンプモーター・バルブ及びシリンダー・オイルタンク等の油圧機器で構成されています。

操作ボックスを操作するとポンプモーターが作動し、オイルタンクの作動油がバルブを介してシリンダーへ送られます。シリンダーへ送られた作動油の圧力によりシリンダーが伸縮し、シリンダーと連動している手術台の機械部分が作動することで、手術台の機能が作動します。

シリンダーの作動が限界に達すると、シリンダーの動きは停止して手術台の作動は停止します。

**【使用目的又は効果】

手術が必要な部位の大部分に適応するよう改良された完全移動型手術台 (汎用) であり、コンセント電源式・電池電源式の併用式のものであります。

**【使用方法等】

詳細な使用方法是取扱説明書をご参照ください。

1. 電源の入れかた (使用前)

1-1 電源コードを電源用コネクタと医用コンセントに差し込みます。

1-2 手術台本体の電源スイッチを ON にします。電源スイッチ (緑) とバッテリーインジケータが点灯します。


1-3 操作ボックスの ON/OFF スwitch を押します。操作ボックスのパワーランプ (緑) が点灯して電源が入ります。

(注) 消費電力軽減のため ON/OFF 機能が作動し、電源が OFF になっている場合は、電源を入れてください。

取扱説明書を必ずご参照ください。

2. 操作ボックスの使い方（使用中）

Eスイッチを押しながら機能スイッチを押すことで、各機能が作動します。スイッチを押している間は機能が作動し、離すと停止します。各機能は最大限に達すると作動が停止します。

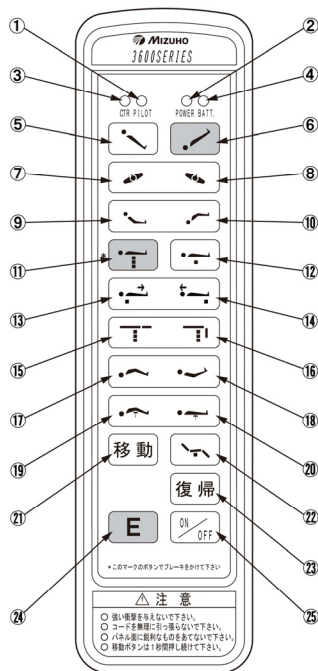

- ① パイロットランプ
- ② パワーランプ
- ③ CTR ランプ
- ④ バッテリーランプ
- ⑤ 縦転 : 頭上がり
- ⑥ 縦転 : 頭下がり
- ⑦ 横転 : 左下がり
- ⑧ 横転 : 右下がり
- ⑨ 背板屈折 : 上がり
- ⑩ 背板屈折 : 下がり
- ⑪ 昇降 : 上昇
(手術台固定)
- ⑫ 昇降 : 下降
- ⑬ スライド : 脚方向
- ⑭ スライド : 頭方向
- ⑮ 脚板屈折 : 上がり
- ⑯ 脚板屈折 : 下がり
- ⑰ フレックス
- ⑱ リフレックス
- ⑲ 挙上器 : 上昇
- ⑳ 挙上器 : 下降
- ㉑ ブレーキ解除
- ㉒ ビーチチェア
- ㉓ 水平復帰
- ㉔ E スイッチ
- ㉕ ON/OFF スイッチ
(バッテリー電源操作)

3. 電源の切りかた（使用后）

3-1 電源が入っている状態で、操作ボックスの電源 ON/OFF スイッチを押します。操作ボックスのパワーランプ（緑）が消灯します。

3-2 手術台本体の電源スイッチを OFF にします。電源スイッチ（緑）とバッテリーインジケータが消灯して電源が切れます。

4. バッテリー充電のしかた


4-1 電源コードを電源用コネクタと医用コンセントに差し込みます。

4-2 電源スイッチを入れると充電が始まります。充電中はバッテリーインジケータ（橙）が順に点灯します。

4-3 バッテリーインジケータの橙と緑が順に点灯すると充電は完了です。

5. フットスイッチの使い方（オプション）

機能スイッチを押す（踏み）ことで、各機能が作動します。スイッチを押している（踏んでいる）間は機能が作動し、離すと停止します。各機能は最大限に達すると作動が停止します。

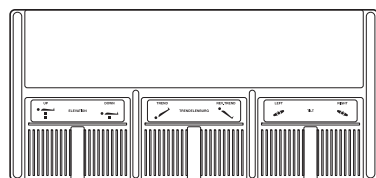

- ① 昇降 : 上昇
- ② 昇降 : 下降
- ③ 縦転 : 頭下がり
- ④ 縦転 : 頭上がり
- ⑤ 横転 : 左下がり
- ⑥ 横転 : 右下がり

※【使用上の注意】

詳細な注意事項は取扱説明書をご参照ください。

重要な基本的注意

- ① 締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では機器が動いたり、外れたりして、患者に障害がおきることがあります。
- ② 併用する機器やアクセサリを使用するときは、当該機器の添付文書及び取扱説明書を読んで影響を確認してください。誤った使用法は患者・操作者及び手術台・併用する機器やアクセサリに悪影響を及ぼします。
- ③ 衛生のため、患者が手術台に触れる部分には必ず滅菌済ドレープを使用してください。
- ④ 併用する他の医用電気機器から電磁的影響による誤作動が発生することがあります。
- ⑤ 手術台の操作中に可動部の隙間に手を入れないでください。けがをするおそれがあります。
- ⑥ 非常用ブレーキ解除ハンドルを回したら、必ず下記の操作を行ってください。手術台を固定できません。
⑥-1 非常用ブレーキ解除ハンドルを LOCK 方向に回します。
⑥-2 操作ボックスでブレーキ解除の操作を実施してください。
- ⑦ 非常用ブレーキ解除ハンドルを UNLOCK の状態で、縦転・横転などの機能を操作しないでください。テーブルトップが作動して、患者が転落するおそれがあります。
- ⑧ 使用条件によりバッテリーの寿命は大きく変わります。短時間使用で頻繁に充電が繰り返されるとバッテリーの劣化が早まる可能性がありますので週 1 回充電（週末の充電）を行ってください。

充電満了まで最長で 24 時間程度掛かります。

- ⑨ 手術台使用後にバッテリーインジケータが赤のみ点灯している場合は、直ちに充電を行ってください。

充電不足になると AC 電源でご使用は頂けますが、バッテリーでのご使用はできなくなります。

※【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

周囲温度範囲 : -10℃～50℃

相対湿度範囲 : 10%～85%（結露なし）

気圧範囲 : 700hPa～1060hPa

2. 耐用期間

指定した保守点検及び適切な保管をした場合：10 年

[自己認証（弊社データ）による]

注：耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品（マットレスを含む）の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。但し、一般市販品の部品については、製造元の事情（製造期間終了・製造中止等）により、耐用期間内であっても部品供給による交換ができなくなる場合があります。

※【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞

使用者は手術台の使用前・使用後に必ず下記点検事項及び清掃・消毒を実施してください。

1. 使用前の点検事項

- ① マットレス
すべてのマットレスに破損がないか。
- ② テーブル板
すべてのテーブル板に破損がないか。
- ③ 油漏れ
床又は手術台に作動油が付着していないか。
- ④ 電源コード及び電源プラグ
電源コード導線の露出又は電源プラグの破損がないか。
- ⑤ バッテリー充電状態
バッテリーは充電された状態か。

取扱説明書を必ずご参照ください。

- ⑥ 電源スイッチ
電源スイッチをONにして、操作ボックスのパワーランプが点灯するか。
- ⑦ 操作ボックス及び予備スイッチ
操作ボックスのスイッチ及び予備スイッチを押して、すべての機能が正常に作動するか。
- ⑧ テーブルトップのガタ
背板両端を持って上下左右に揺すったときにガタがないか。

2. 使用後の点検事項

- ① マットレス
すべてのマットレスに破損又は汚れがないか。
- ② テーブル板
すべてのテーブル板に破損又は汚れがないか。
- ③ 油漏れ
床又は手術台に作動油が付着していないか。

3. 清掃・消毒の手順

- 3-1 電源を切り、電源コードを医用コンセントから外してください。
- 3-2 使用する消毒剤の表示又は説明書の内容を確認してください。
- 3-3 血液・薬剤・汚物等の汚れを水で拭き取り、消毒剤を浸したガーゼ等で清拭してください。

4. 故障時のお願い

本装置が故障したと思われるときは下記の処置を行い、ご購入店又は弊社に連絡してください。

- 4-1 電源を切り、電源コードを医用コンセントから外してください。
- 4-2 本装置に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をしてください。

<業者による保守点検事項>

本装置を安全に使用するために、弊社及び弊社が認めた業者による年1回の定期点検を実施してください。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能の低下を招くおそれがあります。
定期点検を希望される場合はご購入店又は弊社にお問い合わせください。

<定期交換部品>

部品名	交換時期(注)
バッテリー	2年
操作ボックス	4～6年
キャスター	5～7年
ブレーキゴム	3～5年
電源コード	5～7年

注:上記は目安の期間です。
使用条件により交換時期が変わります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社
TEL 03(3815)3097

製造業者：ミズホ株式会社千葉工場

保証期間に係る事項

本品は納品/設置してから1年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。

取扱説明書を必ずご参照ください。