

器01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ (70469000)



ダブルアクシスアームボード

※

【警告】

＜使用方法＞


1. 患者の任意の体位を確保するために手術台アクセサリで支持するときは常に患者の状態を監視すること。
[長時間の体位は神経麻痺や褥瘡の原因になります。]
2. 側臥位での使用は下側になる腕を上肢台に固定すること。
[宙にさらした状態は患者に障害が起きる事があります。]

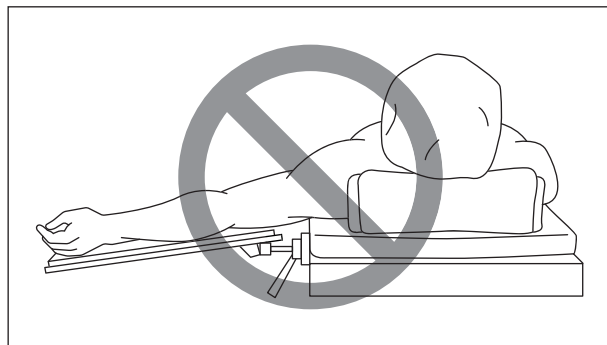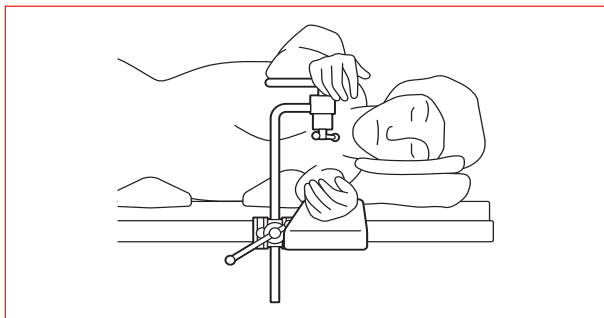

上面が手術台の面より下がったら使用しないこと。


※ 【形状・構造及び原理等】

形状・構造

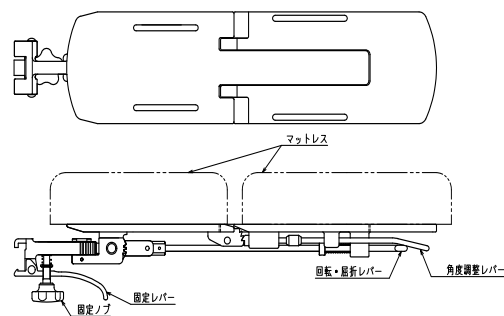

質量: 3.2kg

付属品: マットレス

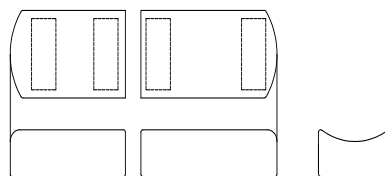

※

【禁忌・禁止】

＜併用医療機器＞


- ・ 弊社製手術台以外では使用しないこと。
[手術台のサイドレール寸法が異なるため固定できないことがあります。]

＜使用方法＞

- ・ 下記の状態で体位を設定しないこと。
[上腕神経麻痺の原因となります。]



手術台に対して直角以上に開かないこと。

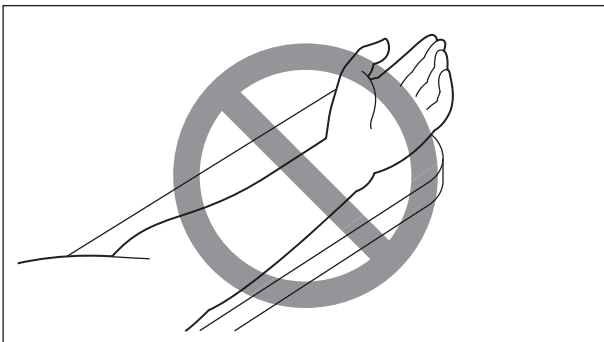

腕を上向きにしないこと。(側臥位を除く)

商品コード	商品名
08-065-51	Double Axis Armboard (本体)
08-065-52	Double Axis Armboard マットレス 厚さ 60mm
08-065-53	Double Axis Armboard マットレス 厚さ 100mm


原材料: ステンレス鋼、アルミ合金、樹脂

【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリ。

【使用方法等】

1. 取り付け

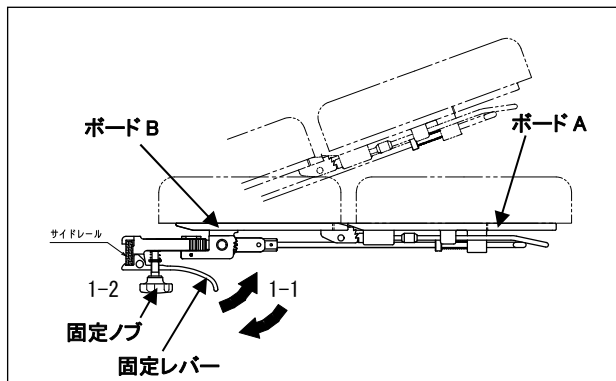


1-1 ボードBの下側を支え上肢台を傾けた状態でサイドレールに掛けた後、端を下げて取り付けてください。(自動的に固定レバーが下がります)又は、固定レバーを上げながら取り付けてください。

※ 取り付けられない場合は、固定ノブを止まるまで緩め、再度行ってください。

1-2 固定ノブを締め付け、サイドレールに固定してください。
※ 横滑り等、動かないことを確認してください。


2. 取り外し

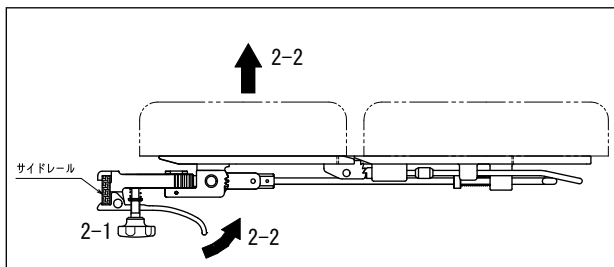

2-1 固定ノブを止まるまで緩めてください。


2-2 固定レバーを上げながら上肢台のボードB下側を持ち上げサイドレールから外してください。

3. 回転

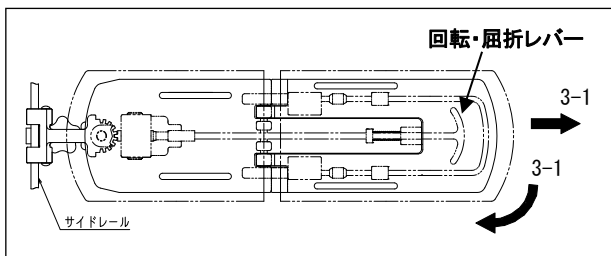


3-1 回転・屈折レバーを引ながら左右に90度、回転します。

4. 屈折-1

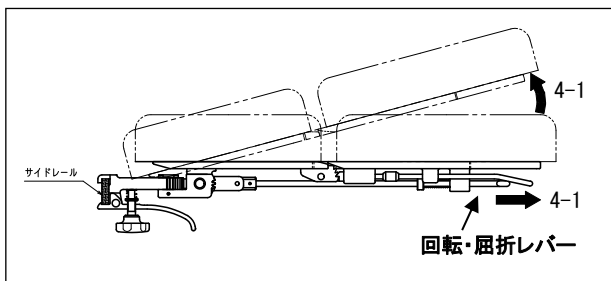

4-1 回転・屈折レバーを引ながら15度、屈折します。

5. 屈折-2 (ボードA)

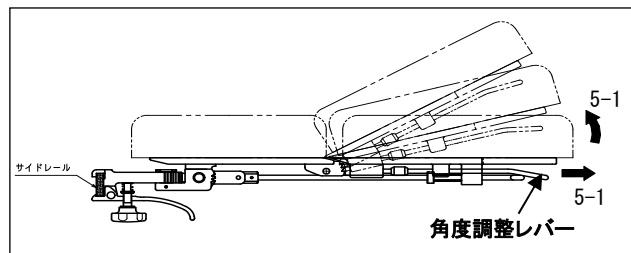

5-1 角度調整レバーを引ながらボードAのみ15度と30度、屈折します。

** 【使用上の注意】

* 1. 重要な基本的注意

1-1 固定レバーが手術台レールに固定されているか必ず確認してください。スプリングが破損した状態では固定レバーが外れたり動いたりして、患者に傷害がおきるおそれがあります。

1-2 衛生のため、患者が本製品に触れる部分には必ず滅菌済ドレープを使用してください。

1-3 手術台を動作するときは他の手術台アクセサリやテーブルトップとの接触・干渉に注意してください。

1-4 回転・屈折の角度調整後は、必ず回転・屈折レバー先端の爪とボード下のギヤが確実に噛み合っていることを確認してください。

1-5 手術台を縦転ポジションで使用する場合上肢台が滑って動く可能性があるため、固定ノブでサイドレールにしっかり固定し、手術中は十分注意して患者の状態を監視してください。

1-6 許容荷重(15kg)を超える荷重を加えないでください。

1-7 衝撃的な負荷が加わらないように注意してください。

2. 相互作用

【併用注意】 (併用に注意すること)

分離式手術台での使用は分離時にストレッチャーレール受けに接触しない位置まで移動させてください。接触するとテーブルトップの分離ができず手術台アクセサリが破損することがあります。

** 【保管方法及び有効期間等】

* 1. 保管方法

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管してください。

2. 耐用期間

指定した保守点検及び適切な保管をした場合：7年[自己認証(自社データ)による]

注：耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品(マットを含む)の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

** 【保守・点検に係る事項】

1. 使用前・使用後の点検

使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。

2. 清掃・消毒

血液・薬剤・汚染等の汚れは水で拭き取り、さらに消毒用アルコール・ガーゼで清拭してください。

3. 故障時のお願い

本品が故障したと思われるときは、本装置に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

ミズホ株式会社

TEL 03-3815-3097

製造業者

ミズホ株式会社 五泉工場

* 保証期間に係る事項

本品は納品/設置してから1年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。