

類別: 機械器具 (01) 手術台及び治療台
一般医療機器 一般的名称: 手術台アクセサリ JMDN コード: 70469000


販売名: サイドレール取付ハンドル

【禁忌・禁止】

他社製手術台では使用しないこと。〔他社製手術台での使用可能は確認していません。〕

【形状・構造及び原理等】

1. 外観図

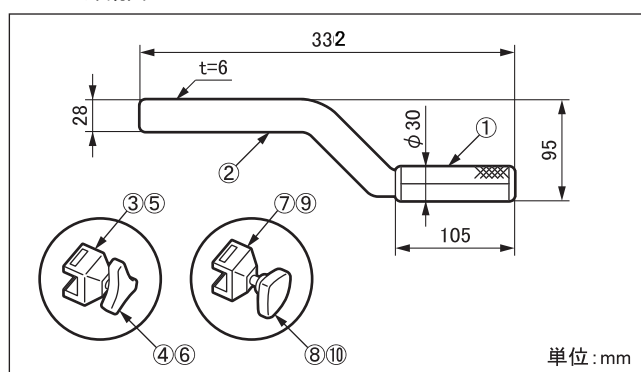

商品コード	商品名
08-114-00-UE	サイドレール取付ハンドル (2個組、固定金具付)
08-117-02	レール固定金具 小 (R1)
08-117-10	レール固定金具 小型 Ver.2 (R1)
08-117-12	レール固定金具 小 (R2)
08-117-13	レール固定金具 小型 Ver.2 (R2)

注: レール固定金具 (R1)・(R2) は取付可能な手術台サイドレール寸法が異なる

2. 質量

本体: 0.5 kg/個 レール固定金具 小: 0.2 kg/個

レール固定金具 小型 Ver.2: 0.4 kg/個

3. 材質


- ① ハンドル: ポリ塩化ビニル
- ② 支柱: ステンレス鋼棒
- ③ 固定金具 小型 Ver.2 (R1): ステンレス鋳鋼品
- ④ 固定ハンドル 小型 Ver.2 (R1): アルミニウム合金及びステンレス鋼棒
- ⑤ 固定金具 小型 Ver.2 (R2): ステンレス鋳鋼品
- ⑥ 固定ハンドル 小型 Ver.2 (R2): アルミニウム合金及びステンレス鋼棒
- ⑦ 固定金具 小 (R1): ステンレス鋳鋼品
- ⑧ 固定ハンドル: 小 (R1): プラスチック成形品及びステンレス鋼棒
- ⑨ 固定金具 小 (R2): ステンレス鋳鋼品
- ⑩ 固定ハンドル: 小 (R1): プラスチック成形品及びステンレス鋼棒

注: 番号は1. 外観図の番号に対応

【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリ。固定金具を介して、手術台移動時に取っ手として使用。

【使用方法等】

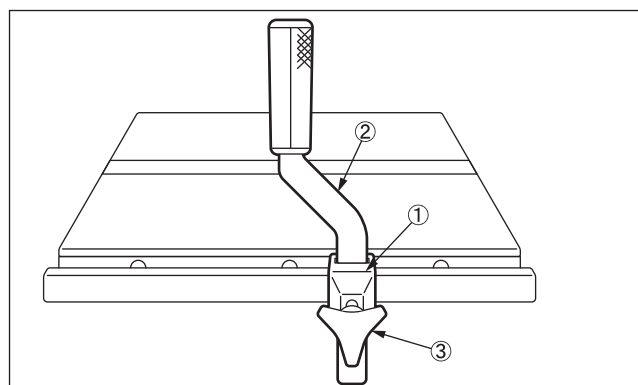

- 手術台のサイドレールに固定金具①を取り付けます。
- 固定金具①に取付ハンドル③を取り付けます。
- 取付ハンドル③で位置を調整して、固定金具①の固定ハンドル②を締めます。

注: 図はレール固定金具 小 (R1)

【使用上の注意】

1. 警告

締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では機器が外れたり、動いたりして患者に障害がおきるおそれがあります。

2. 重要な基本的注意

手術台を作動するときは他の手術台アクセサリやテーブルトップとの接触・干渉に注意してください。

3. 相互作用

〔併用注意〕

分離式手術台での使用では、分離／装着は必ず腰部延長ボードを取り外して行うこと。取付けた状態では、分離／装着ができない。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管してください。

2. 耐用期間

適切な保守点検及び適切な保管をした場合: 7年 (注)

〔自己認証による〕

注: 耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞

1. 使用前・使用後の点検

使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認して下さい。

2. 清掃・消毒

血液・薬剤・汚染等の汚れは水で拭き取り、さらに消毒用アルコール・ガーゼで清拭してください。

3. 故障時のお願い

本装置が故障したと思われるときは、本装置に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示し、ご購入店又は弊社に連絡してください。

＜業者による保守点検事項＞

弊社及び弊社が認めた修理業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社

TEL 03(3815)3097

製造業者：ミズホ株式会社千葉工場

【保証期間に係る事項】

本品は納品/設置してから 1 年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。