

器 1 2 理学診療用器具
一般医療機器 再使用可能な止血帯 (17230000)

MT-900シリーズ用カフ

** 【禁忌・禁止】

<使用方法>

1. 使用前に外観を確認し、異常がある場合は使用しないこと。[エア漏れ等で正常な止血ができない可能性があります。]
2. 四肢の止血以外に使用しないこと。[目的外使用となります。]
3. タニケット本体及び関連製品は弊社指定のものを使用すること。[エア漏れ等で正常な止血ができない可能性があります。]
4. 過剰な圧力で使用しないこと。[過剰な圧力での止血は、組織等の損傷の原因となる可能性があります。]

** 【形状・構造及び原理等】


* 1. 外観図

シングルカフ


ダブルカフ



シングルカフ

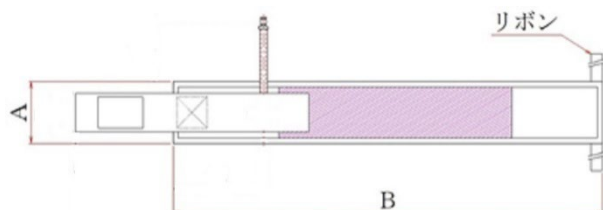

ダブルカフ

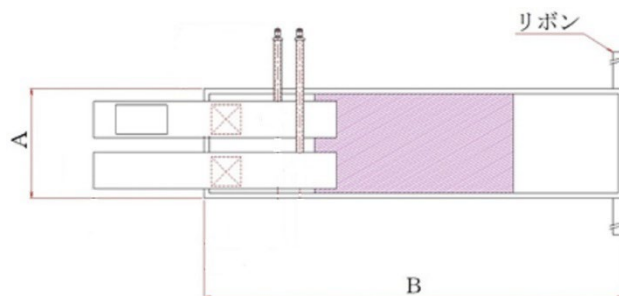

単位 (mm)

商品コード	商品名	外形寸法 (幅A×長さB)	適応 周径	構成
01-448-01	MT-900シリーズ用 シングルカフNo. 1 50×260mm	50×260	100 ～ 140	①② ④⑤
01-448-02	MT-900シリーズ用 シングルカフNo. 2 50×320mm	50×320	130 ～ 190	①② ④⑤
01-448-03	MT-900シリーズ用 シングルカフNo. 3 80×440mm	80×440	190 ～ 260	① ～⑤
01-448-04	MT-900シリーズ用 シングルカフNo. 4 80×550mm	80×550	250 ～ 360	① ～⑤
01-448-05	MT-900シリーズ用 シングルカフNo. 5 80×720mm	80×720	350 ～ 490	① ～⑤
01-448-06	MT-900シリーズ用 シングルカフNo. 6 105×570mm	105×570	250 ～ 350	① ～⑤
01-448-07	MT-900シリーズ用 シングルカフNo. 7 105×750mm	105×750	350 ～ 500	① ～⑤
01-448-08	MT-900シリーズ用 シングルカフNo. 8 105×1050mm	105×1050	500 ～ 700	① ～⑤
01-448-09	MT-900シリーズ用 シングルカフNo. 9 105×1350mm	105×1350	700 ～ 980	① ～⑤
01-448-10	MT-900シリーズ用 ダブルカフNo. 10 150×550mm	150×550	250 ～ 360	① ～⑤
01-448-11	MT-900シリーズ用 ダブルカフNo. 11 150×720mm	150×720	350 ～ 490	① ～⑤
01-448-12	MT-900シリーズ用 ダブルカフNo. 12 200×1000mm	200×1000	500 ～ 700	① ～⑤

取扱説明書を必ずご参照ください。

商品コード	商品名	外形寸法 (幅A×長さB)	適応 周径	構成
01-448-13	MT-900シリーズ用 ダブルカフNo. 13 100×260mm	100×260	100 ～ 140	①② ④⑤
01-448-14	MT-900シリーズ用 ダブルカフNo. 14 100×320mm	100×320	130 ～ 190	①② ④⑤

注 1: 番号は1. 外観図の番号に対応

注 2: 上記カフにはOリング (5個) (商品コード:P01-447-20) が **【保守・点検に係る事項】
附属しております。

2. 原材料

- ① 内袋 : ポリウレタン
② オス・コネクタ : 合成樹脂
③ 芯板 : 合成樹脂
④ 布袋 : 綿
⑤ Oリング : 合成ゴム

注: 番号は1. 外観図の番号に対応。

3. 作動原理

四肢の中枢端に巻き付けたカフの内袋にタニケット本体から圧縮空気を送り、膨らんだカフの圧力によって血管を圧迫し、止血を行います。芯板は、カフが外側へ膨らむのを防止します。

* 【使用目的又は効果】

バンド状の用具で、上下肢（腕又は脚）に装着して、循環の抑制及び遠位部への正常血流又は遠位部からの正常血流を遮断するものをいいます。加圧を調節する止血器とともに用います。

* 【使用方法等】

詳細な使用方法は、取扱説明書をご参照ください。

1. 使用方法

- 1-1 患者及び術式に適した長さや幅のカフを選択します。
1-2 上肢下肢とも中枢端に皮下静脈の怒張をきたさない程度に密着させて巻き付けます。
(巻き付けが強すぎても弱すぎても止血効果を減少させるおそれがあります。)
1-3 専用のカフホースを使用してタニケット本体及び関連製品と接続します。
1-4 使用後は、カフ内に圧力が残っていないことを確認して外します。

2. 使用可能な医療機器

販売名: 電動式デジタルエアータニケット MT-960
製造販売届出番号: 13B1X00306N10295
販売名: 電動式デジタルエアータニケット MT-970
製造販売届出番号: 13B1X00306N10296
販売名: デジタルエアータニケット MT-SS
製造販売届出番号: 13B1X00306N10349

* 【使用上の注意】

詳細な注意事項は取扱説明書をご参照ください。

重要な基本的注意

- 厚めの下敷きは止血効果を減衰させることがあります。
- イソジン等の薬液が付着し、布袋が硬くなったカフの使用は止血不良の原因となります。普段の手入れをお願いします。
(保守・点検に係る事項を参照ください)
- 使用前にカフ、カフホース、タニケット本体の接続を再確認してください。
- 使用中はチューブ類の折れ曲がり注意到意してください。
- 使用するタニケットの取扱説明書を必ず参照してください。

* 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 1-1 水のかからない場所に保管してください。
1-2 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないでください。

1-3 適応周径を参照して、丸めて保管してください。折り曲げると芯板を破損する恐れがあります。

2. 耐用期間

指定した保守点検及び適切な保管をした場合: 2年(注)
[自己認証(弊社データ)による]

注: 耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

<使用者による保守点検事項>


1. 使用前・使用後の点検

1-1 使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。

1-2 Oリングの劣化は空気漏れの原因となります。ひび割れ等の劣化がないことを確認してください。


1-3 ひび割れ等で劣化したOリングは、下図を参考にして交換してください。

小型の(一)ドライバ等、先端が細く平らな物でOリングを取り外します。新しいOリングを溝に引っ掛け、指で押さえながら他方を引き延ばす感じで広げて取り付けます。怪我等しないよう十分に注意して行ってください。

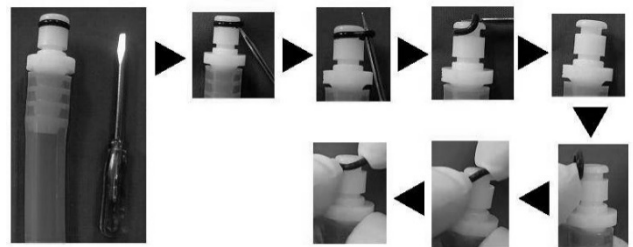

2. 清掃・消毒

- 2-1 芯板と内袋の汚れは、消毒用アルコールで拭き取ってください。
内袋の中に水等が入らないように十分に注意してください。
2-2 布袋の汚れは、中性洗剤で手洗いし、真水でよくすすいでから乾燥させてください。洗濯機をご使用の際はネット等に入れてください。また、色落ちすることがありますので注意してください。
2-3 手入れが終わったカフは、下図を参考にして正しく組み立ててください。間違った組み立ては、止血不良の原因になります。

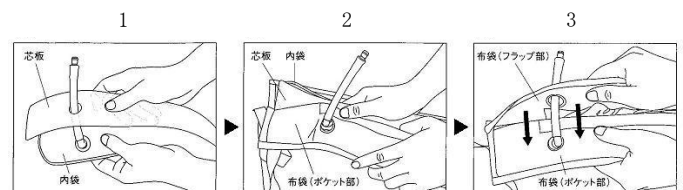

- 1 内袋に装着されたホースを芯板の穴に通します。
 - 2 内袋と芯板を重ね合わせ、布袋の穴にホースを通して、布袋のポケット部に入れます。
 - 3 布袋のフラップ部(蓋)の穴にホースを通し、フラップ部を閉じます。
- 2-4 カフを滅菌する場合は、エチレンオキシドガス滅菌による標準的滅菌条件又は医療機関で検証された滅菌条件で行ってください。
高圧蒸気滅菌及び過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌は行わないでください。

3. 故障時のお願い

本品が故障したと思われるときは、本品に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

取扱説明書を必ずご参照ください。

＜業者による保守点検事項＞

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社

TEL 03(3815)3097

製造業者：ミズホ株式会社 千葉工場

保証期間に係る事項

本品は納品/設置してから1年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。