

機械器具38. 医療用鉤
管理医療機器 心臓断熱パッド 35973000

オムニサッカー

再使用禁止

【警告】

- ① 本品は、補助循環及び心臓血管外科手術に施行される体外循環での使用を目的としているので、他の目的には使用しないこと。
- ② 本品にハロゲン化炭化水素性麻酔剤やアルコール・エーテル等の有機溶剤を使用しないこと。又、他に使用する際も本品に接触しないように注意する。

【禁忌・禁止】



- ① 再使用禁止
- ② 再滅菌禁止
- ③ 脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含有する薬剤の投与時に使用しないこと。[本品を損傷する恐れがあるため。]

【形状・構造及び原理等】

- ① 本品は、人の心臓の半分を包む程度の大きさで、片面または両面の全面にわたって、点状または線状の小突起が施されたマットと、一端部がマットに取り付けられ、マットに溜まる液を吸引するための吸引孔が開閉し、他端部にポンプ接続するためのコネクターが設けられた吸引チューブが取り付けられている。


マットは自然状態では丸血状に湾曲している。また、その形状は長円形に限られたものではなく、例えば円形、扇形或いはマットの一部にあらかじめ切欠部をもつ場合もある。又冷却構造を備えたものもある。

- *② 患者の大きさにより2種類のサイズがある。

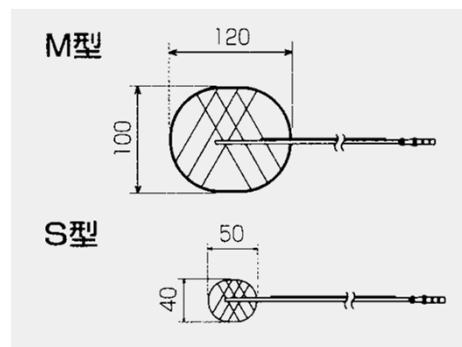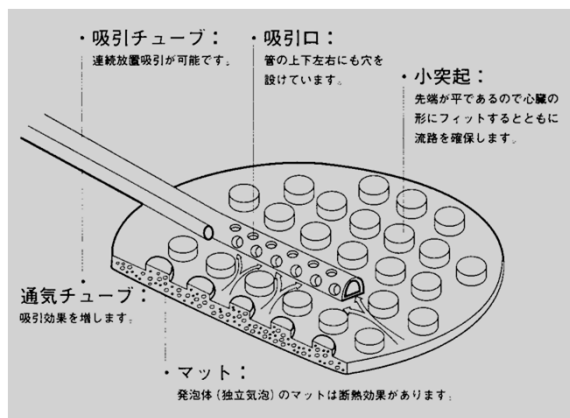

(単位: mm)

- ③ 術中に心臓等から生じた体液及び血液は吸引チューブの吸引口から吸引され、心肺回路の貯血器に導かれ体外循環血液として回収再利用される。一方心臓の冷却に用いたアイススラッシュの解けた水等の吸引排除にも使用される。

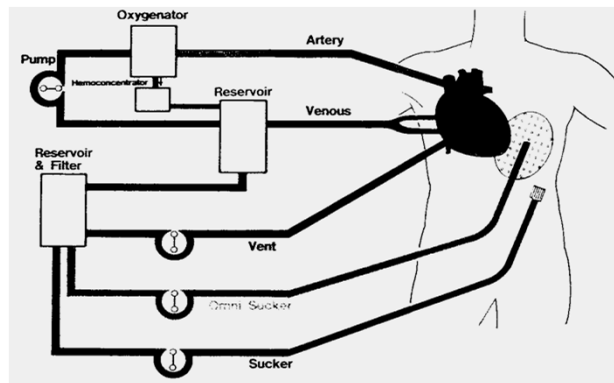

【使用目的又は効果】

開心術時に、手術部位より生じた血液、体液、アイス・スラッシュの解けた水などを連続的に吸引排除する。

【使用方法等】

- ① 本品は、ディスポーザブル製品であって、一回限りの使用で使い捨て、再使用しない。エチレンオキサイドガス滅菌済み。
- ② 開心術の際、心臓の下にマット部を挿入する。
チューブ端のコネクターをポンプの吸入口に接続する。

【使用上の注意】

- ① 本品を滅菌袋から取出して組立てるとき、以下の項目について確認してください。
 - ・ 製品内に異物が入っていないか。
 - ・ 各接続部が確実に接続されているか。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法: 直射日光、紫外線、高温多湿を避けて、常温で保存してください。

有効期間: 滅菌後3年。被包レーベル内“使用期限”に記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 三矢メディカル株式会社
TEL06-6707-9105

販売業者: 平和物産株式会社
TEL03-3287-0731