

*2019 年 6 月(第2版)
2019 年 2 月(初版)

医療機器認証番号：231AIBZX00002000

機械器具51 医療用嘴管及び体液誘導管

管理医療機器 輸液ポンプ用延長チューブ 12170052

ハイゼントラ専用 Y 字接続チューブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】


- ・再使用禁止
- ・注入の際は、150kPa を超えた圧をかけないこと。

＜併用医療機器＞

販売名：薬液注入輸液セット(ハイゼントラ専用輸液セット)認証番号 226AABZX00009000 以外と接続しないこと。[薬液漏れや、定められた用量の薬液を投与できない等のおそれがある]

【形状・構造及び原理等】

*1. 形状・構造

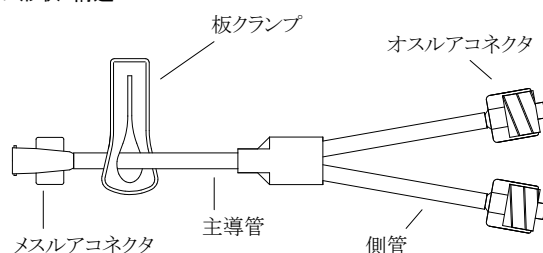

2. 血液・体液に接触する部分の原材料

チューブ：ポリ塩化ビニル(可塑剤:フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)ルアコネクタ：ポリカーボネート

【使用目的又は効果】

ポンプ用輸液ラインを延長するために用いる単回使用の延長チューブである

【使用方法等】

包装を開封し、本品を取り出す。

注射筒輸液ポンプに本品の主導管側のコネクタを接続してからハイゼントラ専用輸液セットを本品の側管側のコネクタに接続し、プライミングする。

薬剤の注入は注射筒輸液ポンプ及びハイゼントラ専用輸液セットの添付文書、取扱説明書を参照してください。

使用後は感染防止に注意し、安全な方法で廃棄する。

＜組み合わせて使用する医用機器＞

・販売名：薬液注入輸液セット(ハイゼントラ専用輸液セット)
認証番号 226AABZX00009000

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ・脂溶性の医薬品ではポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)が溶出する恐れがあるので、注意すること。
- ・使用中は本品の破損、接合部のゆるみ及び薬液漏れ等について、定期的に確認すること。
- ・脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含む医薬品、ヒマシ油等の油性成分、界面活性剤又はアルコール等の溶解補助剤等を含む医薬品を投与する場合及びアルコールを含む消毒液を使用する場合は、コネクタのひび割れについて注意すること。[薬液により延長チューブ等のメスコネクタにひび割れが生じ、血液及び薬液漏れ、空気混入等の可能性がある。特に、全身麻酔剤、昇圧剤、抗悪性腫瘍剤及び免疫抑制剤等の投与では、必要な投与量が確保されず患者への重篤な影響が生じる可能性がある。なお、ライン交換時の締め直し、過度な締め付け及び増し締め等は、ひび割れの発生を助長する要因となる。]
- ・ひび割れが確認された場合は、直ちに新しい製品と交換すること。

2. 重要な基本的注意

- ・液漏れ
- ・空気混入
- ・ルアコネクタの破損

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ・水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて保管してください。

2. 有効期間

- ・ラベルに記載(自己認証(当社データ)により設定)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 三矢メディカル株式会社

TEL 06-6707-9105