

* 2017 年 8 月改訂(第二版)(新記載要領に基づく改訂等)
2010 年 8 月作成(第一版)

医療機器届出番号:27B1X00051000006

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 輸液用連結管 70399000

連結管

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

〈各部の名称〉

* (構造図(代表図))

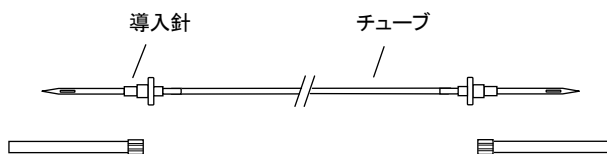

- ・本品はポリ塩化ビニル(可塑剤:フタル酸ジ(2-エチルヘキシル))を使用しております。

【使用目的又は効果】

本品は、チューブの両端に薬液瓶又は他の器具との接続部を持つ連結管である。輸液等に移すために用いる。

【使用方法等】

- ①包装側面の開封口より開封し、汚染に十分注意しながら連結管を取り出します。
- ②プロテクターを真っ直ぐ引き外して、連結させる輸液ボトル等の穿刺部へ導入針を穿刺して下さい。
- ③必要に応じてエアークリップを用いてください。

〈使用方法に関連する使用上の注意〉

- ・薬液をチューブ内に満たして使用する場合は一端を上にして薬液を完全に導いてから使用して下さい。
- ・針管には直接手を触れないように注意してください。
- ・プロテクターをかぶせる場合は、誤刺及びプロテクターからの針の飛び出しに注意して慎重に行ってください。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・脂溶性の医薬品ではポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)が溶出する恐れがありますので、注意してください。

【保管方法及び有効期間等】

1.保管方法

- ・水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて保管してください。

2.有効期間

- ・箱の使用期限欄を参照してください。(自己認証(当社データ)により設定)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 三矢メディカル株式会社
TEL 06-6707-9105

【お問い合わせ窓口】

販売元 株式会社トップ
TEL 03-3882-3101