

イリゲーションセット


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

(構造図)

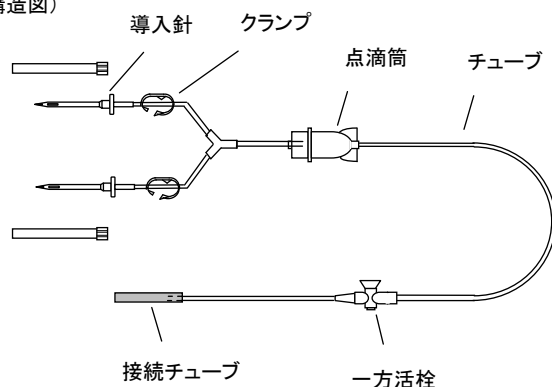

- ・上記は代表例です。
- ・品種によっては、コネクター付、三方活栓付等があります。
- ・品種によっては、導入側又は接続側がさらに分岐しているものがあります。
- ・本品はポリ塩化ビニル(可塑剤:フタル酸ジ(2-エチルヘキシル))を使用しております。

【使用目的又は効果】

本品は、関節鏡又は内視鏡等に接続して、患部に灌流液を供給するために使用する。

【使用方法等】

- ①セットのクランプを完全に閉じ、生理食塩水等の容器の所定位置に導入針を突き刺します。
- ②セットを接続した容器をつるし、接続チューブをしっかり接続します。
- ③クランプを開放して洗浄を開始します。

〈使用方法に関連する使用上の注意〉

- ・流量を増大させるために生理食塩水の容器に無理な圧力をかけないでください。本品各製品の接続部から水漏れを引き起こす恐れがあります。
- ・接続部に液が付着すると、接続部に緩み等が生じる場合がありますので注意してください。
- ・導入針の針部には、直接手を触れないよう注意してください。
- ・三方活栓付きの場合、油性の造影剤、脂肪乳剤、アルコール等を使用すると、接続部にひび割れが生じる場合がありますので、注意してください。

【使用上の注意】

- 1.重要な基本的注意
 - ・脂溶性の薬液ではポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)が溶出するおそれがあるので、注意してください。

【保管方法及び有効期間等】

- 1.保管方法
 - ・水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて保管してください。
- 2.有効期間
 - ・包装の使用期限を参照してください。(自己認証(当社データ)により設定)

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

〈製造販売業者〉 三矢メディカル株式会社

TEL 06-6707-9105