

*2017 年 10 月改訂（新記載要領に基づく改訂等）
2015 年 1 月 22 日作成

医療機器届出番号：27B1X00051000027

機械器具 55 医療用洗浄器
一般医療機器 洗浄器キット 11297001

イリゲーションチューブ Nタイプ

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、骨手術器械のポンプ部にセットして、ハンドピースの注水ノズルに生理食塩水を供給する目的で使用されるチューブセットである。

〈構造図（代表図）〉

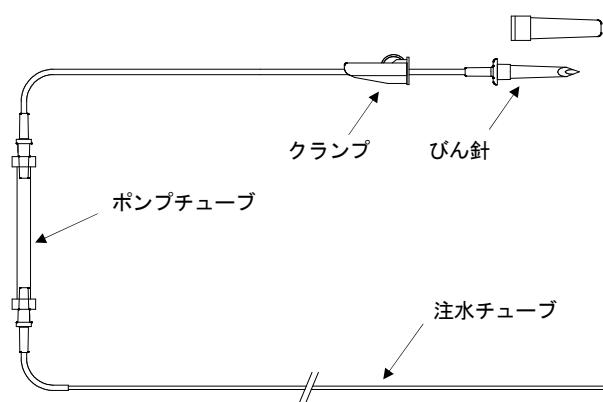

- ・本品はポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ（2-エチルヘキシル））を使用しております。

【使用目的又は効果】

患者・ユーザーの身体の特定の部分又は部位の処置を行うために洗浄器ユニット又は装置とともに用いる。

【使用方法等】

- ①汚染に充分注意しながら包装を開封し、包装内から製品を取り出す。
- ②びん針のプロテクターを取り外し、生理食塩ボトル又はバッグのゴム栓の中央に真っ直ぐいっぱいの深さまで突き刺す。
- ③ポンプチューブを電動式骨手術器械のポンプ部分にセットする。
- ④注水チューブをハンドピースの注水ノズルに取り付ける。

【使用上の注意】

- ・ポンプチューブ及び注水チューブが外れないようにしっかりと取り付けること。

〈重要な基本的注意〉

- ・脂溶性の医薬品ではポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ（2-エチルヘキシル）が溶出する恐れがあるので、注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

1.保管方法

- ・水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて保管してください。

2.有効期間

- ・包装の使用期限を参照してください。（自己認証(当社データ)により設定）

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

〈製造販売業者〉 三矢メディカル株式会社

TEL 06-6707-9105