

*2019 年 1 月改訂
2016 年 6 月作成

医療機器届出番号：27B1X00051000029

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 送水吸引チューブ 70355000

送水吸引チューブ


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

〈構造図（代表図）〉

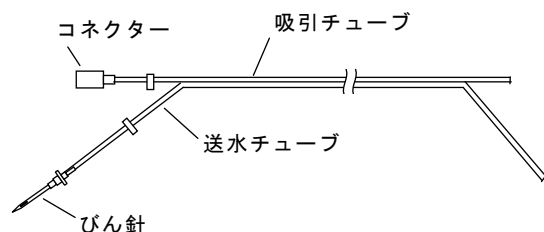

板クランプが付属するものがある。

- ・本品はポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ（2-エチルヘキシル））を使用しております。

【使用目的又は効果】

本品は、送水装置又は吸引装置等に接続し、送水及び吸引を行うために使用する。

【使用方法等】

①汚染に十分に注意し、包装内から取り出します。

②併用する装置の接続部分に正しく接続します。

〈使用方法に関連する使用上の注意〉

- ・接合部に薬液が付着すると接合部の緩み等が生じる可能性がありますので注意してください。
- ・使用中は接合部に緩みがないことを定期的に確認してください。
- ・1 回限りの使用で使い捨て、再使用しないでください。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- ・併用する装置の添付文書又は取扱説明書を確認すること。
- ・使用前に破損、変形、亀裂、傷等がないかを点検すること。それらが確認された場合は使用しないこと。
- ・開封後、速やかに使用すること。
- ・脂溶性の医薬品ではポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ（2-エチルヘキシル）が溶出する恐れがあるので、注意すること。
- ・アルコール等の有機溶剤を含む消毒剤を使用するとコネクター等が破損する場合があるため注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

1.保管方法

- ・水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて保管してください。

2.有効期間

- ・包装の使用期限を参照してください。（自己認証(当社データ)により設定）

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

〈製造販売業者〉 三矢メディカル株式会社

TEL 06-6707-9105

〈製造業者〉 三矢メディカル株式会社