

2024 年 8 月作成（第 1 版）

医療機器届出番号：27B1X00051000037

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管

一般医療機器 送気送水チューブ 70356000

バイポーラ イリゲーションチューブN

再使用禁止

【禁忌・禁止】


・再使用禁止

<併用医療機器>

・当社指定の送水装置及び処置具との組合せ以外で使用しないこと。[相互作用の項参照]

【形状・構造及び原理等】

<構造図（代表図）>

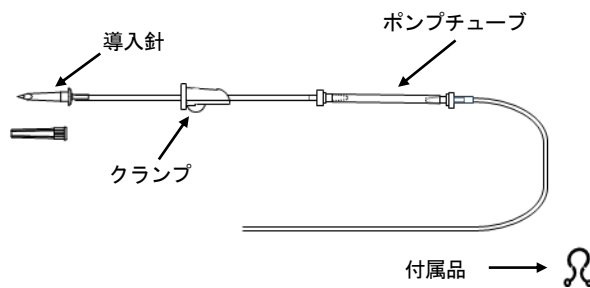

・本品のポンプチューブを送水装置に接続し、処置具であるバイポーラピンセットの先端に生理食塩水等の灌流液を送る。

・本品はポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ（2-エチルヘキシル））を使用している。

【使用目的又は効果】

本品は、送水装置と、バイポーラピンセットとの接続に用いる柔軟性のあるチューブである。

【使用方法等】

1. 使用方法

- ① 本品は滅菌品なので、包装に異常（破れ、穴等）がない事を確認してから開封し、取り出す。
- ② チューブをバイポーラピンセットに接続する。
- ③ ポンプチューブを送水装置に接続する。
- ④ 導入針を生理食塩水等の灌流液が入った容器に接続する。
- ⑤ 必要に応じて、コードの脱落防止に付属品（コードリング）を使用する。
- ⑥ 送水装置を作動させ、バイポーラピンセットの先端から生理食塩水等の灌流液が出ることを確認する。

2. 組み合わせて使用する医療機器

「販売名：GN090 ジェットイリゲーション 届出番号：

13B1X00218155004」及び「販売名：バイポーラ凝固ピンセット 認証番号：219AABZX00085000」と併用して使用する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ・ポンプチューブが折れ曲がった状態で送水装置に固定しないこと。
[注水が上手くいかない可能性がある。]
- ・アルコール等の有機溶剤を含む消毒剤を使用するとコネクター等が破損する場合があるため注意すること。[薬液によりひび割れが生じ、液漏れや空気混入の可能性がある。]
- ・脂溶性の医薬品ではポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ（2-エチルヘキシル）が溶出する恐れがあるので、注意すること。

2. 相互作用

併用禁忌（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
当社指定の GN090 ジェットイリゲーション及びバイポーラ凝固ピンセット以外の製品	機器に重要な損傷を与え、患者又は術者に重篤な障害をもたらす危険性がある。	本品との併用に関する安全性が確認されていない。

3. 不具合・有害事象

以下の不具合が発現する可能性がある。

[重大な不具合]

不適切な取り扱い、管理により破損、機能の低下が生じる可能性がある。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

・水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて保管してください。

2. 有効期間

・包装の使用期限を参照してください。（自己認証(当社データ)により設定）

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

<製造販売業者> 三矢メディカル株式会社

TEL 06-6707-9105