

エアーキッツ用チップ

【禁忌・禁止】


- ** 1. 刃部のあるチップ（S40 など）を歯肉縁下など軟組織に接触する部位で使用しないこと。〔軟組織を損傷する恐れがある〕

【形状・構造及び原理等】

体に接触する部分の組成

- ・ステンレス鋼
チップ
- ・シリコーンゴム
リング（チップ）

形状

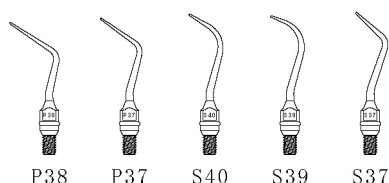

*** 【使用目的又は効果】

使用目的

本製品は歯科医師が歯科治療において、患者の歯面などに付着した歯石および歯垢の除去、根管の拡大形成を行うために使用する。
本付属品は歯科医師が歯科治療において、患者の歯面などに付着した歯石および歯垢の除去のために使用する。

【使用方法等】

詳細については、適応機種付属の取扱説明書を参照し、その内容に従うこと。


適応機種

** * エアーキッツ（認証番号：21600BZZ00292000）

使用方法

1. チップの交換

1. 適応機種付属の取扱説明書に従って、チップを取り外す。
2. 適応機種付属の「消耗ガイド」または、下図を用いて、チップの消耗具合を確認する。下図の場合、チップを図の型に合わせ、先端が赤い線の手前にある場合、交換時期となる。

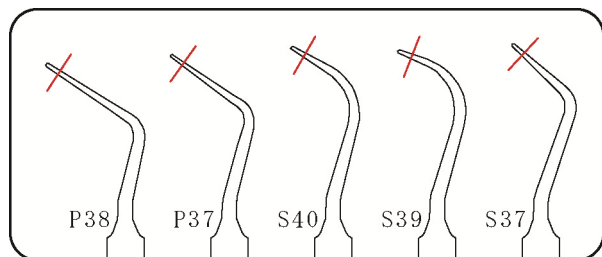

3. チップが交換時期であると判断できた場合、適応機種付属の取扱説明書に従って、新しいチップを取り付ける。取り外したチップの廃棄については適応機種付属の取扱説明書に従う。

使用方法等に関連する使用上の注意

1. 適応機種以外の製品に取り付けて使用しないこと。
2. 本製品には専用品以外のレンチは使用しないこと。
3. チップの装着は適応機種付属の専用レンチによって確実に本体に取り付けること。
4. チップ装着時に本製品を使用しない時は、必ずチップカバーを使用すること。
5. チップの脱落・破損による誤嚥などを防止するために、ラバーダム防湿法や治療中は患者に鼻呼吸をさせるといった対策を行うこと。

6. スケーリングを行う際には必ず十分な水を併用し、スケーリング部位とチップを冷却すること。
7. チップは下記の場合破損し易い状態になり、怪我などをまねく可能性があるため速やかに新しいチップと交換すること。
 - ・刃先部がスケーリングによって消耗したチップ
 - ・腐食したり、錆が発生したチップ
 - ・落下などの衝撃を受けて変形したチップ
 - ・刃先部をシャープニング、改造、変形させたチップ
8. 使用するチップの種類や消耗の程度、パワー調整など使用環境によっては作動音の発生や、チップの振幅が通常より大きくなる場合がある。
9. 同じ箇所を長時間チップを当てないこと。
10. チップを必要以上に挿入し、ポケット底を傷つけないためにポケットの長さを治療前に把握すること。
11. イリゲーション効果を発揮させるためと、根面を損傷しないために十分に注水を行うこと。
12. ポケット内で振動を開始するときはチップをポケットに挿入し、ポケットの長さを確認してから行うこと。
13. チップを根面に当てる角度はなるべく歯軸に平行になるようにすること。

【使用上の注意】

その他の注意

- ** 1. 使用前にアルコール清拭およびオートクレーブ滅菌を行うこと。
2. チップはあまり強く締め過ぎないように注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

保管条件については次の事項に注意すること。

1. 周囲の温度が-10～60℃であること。
2. 周囲の湿度が10～85%であること。
3. 周囲の気圧が500～1,060hPaであること。
4. チップは十分に乾燥させて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

1. 滅菌は患者ごとに必ず行うこと。
2. チップの洗浄には超音波洗浄器を使用しないこと。
3. チップは必ず使用後取り外し、スリーウェイシリンジなどのエアーによって乾燥させること。
- ** 4. 最高滅菌温度は摂氏 135 度のため、オートクレーブ滅菌器の設定は摂氏 121 度で 20 分、または摂氏 132 度で 15 分とすること。
5. 薬品が付着している器具とは一緒に滅菌器にかけないこと。
6. 消毒液の中にチップをそのままつけないこと。
7. 消毒の際には、アルカリ性の消毒剤および酸化電位水（強酸性水、超酸性水）を使用しないこと。
8. 乾熱滅菌など、指定の最高滅菌温度を超える滅菌は高温のため、避けること。
9. 滅菌器の状態や滅菌方法によっては、本製品が変色する場合がある。
10. 滅菌終了後、チップを十分乾燥させること。

【取扱説明書の有無】

本製品には「使用説明書」は付属していない。詳細については、適応機種付属の使用説明書を参照し、その内容に従うこと。
使用説明書＝取扱説明書である。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

* 発売元

株式会社ジーシー
〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目2番14号
お客様窓口 TEL 0120-416480

製造販売元

株式会社ミクロン
〒146-0082 東京都大田区池上2丁目17番7号
TEL 03-3755-0396（代）

製造元

株式会社ミクロン