


機械器具 22 検眼用器具
一般医療機器 検眼レンズ 34653000

タッチフォーカス トライアルレンズセット A

【形状・構造及び原理等】

検眼レンズフレームにセット可能なレンズ枠(つまみ部分付き)に入れた累進屈折力眼鏡レンズで、つまみ部分には加入度数、左右の識別を表示する。単体または組み合わせて出荷される。

1. 外観及び主要部分名称

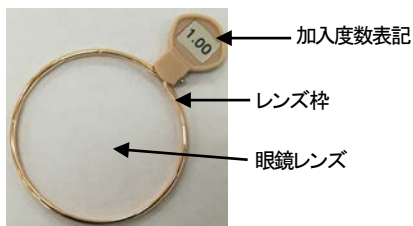

2. 原理

適切な度数の単焦点検眼レンズとタッチフォーカス トライアルレンズ A を組み合わせて使用して、網膜上に結像させることにより、視力を補正する。

3. 仕様

レンズの種類 : 累進屈折力眼鏡レンズ

遠用度数(単位 D) : 0.00

累進加入度数(単位 D) : 0.25、0.50、0.75、1.00、1.25、1.50、
1.75、2.00、2.25

【使用目的又は効果】

タッチフォーカスを選択し購入する際に、顧客に対してその適合の度合を確認するために用いられる。

【使用方法等】

- 他の検眼レンズと共に検眼レンズフレームにセットして使用する。
- 使用後は、次の使用に支障のないように清潔な状態にしてトレイ等に収納して保管すること。

【使用上の注意】

- 被検者の身体に影響を及ぼさないように、処方に従い適切なトライアルレンズを選択すること。
- タッチフォーカスの適合の度合いを確認する目的以外には使用しないこと。
- 割れた破片で怪我をする恐れがあるので、強い振動・衝撃を与えたり、落として傷つけたりしないこと。
- レンズ面に傷が付いたり、指紋、ホコリ等で汚れないようにすること。
- 移動および運搬時は、付属の梱包箱もしくはトレイに収納すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

本製品を保管する際は、次の事項に注意すること。

- 保管条件(運搬時を含む)

温度 -20℃ ~ 55℃

湿度 20%RH ~ 80%RH (結露なきこと)

- 直射日光が当たる場所や高温・多湿の場所は避け、室内で保存すること。

2. 耐用期間

本製品の耐用年数は、正しく使用した場合 5 年間である(自社基準)。

【保守・点検に係る事項】

日常のお手入れ

- 汚れがついたときは、まずゴミやホコリを払ってから、メガネクロスで軽く拭くこと。
- 汚れが強いときは、中性のクリーニング液を少量つけてから拭くこと。
- レンズに割れや欠け、ヒビが無いことを確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 : 三井化学株式会社

メールアドレス : support@touchfocus.com