

器具器械 12 ベッド型マッサージ器
マクター・ロイヤルクラウンR-5200
JMDNコード 34488000


【警告】

1. 本治療装置を使用する際は、必ず付属の取扱説明書に従い操作すること。
2. 本治療装置は医師の管理下にて、操作方法を熟知した者が使用すること。
3. 本治療装置または患者さんの異常が発見された場合には、直ちに使用を中止して電源を切ること。
4. 本治療装置を長期間使用しない場合は、感電や火災の防止のために電源プラグをコンセントから抜くこと。

【禁忌・禁止事項】

1. 禁忌症例：骨感染症、骨の破壊を伴う進行性疾患などの脊椎の感染症（骨髄炎、脊椎カリエス、化膿性脊椎炎など）、悪性腫瘍、転移がん、骨髄圧迫症状のある方、心臓疾患、肺疾患、虚弱体質、リンパ腺炎などによる急性斜頸。
2. 本治療装置を設置する場合には、高湿度、塩分や硫黄分を含んだ大気中、傾斜した場所、振動や衝撃（運搬時を含む）を避けること。
3. 故障した場合には、適切な表示をした上で、メーカーに修理を依頼すること。

【形状・構造等】

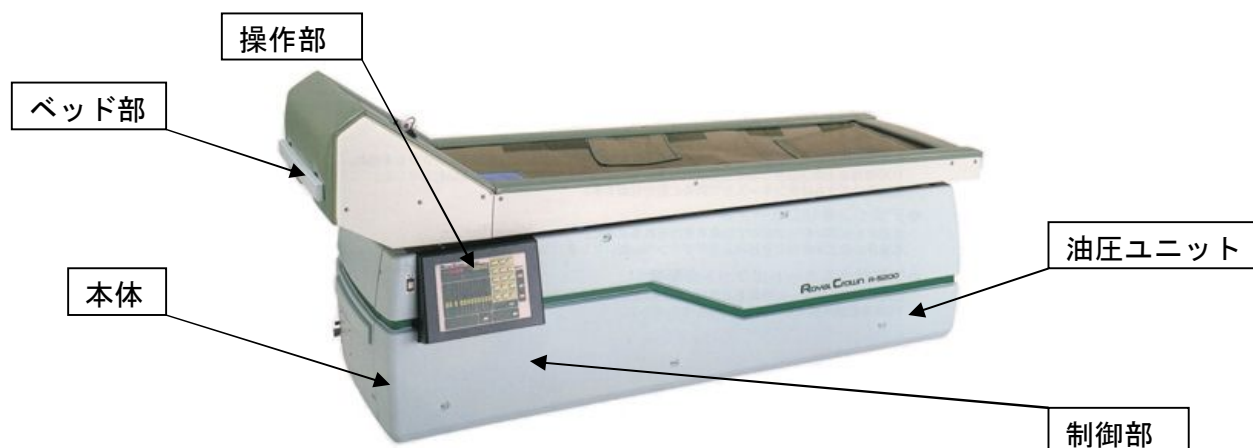

1. 構成：本治療装置は、本体、電源部、制御部、操作部、油圧ユニット、ベッド部、振動部、駆動部、マッサージ用ローラ、温熱ヒーターから構成されています。
2. 電氣的定格：
定格電圧 AC100V
周波数 50/60Hz
消費電力 1200VA
電撃に対する保護の形式と程度 クラスⅠのB型
3. 寸法及び重量
820（幅）×890（高）×2480（長max） 235kgf

【性能、使用目的、効能又は効果】

1. 性能： a. 温熱：背面最高温度 70℃（室温 20℃にて）
b. マッサージ：ローラ刺激体強度 体重により変化（最大は体重）
頸椎、上半身、振動、指圧刺激、下半身ローラの5種類
2. 使用目的：全身マッサージ
3. 効能又は効果：消炎鎮痛（マッサージ・温熱 効果）

【操作方法又は使用方法】

1. パワースイッチを押して、電源を入れます。
 2. 先生が選択したプログラムNo. を、操作パネル（操作部）上のテンキーにて入力してセットボタンを押します。
 3. 患者さんを誘導して、ベッド上に寝てもらいます。
 4. 頸椎刺激用ローラの回転速度（モミ速度）を低・中・高の中から選択します。熱気浴（温熱）の強度を微・弱・中・強の中から選択します。身長設定ボタンで5段階の身長から患者さんに適した身長を選びます。
 5. スタートボタンを押して、治療を開始します。治療終了時には予告ブザーが鳴ります。治療が終了しましたら、患者さんに治療装置から降りていただきます。
- 詳細は「取り扱い説明書」を参照してください。

【使用上の注意】

1. 各スイッチの動作をチェックし、本医療装置が正常に動作することを事前に確認すること。
2. コンセント及びアースが、正しく接続されていることを確認すること。
3. 他の機器と併用する場合は、事故や患者さんに十分な注意をすること。
4. 使用中は本医療装置及び患者さんに異常がないか、常に監視すること。
5. 万一、異常が発見された場合には、患者さんが安全な状態で使用を中止して電源を切ること。

【作動・動作原理】

本治療装置は、ベッド型マッサージ器として使用します。患者さんがベッド部上に、仰臥位で寝た状態で治療をします。ベッド下部の本体に組み込まれたマッサージ用ローラ刺激体等により医療マッサージを行います。

マッサージは、ローラが組み込まれた本体とベッド部が相対移動することにより行われます。マッサージ強度は、ローラ等を装着した油圧シリンダーを油圧ユニットにて上下させる高さを制御することにより設定します。

治療はメモリーに格納された治療プログラムに基づいて、マイクロコンピュータにて順次実施されます。

（「取り扱い説明書」も参照のこと）

【臨床成績】

既存の医療機器のため、臨床試験は実施しておりません。

【保守・点検に係る事項】

保守・点検に関しては、マクターエンジニアリング株式会社の営業所または開発センター宛に連絡をお願いいたします。本医療装置 は特定保守管理医療機器に該当いたしますので、専門知識を持ったサービスエンジニアに保守・管理をご依頼ください。

【主要文献及び文献請求先】

臨床データはありませんが、一般的な参考資料があります。マクターエンジニアリング株式会社 開発センターまでご請求ください。

【製造販売業者の名称及び住所】

マクターエンジニアリング株式会社 開発センター

〒373-0015 群馬県太田市東新町 238-1

T E L : 0276-40-2480 F A X : 0276-40-2481

<E-mail> info@mdec.co.jp <URL> <http://www.mdec.co.jp>

(本店：群馬県桐生市境野町 6-1593-6)

