

器具器械 12 乾式ホットパック装置

インブレイス－Ⅶ（EB－Ⅶ）

JMDNコード 37329000


【警告】

1. 本治療装置を使用する際は、必ず付属の取扱説明書に従い操作すること。
2. 本治療装置は医師の管理下にて、操作方法を熟知した者が使用すること。
3. 本治療装置に異常が発見された場合には、直ちに使用を中止して電源を切ること。
4. 本治療装置を長期間使用しない場合は、感電や火災の防止のために電源プラグをコンセントから抜くこと。

【禁忌・禁止事項】

1. 禁忌症例：急性疾患特に炎症性のもの、強度の身体衰弱、結核、慢性腎炎及び萎縮腎、外傷、細菌性疾患及び医師から入浴や運動を禁止されている方。
2. 本治療装置を保管する場合には、高湿度、塩分や硫黄分を含んだ大気中、振動や衝撃（運搬時を含む）のある場所を避けること。
3. 故障した場合には、使用を中止してメーカーに修理を依頼すること。

【形状・構造等】

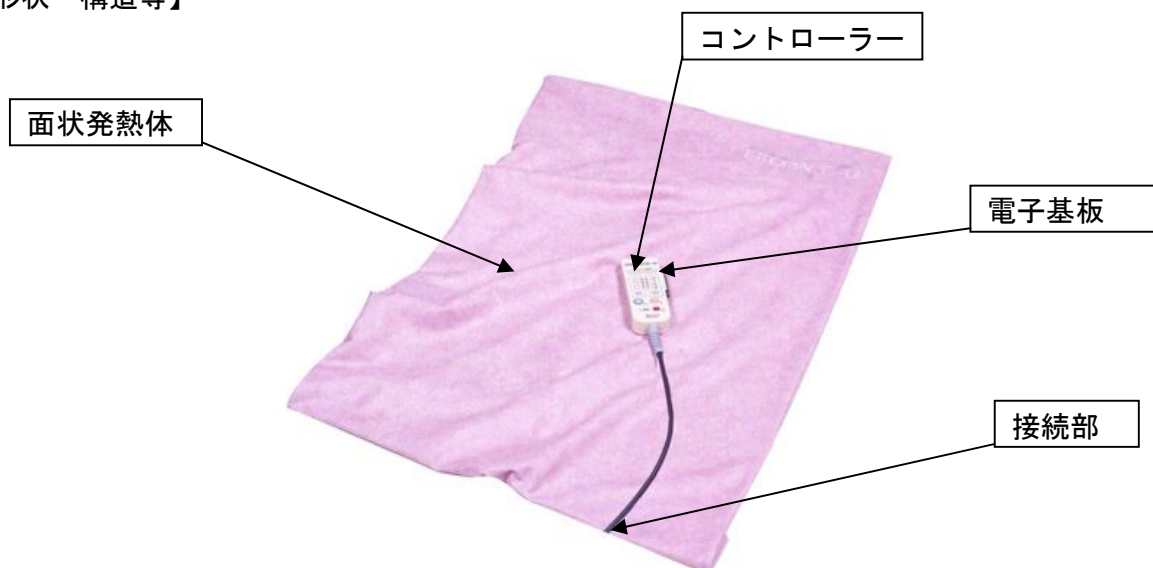

1. 構成：本治療装置は、コントローラー（制御用電子基板内蔵）、人体に装着する面状発熱体及び接続部から構成されています。
2. 電氣的定格：
定格電圧 AC100V
周波数 50／60Hz
消費電力 95VA
電撃に対する保護の形式と程度 クラスⅡのB型

3. 寸法及び重量

1000（幅）×1500（長）

1.4kgf

【性能、使用目的、効能又は効果】

1. 性能： 最高表面温度 55℃ 最長使用時間 360 分まで（自動オフ）
出力形式：コードヒーター オン・オフ制御方式
温度制御パターン：恒温、漸増恒温、漸減恒温、漸増漸減、漸減漸増、
リラックスゆらぎ
安全装置：過昇防止装置、過負荷防止装置、温度センサー、センサー線断
線検知回路、センサー線短絡検知回路
2. 使用目的：冷え性、全身及び抹消循環改善及び加温
3. 効能又は効果：温熱効果

【操作方法又は使用方法】

1. 患者さんの患部にE B-VIIを掛けます。
2. コントローラーの電源ボタンを押して電源を入れます。治療プログラムを選択してプログラム設定ボタンを押します。
3. 治療温度を選択して、スタートボタンを押します。治療中はプログラム設定ランプと温度設定ランプが点滅します。治療中に温度を変更したい場合には、温度設定ボタンを押して変えます。治療中に装置や患者さんに異常が生じた場合は、電源「切」ボタンを押して治療を中止します。
4. 治療をスタートしてから 360 分経過（連続使用時）しますと、自動的に電源が切れます。標準治療時間は 15 分です。

詳細は「取り扱い説明書」を参照してください。

【使用上の注意】

1. 各スイッチの動作をチェックし、本治療装置が正常に動作することを事前に確認すること。
2. コンセント及び接続部が、正しく接続されていることを確認すること。
3. 他の機器と併用する場合は、事故や患者さんに十分な注意をすること。
4. 使用中は本治療装置及び患者さんに異常がないか、常に監視すること。
5. 万一、異常が発見された場合には、使用を中止して電源を切ること。

【作動・動作原理】

本治療装置は、温熱治療器として使用します。椅子に座った状態または横たわった状態で治療をします。温度の制御情報はコントローラーに内蔵された電子基板上のROM（メモリー）に格納されております。温度制御情報が制御用CPU（マイコン）に送られて、フォトモスリレーがオン・オフされることにより、ヒーター線の温度が制御されます。コントローラー内部には直流電源（DC5V）を供給するAC-DC変換器が設置されております。

（「取り扱い説明書」も参照のこと）

【臨床成績】

既存の治療装置のため、臨床試験は実施しておりません。

【保守・点検に係る事項】

保守・点検に関しては、マクターエンジニアリング株式会社の開発センター宛に連絡をお願いいたします。

【主要文献及び文献請求先】

臨床データはありませんが、一般的な参考資料があります。マクターエンジニアリング株式会社 開発センターまでご請求ください。

【製造販売業者の名称及び住所】

マクターエンジニアリング株式会社 開発センター

〒373-0015 群馬県太田市東新町 238-1

T E L : 0276-40-2480 F A X : 0276-40-2481

＜E-mail＞ info@mdec.co.jp ＜URL＞ <http://www.mdec.co.jp>

（本店：群馬県桐生市境野町 6-1593-6）

