

類別：器 12 理学診療用器具
一般医療機器 一般名称：温熱用パック(コード：37240010)
販売名：バリアホットダブル

【禁忌・禁止】

以下の症状を示す人、又は診断を受けた人への使用はやめること。

- ① 急性の炎症、悪性腫瘍、出血している部位、出血傾向の強いとき、細胞感染による化膿性疾患、知覚鈍麻のある部位
- ② その他医師が不適当と判断した人。

【形状・構造及び原理】

1. 形状、構造

本品は図 - 1 の構造、図 - 2 の形状を有するものである。

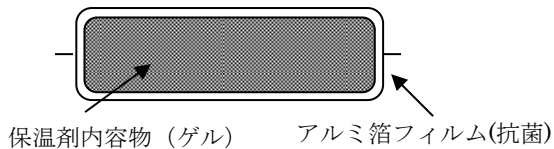


図 - 1 (断面図)

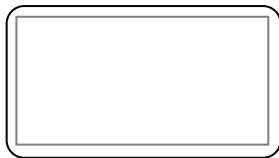


図 - 2

サイズ 180×260mm 700g

2. 原理

加熱媒体の入った本品を加温装置で加熱・蓄熱し、その温熱効果により患部を温める。

【使用目的／効能・効果】

加熱された本品を患部にあて、消炎鎮痛処置(温熱治療)を行う温熱用パックである。 本品は再使用可能である。

【品目仕様】

本体袋：抗菌アルミ箔フィルム
内容物(加熱媒体)：水、吸水性ポリマー、防腐剤
専用カバー：ポリエステル

【操作方法又は使用方法】

1. おしぼり等を温める際に用いるタオルウォーマーを設置する。
2. バリアホットダブルをタオルウォーマーに入れ加熱する。
3. 加熱されたバリアホットダブルをタオルウォーマーから取り出し、破損等が無いことを確認する。
4. バリアホットダブルを付属のカバーに入れ、患部にあて、適宜の時間患部を温め終了する。
5. 使用後は付属のカバーから取り出し、汚れ・破損等の確認を行った後、タオルウォーマーで再度加熱する。また、続けて使用しない場合は冷めてから冷暗所にて保管する。

※カバーに入れたまま温めて頂く事も出来ますが、中のジェルパックに破損等がない事を確認して頂いた後、ご使用ください。

【使用上の注意】

1. 電子レンジでの加熱は絶対にしないこと。
2. 加熱直後のバリアホットダブルを直接肌に当てて使用しないこと。必ず付属のカバーに入れて使用すること。
3. 治療に必要な加温時間を超えないように注意すること。
4. 患者に異常が見られた場合、または施術患部に低温火傷の症状(赤くなったり水泡ができたり等)や痒み等が出た場合は、患者にとって安全な状態で直ちに施術をやめ適切な処置をとること。
5. バリアホットダブルに破損等の異常が見られた場合も使用・施術を中止し新しいものと取り換えること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間】

1. 使用後は清拭し、付属カバーは洗濯してから保管すること。
2. バリアホットダブルは、一部消耗品的要素があるので、破損状況を見極め定期的に交換すること。
3. 保管は高温、極寒、多湿の場所や直射日光を避け、先入れ先出しを守ること。(保管・管理に怠りがある場合、劣化の原因になることがある。)
4. 使用期間は原則的に6ヶ月間が望ましいが、破袋や傷が無い場合は使用できる。

【取り扱い上の注意】

1. バリアホットダブルはアルミ箔ラミネートフィルムに包まれたゲル剤で構成されているので、乱暴に扱ったり、鋭利なものが触れると破損の原因になるのでご注意ください。
2. 電子レンジでの加熱は絶対に行わないでください。電子レンジの故障、スパークによるバリアホットダブルの破損の恐れがあります。

【保守・点検にかかる事項】

1. バリアホットダブルは一部消耗品的要素があるので、施術前に破損がないことを定期的に点検し、内容物の液漏れが無い、フィルムに破損は無いかを点検し不慮の障害を未然に注意すること。

【包装】

パック 2 個、専用カバー1 個（個箱包装）

【製造販売業者】

名称 三重化学工業株式会社
住所 三重県松阪市大町 262-1
連絡窓口 企画開発室
電話番号 0598-51-2361

裏面の取扱説明書を必ずご参照下さい。