

機械器具 72 視力補正用レンズ
一般医療機器：眼鏡レンズ（35957000）

OAKLEY RX（ブルトナイト PAL リプレイスメント）



A13
社内管理コード

【警告】

- 目を痛める原因になりますので、カラーレンズであっても、その濃淡にかかわらず太陽や強い光を直視しないでください。[直視することにより失明の恐れがある。]
- 中近、近用の累進レンズは車の運転や操縦などには絶対に使用しないでください。[重大な事故を引き起こす可能性がある。]
- 色の濃いカラーレンズは、光量が不足するため視力が低下することがありますので、昼でも夜でもご使用になる環境で十分に視力が確保できることを確認してください。また、レンズカラーによっては信号光が見えにくくなる場合がありますので、その場合には運転等には使用しないでください。視力が確保できない状態でのご使用は事故の原因となりますので使用しないでください。[重大な事故を引き起こす可能性がある。]

【禁忌・禁止】

- 紫外線を遮断するプラスチックをレンズに使用していますが、強い人工的な紫外線に対する眼の保護を目的とした眼鏡レンズではありませんので、機械や装置から発生する紫外線への保護眼鏡として使用しないでください。[紫外線を受け続けると白内障などの眼病に繋がる可能性が高まる。]
- 故意に変形や改造、傷などを付けないでください。破損、眼や顔を損傷する原因になります。[擦り傷、切り傷を起こす可能性があります。]
- フレームが肌に触れる箇所に、かゆみ、かぶれ、湿疹などの異常があるときは、直ちに使用をやめて医師の診断を受けてください。[皮膚炎の可能性ある。]
- ご使用になられるうちに、見え方が変わった場合は視力が変化している可能性がありますので、眼科医による検眼又は販売店での測定を受けてください。見え方が適切でない場合はご使用を中止してください。[視力不良による事故を引き起こす可能性があります。]

【形状・構造及び原理等】

この眼鏡レンズは、＜OAKLEY RX（ブルトナイト）（製造販売届出番号：13B3X10206RX0AKP）＞及び＜OAKLEY RX（ブルトナイト PAL）（製造販売届出番号：13B3X10206RXPALP）＞用の交換レンズです。

(1) 構成品	眼鏡レンズ
---------	-------

【形状及び各部の名称】

組合せるフレームのデザインにより外観形状は異なりますが、代表的な形状を例として各部の名称を説明します。


1) CUSTOM & STEPS（カスタム&ステップス）用



2) SHIELD（シールド）用



3) SWITCHLOCK（スイッチロック）用

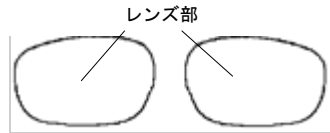

【作動原理】

この眼鏡レンズは、医師の処方および検眼の結果から製造された適切な度数のレンズであり、専用フレームに組合せて使用することにより視力を補正するものです。

【使用目的又は効果】

この眼鏡レンズの使用目的は「視力補正」です。

【使用方法等】

この眼鏡レンズをフレームに組付けられる際には、取扱説明書の指示に従って作業を行ってください。ここでは代表的な形状を例として説明します。

＜ご使用になる前に＞

取扱説明書を参照して、従来のレンズを取り外します。

1) CUSTOM & STEPS（カスタム&ステップス）タイプ

- 人差し指と親指でノーズブリッジをつかみます。（図 1-1）
- もう片方の手でレンズ鼻側部分を持ち、ノーズブリッジとレンズを逆方向に開くように、レンズ鼻側のツメをフレームから外します。（図 1-1）
- 溝に沿ってレンズが外れます。（図 1-2）

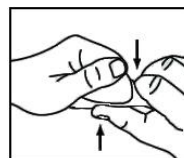


図 1-1

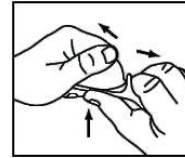


図 1-2

2) SHIELD（シールド）タイプ

- 両手の人差し指と親指で、ノーズブリッジ部分を持ち、内側に押し曲げます。（図 2-1）
- レンズがフレームから外れるまで眼鏡上部に向かって、ノーズブリッジを押し上げます。（図 2-2）
- レンズをフレームから取り外します。（図 2-3）

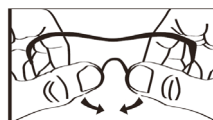


図 2-1



図 2-2



図 2-3

3) SWITCHLOCK（スイッチロック）タイプ

- ノーズパッドの下部分をつかみます。（図 3-1）
- ノーズパッドを上方向に持ち上げてロックを解除します。（図 3-2）
- フレームの下枠を下方向に開きます。（図 3-3）

取扱説明書を必ず確認してください。

④レンズをフレームから丁寧に取り外します。(図 3-4)

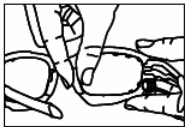


図 3-1

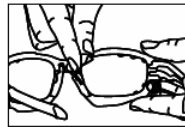


図 3-2

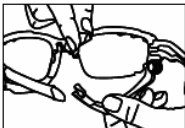


図 3-3



図 3-4

<組付け方法>

取扱説明書を参照して、新しいレンズを組付けます。

1) CUSTOM & STEPS (カスタム&ステップス) タイプ

- ①人差し指と親指でノーズブリッジをつかみます。(図 1-3)
- ②もう片方の手でレンズを持ち、先ずレンズのこめかみ側のツメをフレームに差し込みます。(図 1-4)
- ③溝に沿って、鼻側部分のレンズが確実に収まるまで、レンズを押し込みます。(図 1-5)

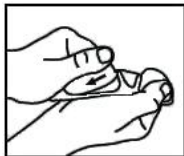


図 1-3

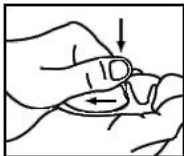


図 1-4

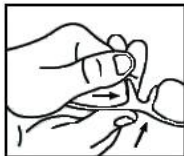


図 1-5

2) SHIELD (シールド) タイプ

- ①レンズを組付ける際はレンズの右側からフレームにはめていきます。弧を描くようにレンズを軽く曲げ、レンズの左側をフレームにはめ込みます。(図 2-4)
- ②フレームの溝をレンズの上にかぶせるように引き上げながら両手の親指でレンズを押し込みます。(図 2-5)
- ③フレームにレンズが完全にはまった状態でノーズブリッジが確実に収まるまで押し込みます。(図 2-6)



図 2-4



図 2-5

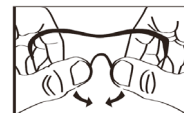


図 2-6

3) SWITCHLOCK (スイッチロック) タイプ

- ①交換レンズを溝に沿ってフレームに入れます。(図 3-5)
- ②フレームの下枠を元の位置に戻し、カチッという音がするまでノーズパッドを下げて留めます。この時ノーズパッドのロックが閉まっていることを確認してください。(図 3-6)

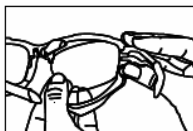


図 3-5



図 3-6

<組付け後>

レンズ組付け後は取扱説明書を参照して、清掃・保管してください。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 1) 累進レンズは歩行の際に近用部をお使いになると、足もとがボケたり距離感の違いを感じて、階段を踏みはずしたり、転倒することがあります。少しアゴを引くようにして、遠用部（レンズ上部）で見るようにしてください。

- 2) 見え方や使い方に慣れないうちの運転や操縦は距離感等がつかめず危険です。運転や操縦などは慣れてから行ってください。
- 3) 慣れないうちはレンズ側面部にゆれ・ゆがみを感じる部分があります。その場合には視線の移動に注意し、ゆれ、ゆがみを感じない範囲でご使用ください。万一慣れない場合は、ご購入店に改めてご相談ください。
- 4) レンズがフレームに確実に固定されていない場合は、衝撃を受けるとレンズが破損したり、レンズがフレームから外れて眼や顔を負傷する可能性がありますので注意してください。
- 5) 本品が組付けられる眼鏡は、一般の眼鏡よりも広い視野が確保できるフレームデザインであるため、慣れるまでは見え方に違和感をもつことがあります。個人差もありますが、慣れるにしたがって徐々に違和感がなくなっていきます。なお、長く違和感が続く場合には販売店にご相談ください。また、違和感を感じられる間はスポーツや車の運転では事故の原因となりますので使用しないでください。
- 6) お子様や補助を必要とされる方がご使用になる場合は、必ず保護者の指導のもと使用してください。
- 7) レンズを清掃する場合には、シンナー、ベンジン等の溶剤は一切使用しないでください。レンズを劣化・破損させる原因となります。また、塩素系洗剤（カビ取り用洗剤等）、アルカリ系洗剤（浴室用洗剤等）も清掃には使用しないでください。清掃を行う場合は＜OAKLEY RX（ブルトナイト）＞または＜OAKLEY RX（ブルトナイトPAL）＞に付属の保管用袋（マイクロクリアバッグ）で拭き取るか、もしくは、中性洗剤か少量の水を使用して拭いてください。
- 8) 超音波洗浄器のご使用は避けてください。コート膜やレンズが痛む原因となります。
- 9) 薬品、化粧品、整髪料、ヘアースプレー、汗、柑橘類の果汁（レモンやオレンジ等）が付着した場合は、すぐに水洗いをしてよく落としてください。そのまま放置しますと、レンズのコート膜がはがれる原因や、レンズに付着してシミが残り取れなくなります。なお、水洗い後やレンズに水が付着した場合には、速やかに拭き取ってください。濡れたまま放置しますと、水の跡が取れにくくシミになります。
- 10) 高温状態に放置すると、熱によってレンズが変形してフレームから脱落したり、度数が変化して見え方に悪影響をおよぼします。また熱によってレンズ表面のコート膜がヒビ割れすることがあります（約60℃以上）。お湯で洗ったり、炎天下の車中や直射日光が当たる場所（砂浜等）に放置したり、サウナ等の高温環境では使用しないでください。
- 11) 急激な温度差にさらされると表面のコート膜に細かいヒビ割れが生じたり、レンズの変形やフレームに亀裂が入る原因となりますのでご注意ください。
- 12) 本品を組付けた眼鏡をケースに入れずに直射日光が当たる場所に置かないでください。レンズの集光作用により周囲を焦がす恐れがあります。
- 13) レンズが直接肌に触れる場合は擦り傷等の原因となりますのでご使用をお控えください。

【保管方法及び有効期間等】

<保管の条件>

直射日光及び衝撃を避け、常温・常湿で保管してください。フレームに組付け後は、眼鏡の取扱説明書及び添付文書の【使用上の注意】に従って保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売業者：ルックスオティカジャパン株式会社

住所：東京都千代田区二番町4番地5

住友不動産二番町ファーストビル7階

電話番号：03-3514-2911

取扱説明書を必ず確認してください。