

機械器具 06 呼吸補助器
管理医療機器 空気・酸素マスク 35171000

MMI エアーズルマスク

再使用禁止

【禁忌・禁止】


〈使用方法〉

1. 再使用禁止
2. 材質に過敏症のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

代表的写真

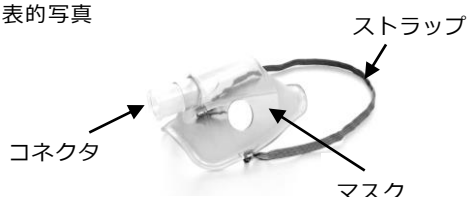

2. 原材料

マスク：ポリ塩化ビニル
（可塑剤：フタル酸ジ（2-エチルヘキシル））
ストラップ：ポリエステル系繊維（ラテックスフリー）

3. 原理

蛇管との接続口（コネクタ）から霧（超音波ネブライザー由来）を取り入れ、患者に提供する。患者呼吸はマスクの2つの開口部から排気される。

【使用目的又は効果】

吸入療法に使用される超音波ネブライザー等に接続して使用するマスクであり、ネブライザーで発生させた霧を気道内に誘導する。

【使用方法等】

1. 使用方法

- 1) コネクタに適合する蛇管を接続する。蛇管の長さは、ネブライザーと患者の位置から必要な長さを考慮して決定する。
- 2) 蛇管の他方の先端をネブライザー等に接続する。
- 3) 患者の鼻及び口を覆うようにマスクをあて、ストラップを後頭部に回し、長さを調整して固定する。

2. 使用方法に関連する使用上の注意

- 1) ストラップを締めすぎないこと[密閉等による皮膚刺激により、不快感を増大させるおそれがある]。
- 2) 圧迫による皮膚損傷（潰瘍等）の発生を予防するため、患者の状態を確認し、必要に応じて下記のような処置を行うこと。
 - ・圧のかかる部位にガーゼを当てる。
 - ・指先で顔をマッサージする。
 - ・2時間ごとに顔を洗う又は清拭する。

3. 組み合わせて使用する医療機器

本品は、市販の吸入療法用超音波式ネブライザー等と併用して使用する。

**【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 1) 使用前に、製品に変形がないか、詰まりや漏れがないか確認すること。
- 2) 各接続部の固定が確実なことを確認すること。
- 3) 患者に適したサイズを選択し、使用する際は、鼻及び口を確実に覆うこと。
- 4) 本品は MR Safe であり、一般的な MR 検査による影響はない[自己認証による]。

*【保管方法及び有効期間等】

有効期間

3 年 [自己認証（当社データによる）]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：**村中医療器 株式会社**
TEL：0725-53-5546

製造業者：ゲールメッド社 台湾
GaleMed Corporation

