


機械器具 35 医療用はさみ
一般医療機器 はさみ 35325001

チタンマイクロ剪刀

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

代表的写真

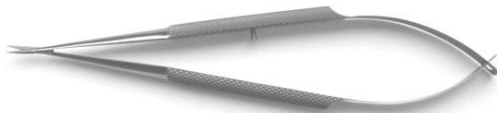

2. 原材料: チタン合金

3. 原理

回転軸のある2枚の内向き刃からなり、2枚の刃を閉じることによって対象物を切断できる。

【使用目的又は効果】

通常、手術時の組織、縫合糸等の切断に用いる器具をいう。回転軸のある2枚の刃を閉じることによって操作する。

*【使用方法等】

- 1) 使用前に、必ず洗浄・滅菌を行う。医療機関でバリデーションされた滅菌条件で滅菌すること。【保守・点検に係る事項】参照
- 2) ハンドルを親指と中指等を用いて握り、対象物を切断する。

**【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 1) 本品がハイリスク手技に使用された場合には、プリオン病感染予防ガイドラインに従った洗浄・滅菌を実施すること。【保守・点検に係る事項】参照
- 2) 本品がプリオン病の感染症患者への使用及びその汚染が疑われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連絡すること。
- 3) 本品については、試験によるMR安全性評価を実施していない。

**【保管方法及び有効期間等】

【保守・点検に係る事項】に記載された点検等において本品に異常が認められたとき又は疑われるときは使用しないこと。

**【保守・点検に係る事項】

1. 清掃方法

- 1) 汚れが乾燥し落ちにくくなるのを防ぐため、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに洗浄・消毒し、必要に応じて滅菌する。
- 2) 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、その適正濃度と取扱方法を守る。

- 3) 超音波洗浄装置・ウォッシャーディスインフェクター等の洗浄装置で洗浄する場合、汚れが落ちやすい状態でバスケット等に収納して処理する。その際、刃に異物(硬物)があたらないように注意する。
- 4) 金属タワシ、クレンザー(磨き粉)等は、器具表面を損傷するので使用を避ける。
- 5) 仕上げすぎには、精製水・脱イオン水・濾過水等の使用を推奨する。
- 6) 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥させる。
- 7) 手術器具用潤滑剤の塗布を推奨する[可動部の潤滑のため]。
- 8) 「医療現場における滅菌保証のガイドライン2021」に記載されている高圧蒸気滅菌条件は以下のとおり。

滅菌温度	保持時間
121℃	15分
126℃	10分
134℃	3分

- 9) 「プリオン病感染予防ガイドライン2020」に記載されている洗浄・滅菌条件は以下のとおり。
洗浄においては、アルカリ洗浄剤を用いて90-93℃の高温で行う。ウォッシャーディスインフェクターの使用が望ましい。工程を2回繰り返すことも推奨される。
滅菌においては、134℃/8-10分の真空脱気プレバキューム高圧蒸気滅菌を行う。滅菌時間は18分に延長することも推奨される。

2. 点検

滅菌前・使用前に、汚れ・破損・可動部の動き等を点検する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: **村中医療器株式会社**
TEL: 0725-53-5546

